


Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom

Uputstvo za uporabu

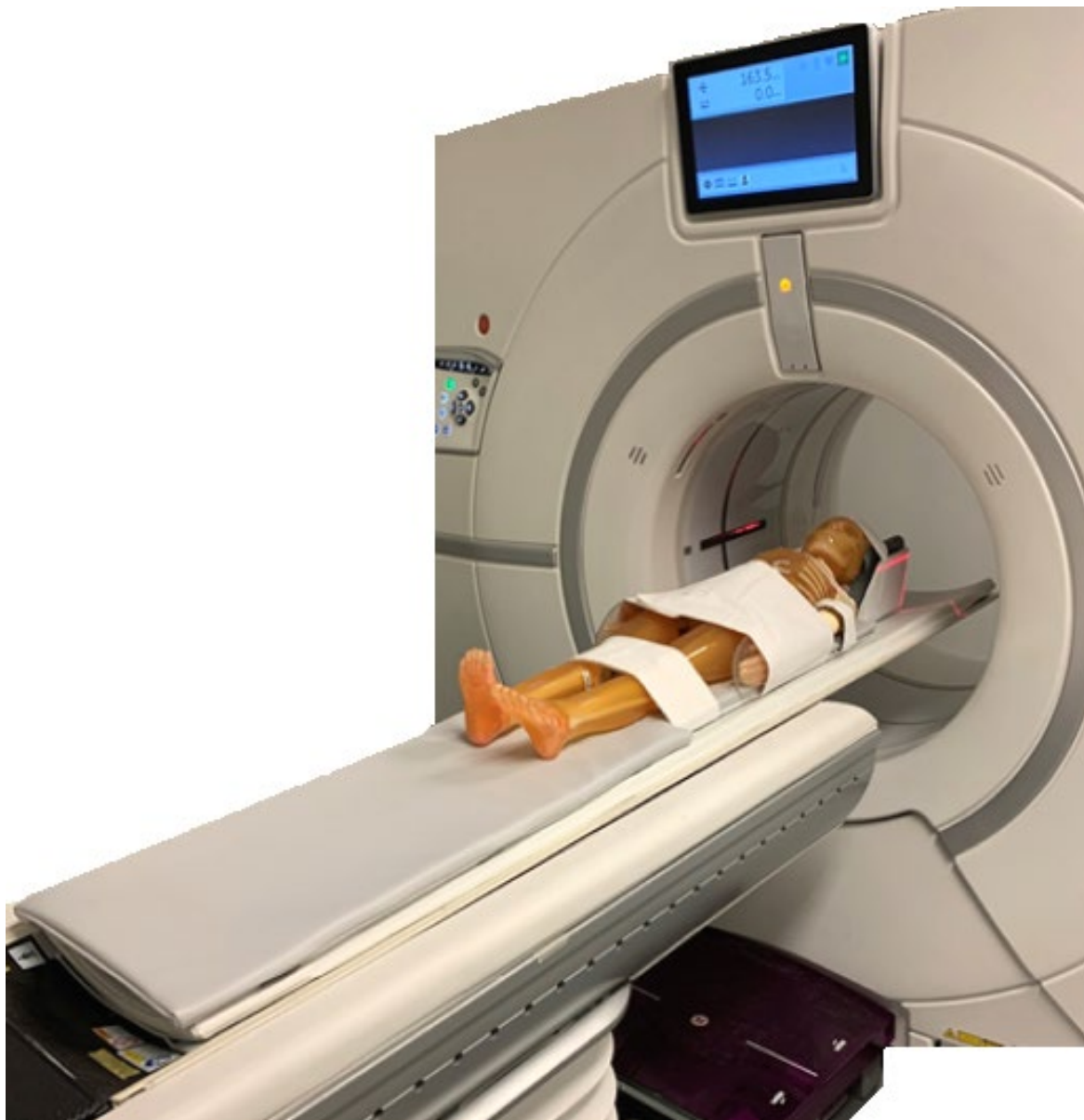

Bitne informacije

hr - E8003S Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom

en – E8003S CHILD POSITIONER FOR GE CT SYSTEMS
fr - E8003S Positionneur pour enfant pour systèmes CT de GE
de - E8003S Kinderpositionierer für GE CT-Systeme
it - E8003S Posizionatore da bambino per sistemi GE CT
es - E8003S Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE
el – E8003S Τοποθετητής παιδιού για συστήματα αξονικού τομογράφου GE CT
ga – E8003S Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT
pt-BR - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ZH-CN - E8003S GE CT 系統的兒童體位固定裝置
ja - E8003S GE CTシステム用チャイルドポジショナ
bg - E8003S Детски позиционер за GE CT системи
zh - E8003S GE CT 系统的儿童体位固定装置
cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT
da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer
nl - E8003S Child Positioner voor GE CT Systemen
et - E8003S Lapse positsioneerija GE KT-süsteemidele
fi - E8003S Lasten asetin GE TT -järjestelmiä varten
mt – E8003S Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT
hu - E8003S Gyermek teströgzítő szett GE CT rendszerekhez
ko – E8003S GE CT 시스템 용 차일드 포지셔너
lv - E8003S Bērnu fiksators GE CT sistēmām
lt - E8003S Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms
no – E8003S Barneposisjoner for GE CT-systemer
pl - E8003S Pozycjoner pediatryczny do systemów TK firmy GE
pt - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ro - E8003S Pozitie pentru copii pentru sistemele GE CT
ru - E8003S Детский позиционер для систем GE CT
sr - E8003S Дечји позиционер за GE ЦТ системе
id - E8003S Positioner Anak untuk Sistem GE CT
sk - E8003S Detský polohovateľ pre CT systémy GE
sl - E8003S Komplet za nsramestitev otroka v GE CT
sv - E8003S Barnfixering för GE CT-system
tr - E8003S GE CT Sistemleri için Çocuk Konumlandırıcı
uk - E8003S Дитячий позиционер для систем GE CT
kk – E8003S GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы
vi – E8003S Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT



Proizvođač:
Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 USA
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Nije napravljeno
od prirodne
gume




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



UPOZORENJE:

Ovaj vas proizvod može izložiti kemikalijama za koje država Kalifornija zna da nanose štetu reproduktivnom sustavu. Za više informacija posjetite www.P65Warnings.ca.gov. 1-methyl-2-pyrroldione (NMP) CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1

Komponente

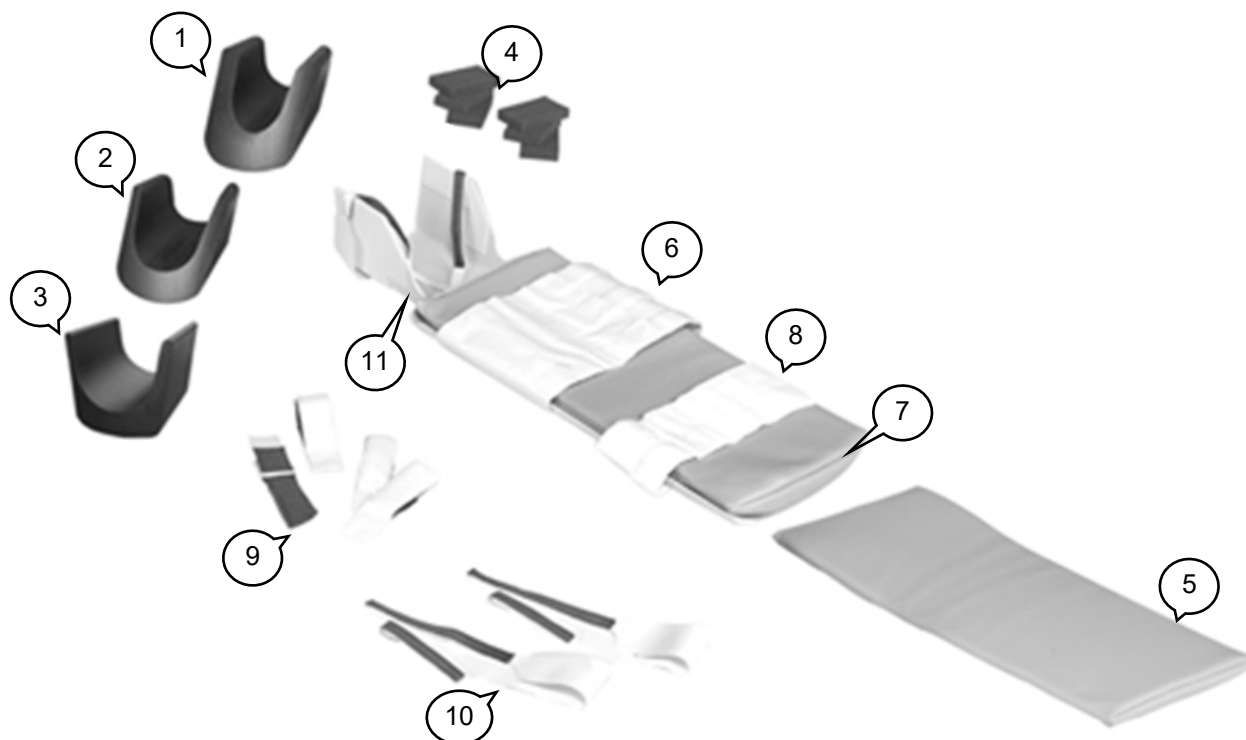

Stavka	Broj komponente	Opis
1	28024	E8003SA CT Jastuk za pozicioniranje glave djeteta - mali
2	28025	E8003SB CT Jastuk za pozicioniranje glave djeteta - srednji
3	28026	E8003SC CT Jastuk za pozicioniranje glave djeteta - veliki
4	20603	E8003DG Pjenasti blok
5	28060	E8005BD Podloga, produžetak
6	23802	E8005AG Traka po pozicioniranje tijela djeteta, široka
7	28057	E8005AJ Podloga za pozicioniranje djeteta
8	28058	E8005AH Traka po pozicioniranje tijela djeteta - uska
9	26940	E8005BA Trake za pozicioniranje zapešća
10	23531	E8002BB Trake za pozicioniranje glave
11	21540	E8005AK Kolijevka za pozicioniranje djeteta

Pažnja: Bilo koju ozbiljnu nezgodu vezanu za uporabu uređaja treba prijaviti proizvođaču i zdravstvenom licu/odgovornom organu kod kojeg je uređaj instaliran.




Upozorenje! Prije postavljanja pacijenta ploča za pozicioniranje pacijenta mora biti čvrsto pričvršćena kako bi spriječila pad pacijenta.



Upozorenje! Prije pokretanja postupka, pacijent mora biti pravilo pozicioniran i osiguran, a kolijevka mora biti pričvršćena za stol pomoću traka kako bi spriječila pad pacijenta.


Instaliranje

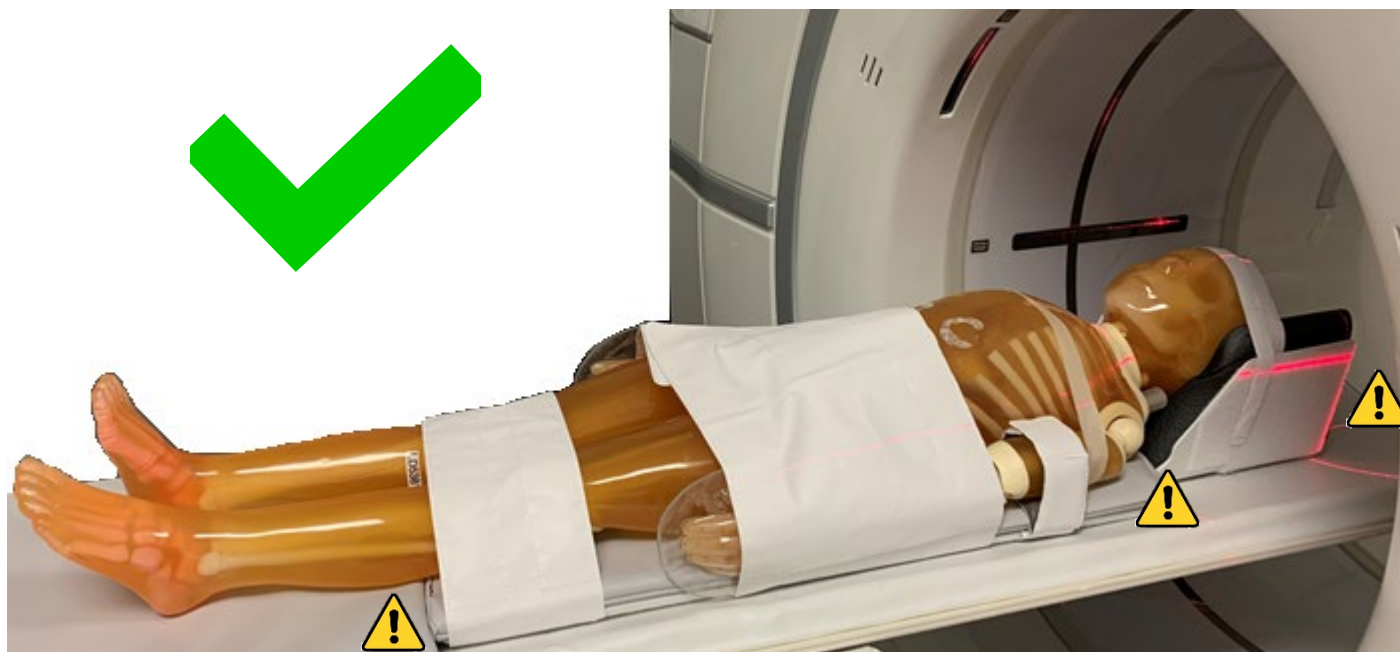



Upozorenje! Ne postavljajte snimani dio tijela iznad spojnica.



Kolijevka treba biti udaljena oko ~12inča, odnosno ~30.5cm od kraja stola kako kvaka za produljenje stola ne bi stvarala smetnje

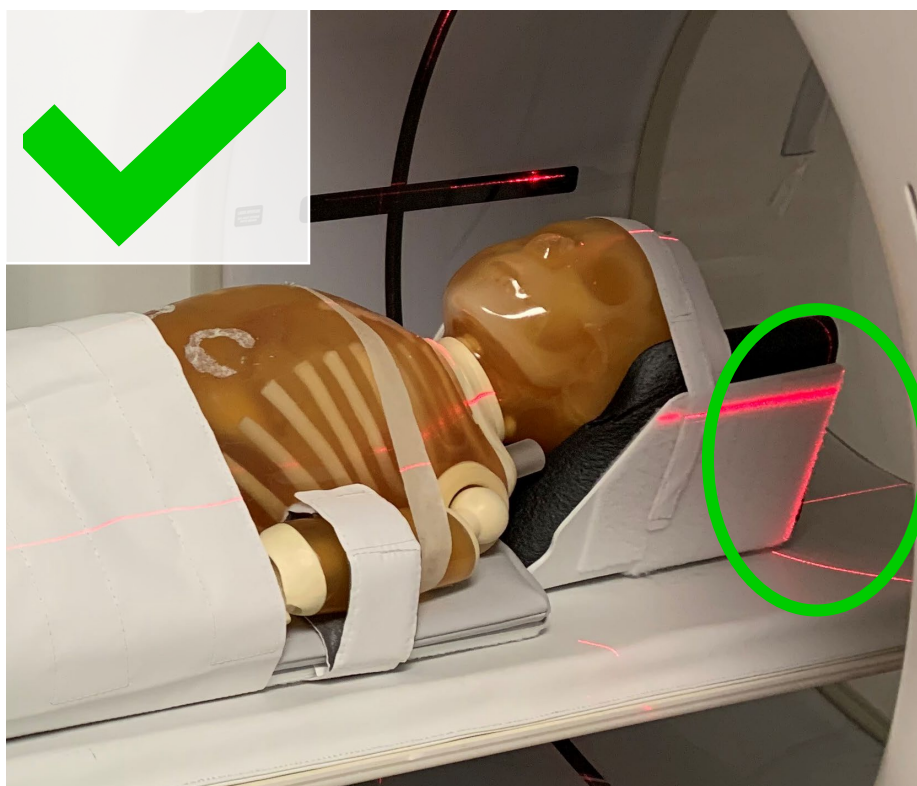

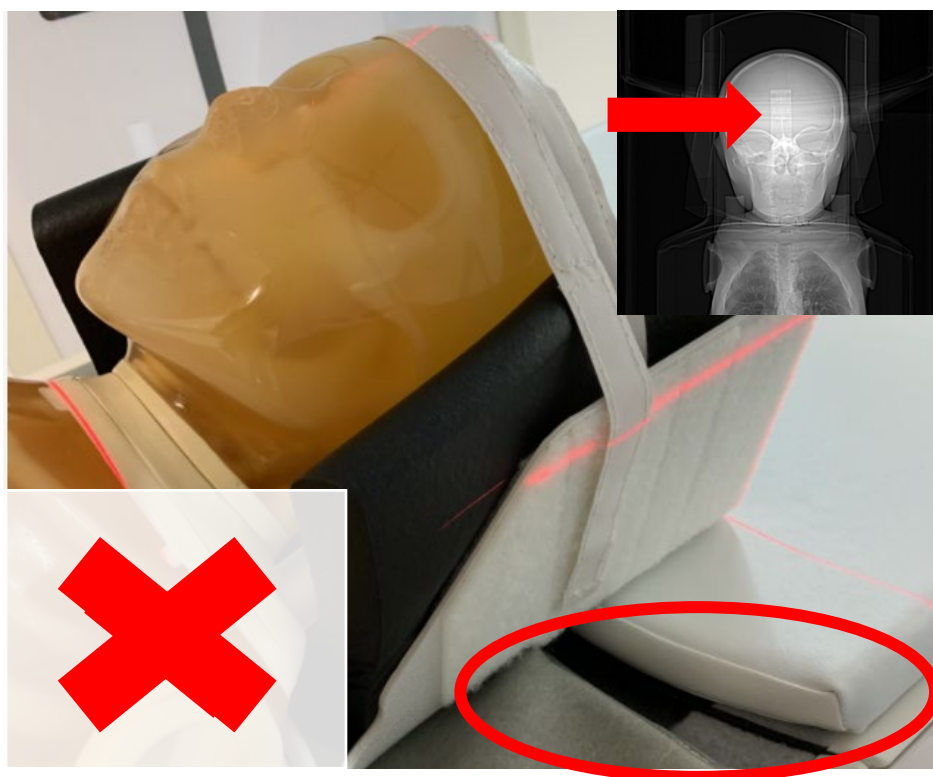

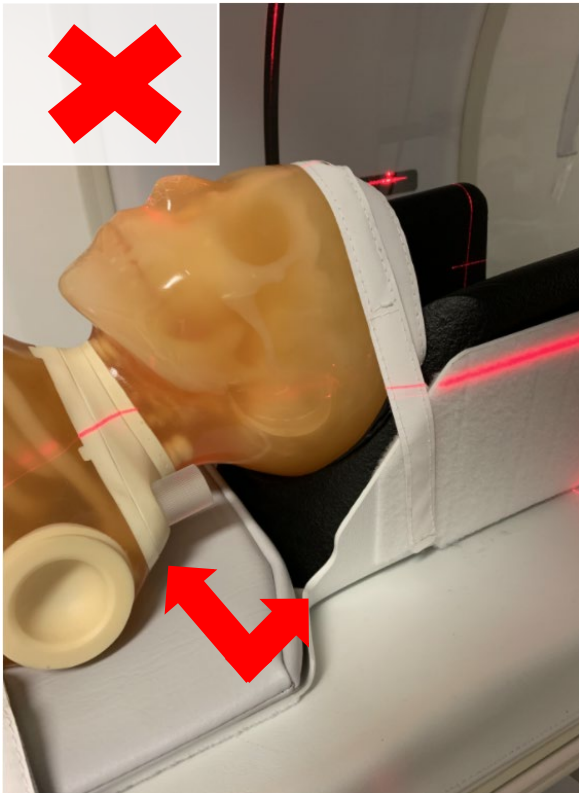

Čišćenje i dezinfekcija

Čistite uklanjanjem prljavštine i dezinficirajte prema uputama proizvođača/sukladno domaćoj okolišnoj praksi čišćenja koristeći:

- Izbjeljivač koji se koristi u kućanstvu – razrijeđen u omjeru 10:1 (minimalno vrijeme dezinfekcije je 5 minuta)
- Sani-Cloth® PDI maramice za izbjeljivanje
- Clorox Healthcare® antimikrobne maramice za izbjeljivanje
- Clorox Healthcare® antimikrobni sprej za izbjeljivanje
- Clorox Healthcare® dezinfekcijske maramice s vodikovim-peroksidom za čišćenje
- Clorox® Univerzalni čistač s izbjeljivačem
- Medline mikrokill antimikrobna otopina za izbjeljivanje
- Medline mikrokill antimikrobne maramice za izbjeljivanje



Upozorenje! UVIJEK proizvode isperite vodom kako biste uklonili ostatke otopine za čišćenje/dezinfekciju. U suprotnom pacijent može biti ozlijeđen.