

Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT Treoracha Úsáide



Eolas Tábhachtach

ga – E8003S Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT

en – E8003S CHILD POSITIONER FOR GE CT SYSTEMS
fr - E8003S Positionneur pour enfant pour systèmes CT de GE
de - E8003S Kinderpositionierer für GE CT-Systeme
it - E8003S Posizionatore da bambino per sistemi GE CT
es - E8003S Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE
el – E8003S Τοποθετητής παιδιού για συστήματα αξονικού τομογράφου GE CT
pt-BR - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ZH-CN - E8003S GE CT 系統的儿童體位固定裝置
ja - E8003S GE CTシステム用チャイルドポジショナ
bg - E8003S Детски позиционер за GE CT системи
zh - E8003S GE CT 系統的儿童体位固定裝置
hr - E8003S Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom
cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT
da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer
nl - E8003S Child Positioner voor GE CT Systemen
et - E8003S Lapse positsioneerija GE CT-süsteemidele
fi - E8003S Lasten asetin GE TT -järjestelmiä varten
mt – E8003S Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT
hu - E8003S Gyermekek teströgzítő szett GE CT rendszerekhez
ko – E8003S GE CT 시스템 용 차일드 포지셔너
lv - E8003S Bērnu fiksators GE CT sistēmām
lt - E8003S Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms
no – E8003S Barneposisjoner for GE CT-systemer
pl - E8003S Pozycjoner pediatryczny do systemów TK firmy GE
pt - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ro - E8003S Pozitie pentru copii pentru sistemele GE CT
ru - E8003S Детский позиционер для систем GE CT
sr - E8003S Дечји позиционер за GE CT системе
id - E8003S Positioner Anak untuk Sistem GE CT
sk - E8003S Detský polohovateľ pre CT systémy GE
sl - E8003S Komplet za nsravnostitev otroka v GE CT
sv - E8003S Barnfixering för GE CT-system
tr - E8003S GE CT Sistemleri için Çocuk Konumlandırıcı
uk - E8003S Дитячий позиционер для систем GE CT
kk – E8003S GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы
vi – E8003S Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT



Déanta Ag:
Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 USA
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Ní Dhéantar Le
Laitéis Rubair
Nádúrtha




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



AIRE:

D'fhéadfadh an táirge seo thú a fhágáil gan chosaint ar cheimiceáin a dhéanann dochar ar an gcóras atáirgthe, agus is eol do Stát Chalifornia. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach www.P65Warnings.ca.gov. 1-methyl-2-pyrroldione (NMP) CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1

Comhpháirteanna

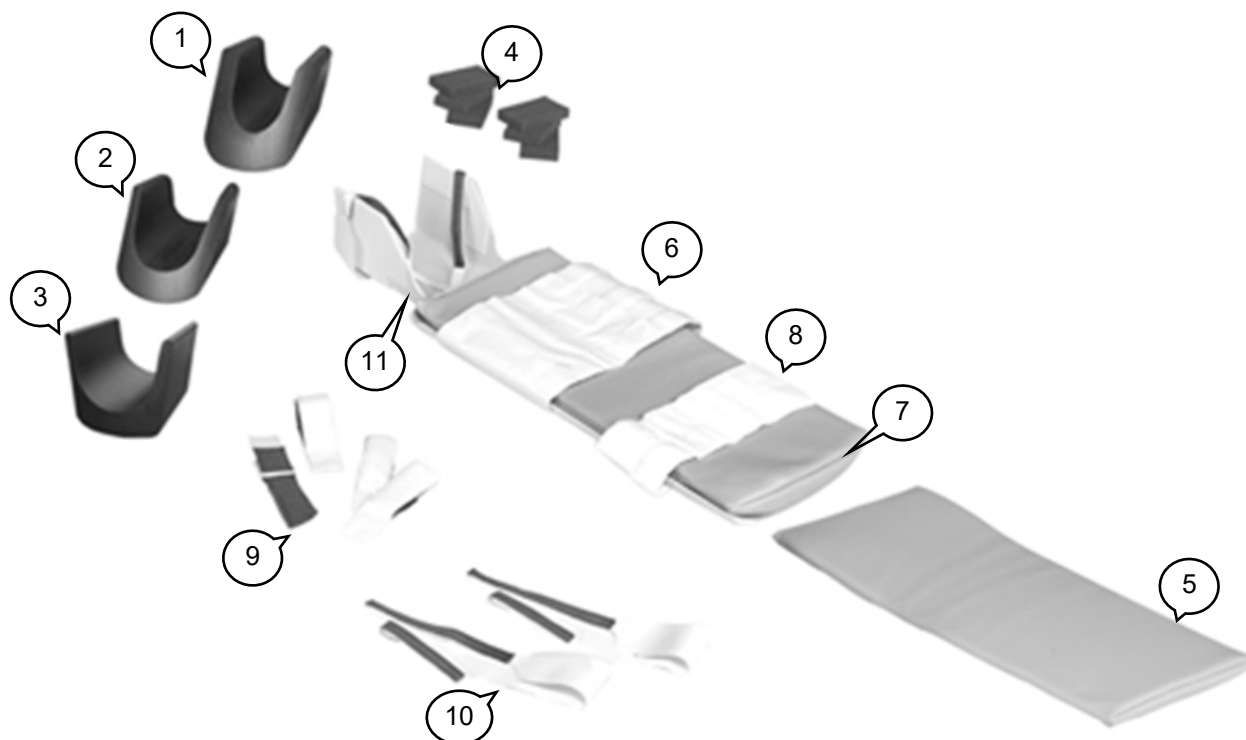

Ball	Uimhir Chomhpháirte	Cur Síos
1	28024	E8003SA Cúisín Cinn Páiste CT - Beag
2	28025	E8003SB Cúisín Cinn Páiste CT – Meánach
3	28026	E8003SC Cúisín Cinn Páiste CT – Mór
4	20603	E8003DG Bloc Cúir
5	28060	E8005BD Ceap, Síneadh
6	23802	E8005AG Strapa Coirp Shocraitheoir Páiste, Leathan
7	28057	E8005AJ Ceap Shocraitheoir Páiste
8	28058	E8005AH Strapa Coirp Shocraitheoir Páiste - Caol
9	26940	E8005BA Strapaí Rosta Shocraitheoir Páiste
10	23531	E8002BB Strapaí Cinn Shocraitheoir Páiste
11	21540	E8005AK Cliabhán Shocraitheoir Páiste

Tabhair faoi deara: Ba cheart go dtuairiscítear aon eachtra throm a bhaineann le húsáid an táirge don déantóir agus d’údarás sláinte/údarás inniúil ina bhfuil an táirge.



Aire! Ní mór go mbeadh an clár othair daingean roimh lódáil an othair ionas nach dtitfidh an t-othar.



Aire! Roimh thosach an ghnáis, ní mór go ndaingnítear an t-othar i gceart sa socraitheoir, agus ní mór go ndaingnítear an socraitheoir ar bhord le strapáí ionas nach dtitfidh an t-othar.


Cumraíocht






Aire! Ná cuir ball coirp bainteach thar cumair.



Ba chóir go mbeadh an socraitheoir timpeall ~12in nó ~30.5cm ó bhun an bhoird ionas nach bhfuil aon thrasnaíocht ó laiste shíneadh an bhoird.

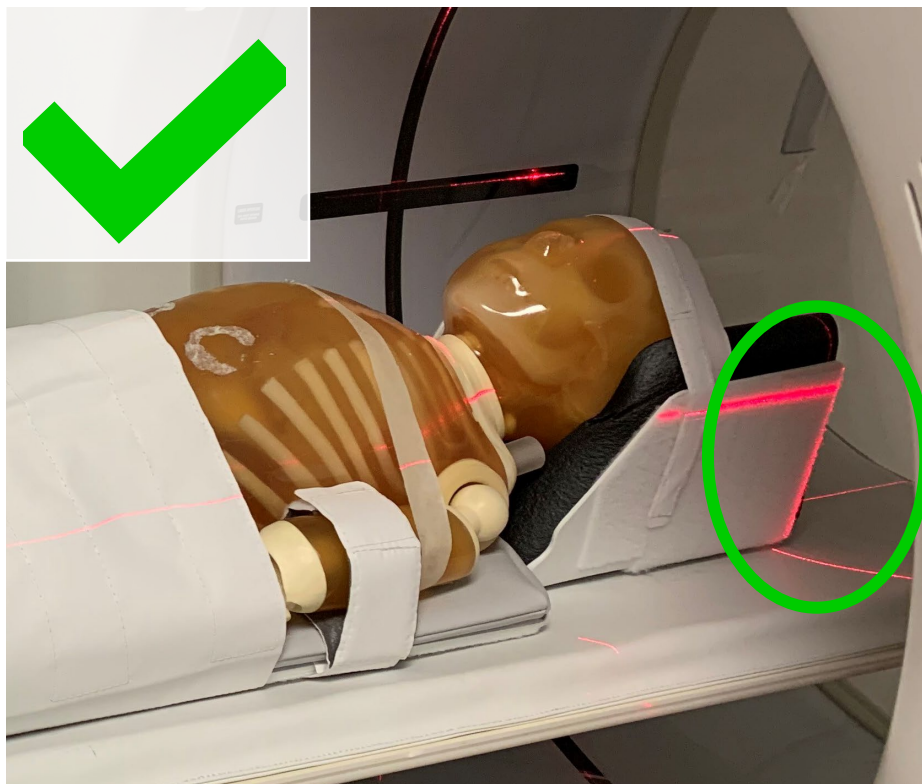

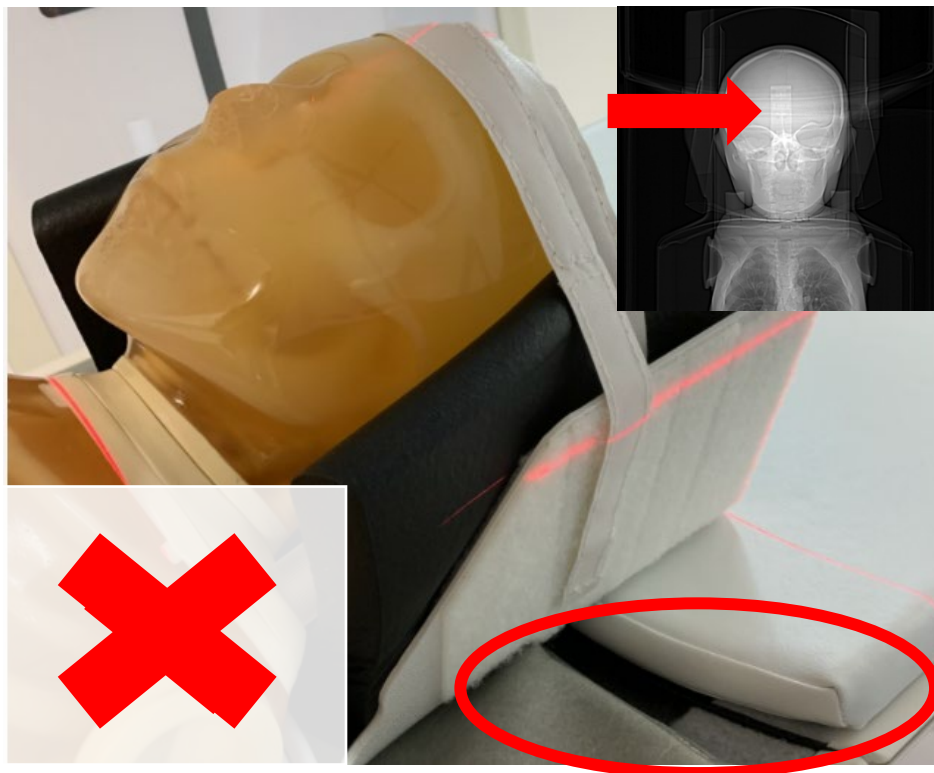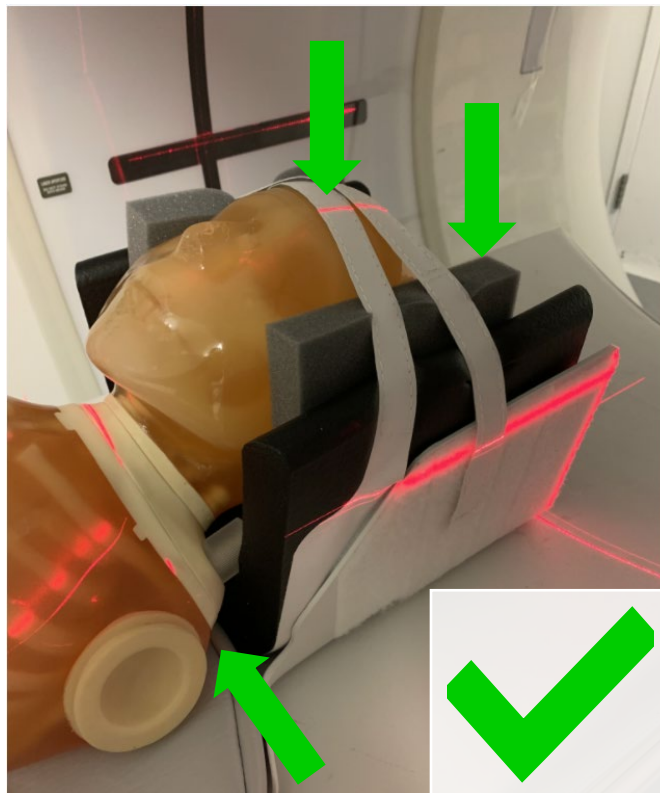

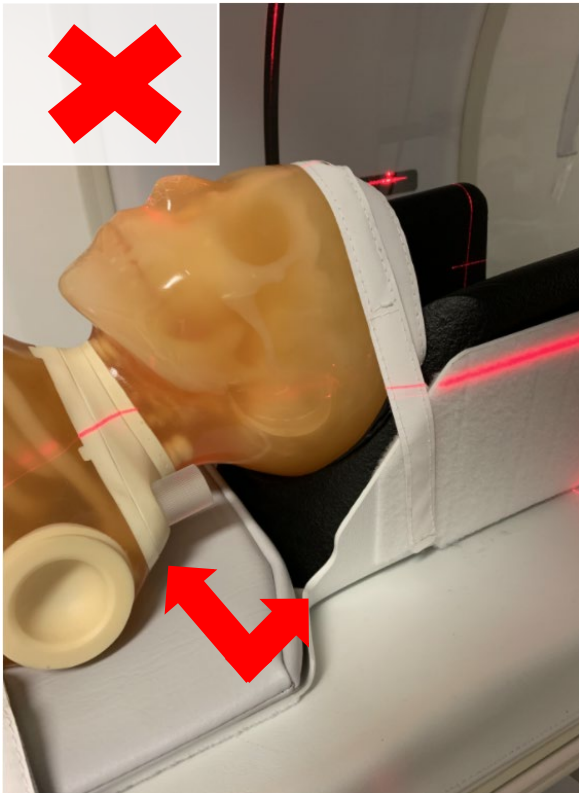

Glanadh agus Díghalrú

Glan é trí chre a bhaint agus díghalraigh é de réir threoracha an déantóra/de réir chleachtais ghlanadh timpeallachta saoráide áitiúla trí úsáid a bhaint as:

- Common household bleach - diluted 10:1 (am díghalraithe 5-nóiméad ar a laghad)
- Sani-Cloth® Bleach Wipes by PDI
- Bleach Germicidal Wipes by Clorox Healthcare®
- Bleach Germicidal Cleaner Spray by Clorox Healthcare®
- Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectant Wipes by Clorox Healthcare®
- Clorox® Multi Surface Cleaner With Bleach
- Micro-Kill Bleach Germicidal Bleach Solution by Medline
- Micro-Kill Bleach Germicidal Bleach Wipes by Medline



Aire! Sruthlaigh táirgí i GCÓNAÍ le huisce glan chun aon iarmhar ó thuaslagán glanta/díghalraithe a bhaint. Mura ndéantar, d'fhéadfadh go ngortódh an t-othar.