

# Posizionatore da bambino per sistemi GE CT

## Istruzioni per l'uso



# Informazioni Importanti

## it - E8003S Posizionatore da bambino per sistemi GE CT

en - E8003S CHILD POSITIONER FOR GE CT SYSTEMS  
fr - E8003S Positionneur pour enfant pour systèmes CT de GE  
de - E8003S Kinderpositionierer für GE CT-Systeme  
es - E8003S Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE  
el - E8003S Τοποθετητής παιδιού για συστήματα αξονικού τομογράφου GE CT  
ga - E8003S Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT  
pt-BR - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE  
ZH-CN - E8003S GE CT 系統的兒童體位固定裝置  
ja - E8003S GE CTシステム用チャイルドポジショナ  
bg - E8003S Детски позиционер за GE CT системи  
zh - E8003S GE CT 系统的儿童体位固定装置  
hr - E8003S Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom  
cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT  
da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer  
nl - E8003S Child Positioner voor GE CT Systemen  
et - E8003S Lapse positsioneerija GE CT-süsteemidele  
fi - E8003S Lasten asetin GE TT -järjestelmiä varten  
mt - E8003S Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT  
hu - E8003S Gyermekek teströgzítő szett GE CT rendszerekhez  
ko - E8003S GE CT 시스템 용 차일드 포지셔너  
lv - E8003S Bērnu fiksators GE CT sistēmām  
lt - E8003S Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms  
no - E8003S Barneposisjoner for GE CT-systemer  
pl - E8003S Pozycjoner pediatryczny do systemów TK firmy GE  
pt - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE  
ro - E8003S Pozitie pentru copii pentru sistemele GE CT  
ru - E8003S Детский позиционер для систем GE CT  
sr - E8003S Дечји позиционер за GE CT системе  
id - E8003S Positioner Anak untuk Sistem GE CT  
sk - E8003S Detský polohovateľ pre CT systémy GE  
sl - E8003S Komplet za nsramestitev otroka v GE CT  
sv - E8003S Barnfixering för GE CT-system  
tr - E8003S GE CT Sistemleri için Çocuk Konumlandırıcı  
uk - E8003S Дитячий позиционер для систем GE CT  
kk - E8003S GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы  
vi - E8003S Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT



**Prodotto da:**  
Domico Med-Device, LLC  
14241 North Fenton Rd.  
Fenton, MI 48430 USA  
810-750-5300  
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



**Non realizzato  
con  
lattice di gomma  
naturale**




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2<sup>nd</sup> Flr.,  
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



### AVVERTENZA:

Questo prodotto può esporvi a sostanze chimiche, note allo Stato della California per causare danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, consultare il sito [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov) 1-metil-2-pirroldione (NMP) CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1

## Componenti

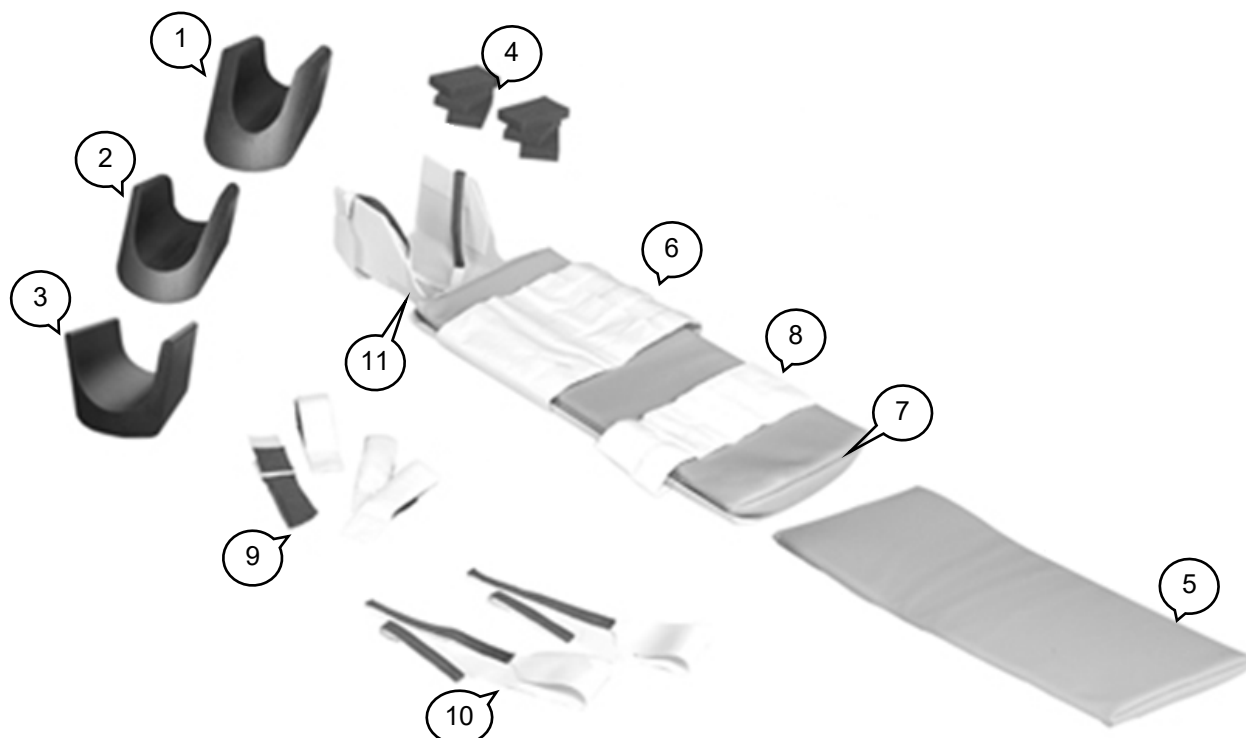

| Articolo | Codice prodotto | Descrizione                                                                 |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 28024           | E8003SA Cuscino per la testa del bambino CT - Piccolo                       |
| 2        | 28025           | E8003SB Cuscino per la testa del bambino CT - Medio                         |
| 3        | 28026           | E8003SC Cuscino per la testa del bambino CT - Grande                        |
| 4        | 20603           | E8003DG Blocco in schiuma                                                   |
| 5        | 28060           | E8005BD Materassino posizionario, prolunga                                  |
| 6        | 23802           | E8005AG Cinghia di fissaggio corpo per il posizionario da bambino, larga    |
| 7        | 28057           | E8005AJ Materassino posizionario da bambino                                 |
| 8        | 28058           | E8005AH Cinghia di fissaggio corpo per il posizionario da bambino - stretta |
| 9        | 26940           | E8005BA Cinghie di fissaggio polso per il posizionario da bambino           |
| 10       | 23531           | E8002BB Cinghie di fissaggio testa per il posizionario da bambino           |
| 11       | 21540           | E8005AK Culla per il posizionario da bambino                                |

**Nota:** qualsiasi incidente grave correlato all'uso del dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità sanitaria/autorità locale competente.




**Avvertenza!** Controllare la stabilità del lettino prima di collocarvi il paziente, in modo da evitare la caduta del paziente.



**Avvertenza!** Prima di iniziare la procedura, assicurarsi che il paziente sia adeguatamente sistemato nel posizionario, e che il posizionario sia fissato al lettino con le cinghie per evitare la caduta del paziente.

## Preparazione

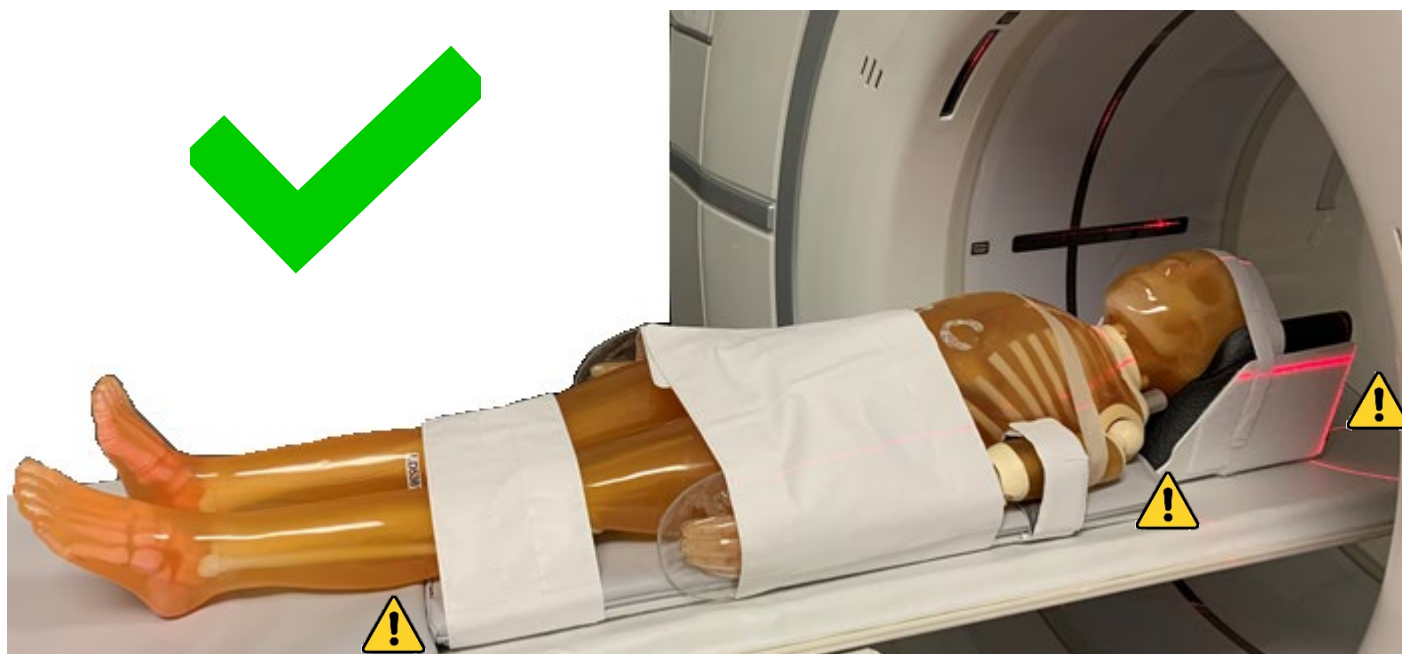


 **Avvertenza!** Non posizionare le parti anatomiche da esaminare sopra le giunzioni.









Il posizionatore deve trovarsi a circa ~30,5 cm, o ~12 pollici, dall'estremità del lettino, in modo da evitare di interferire con il fermo dello scorrimento del lettino.

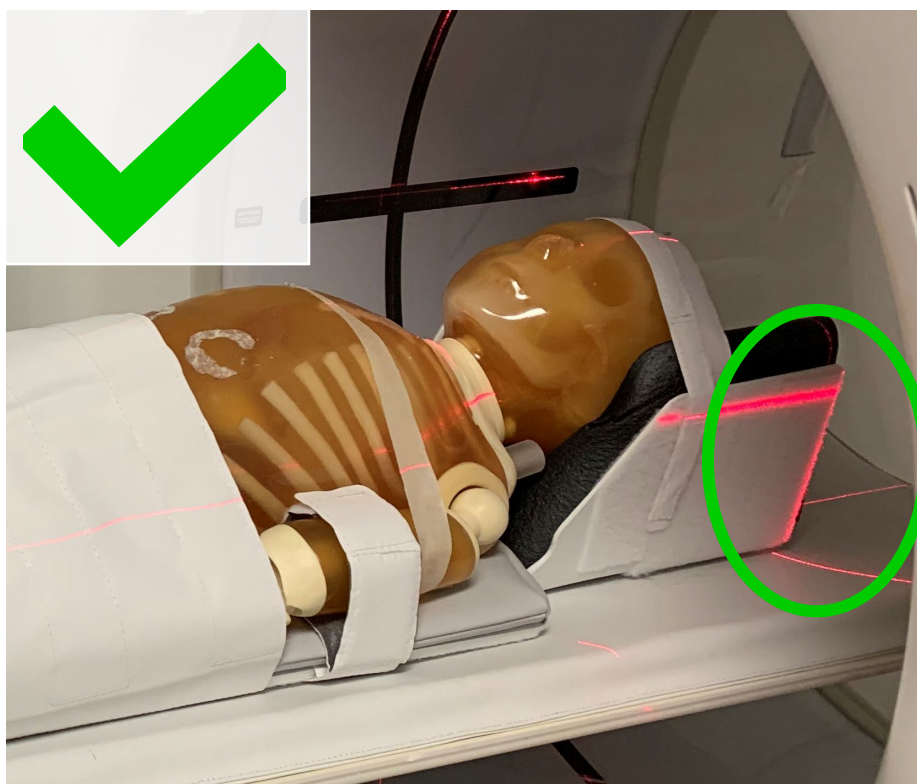

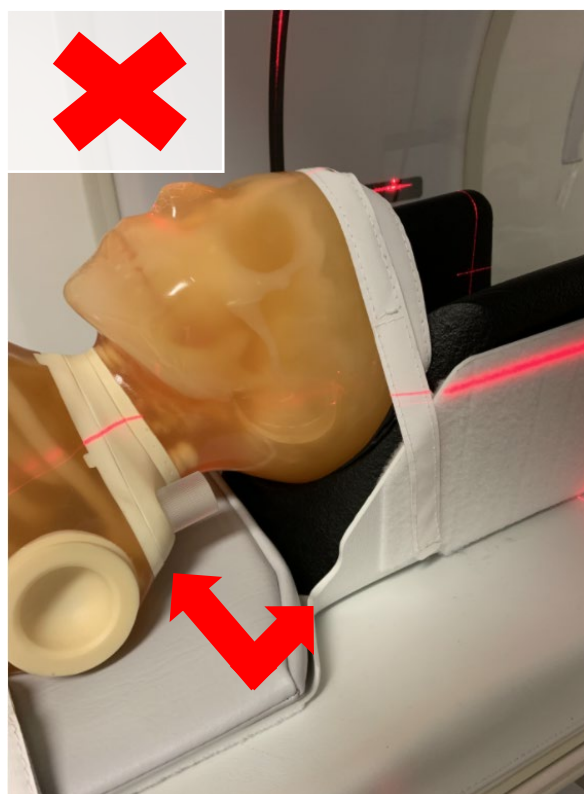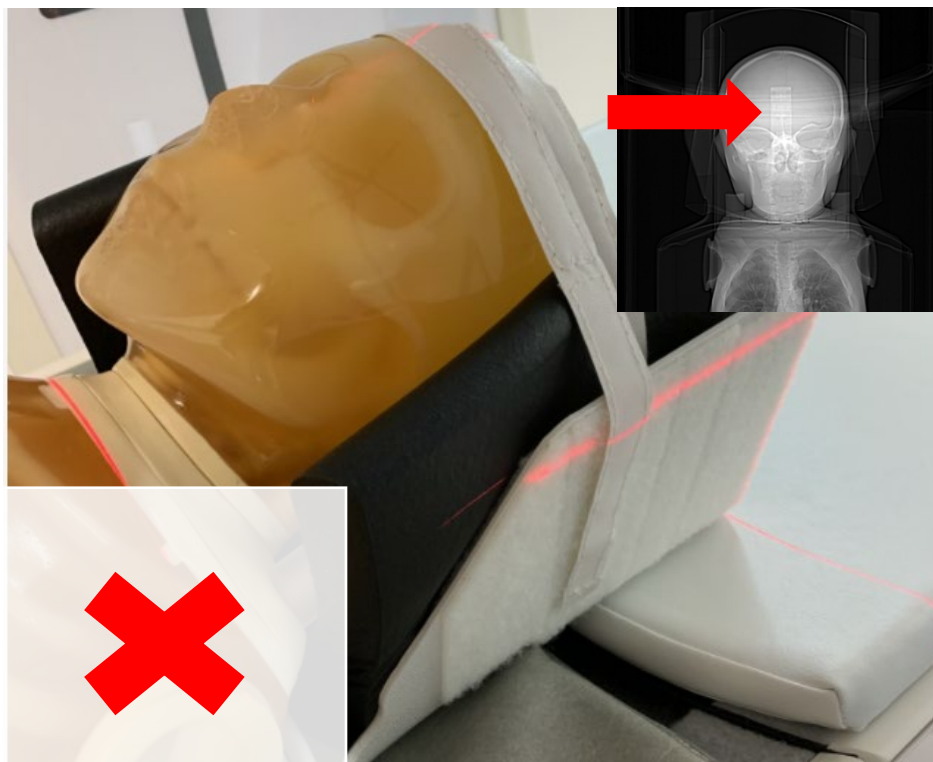



## Pulizia e disinfezione

Pulire rimuovendo lo sporco e disinfettare secondo le istruzioni del produttore/secondo le pratiche di pulizia ambientale adottate dalla struttura locale utilizzando:

- Normale candeggina per uso domestico - diluita 10:1 (tempo di disinfezione minimo 5 minuti)
- Salviette usa e getta con candeggina Sani-Cloth® prodotte dalla PDI
- Salviette usa e getta germicide con candeggina prodotte dalla Clorox Healthcare®
- Germicida spray con candeggina prodotto dalla Clorox Healthcare®
- Salviette disinfettanti per la pulizia al perossido di idrogeno prodotte dalla Clorox Healthcare®
- Detergente multisuperficie con candeggina della Clorox®
- Soluzione germicida Micro-Kill con candeggina della Medline
- Salviette germicide Micro-Kill con candeggina della Medline



**Avvertenza!** Risciacquare SEMPRE i prodotti con acqua pulita in modo da rimuovere eventuali residui dalla soluzione detergente/disinfettante. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare lesioni al paziente.