


GE CT システム用チャイルドポジショナー 使用説明書

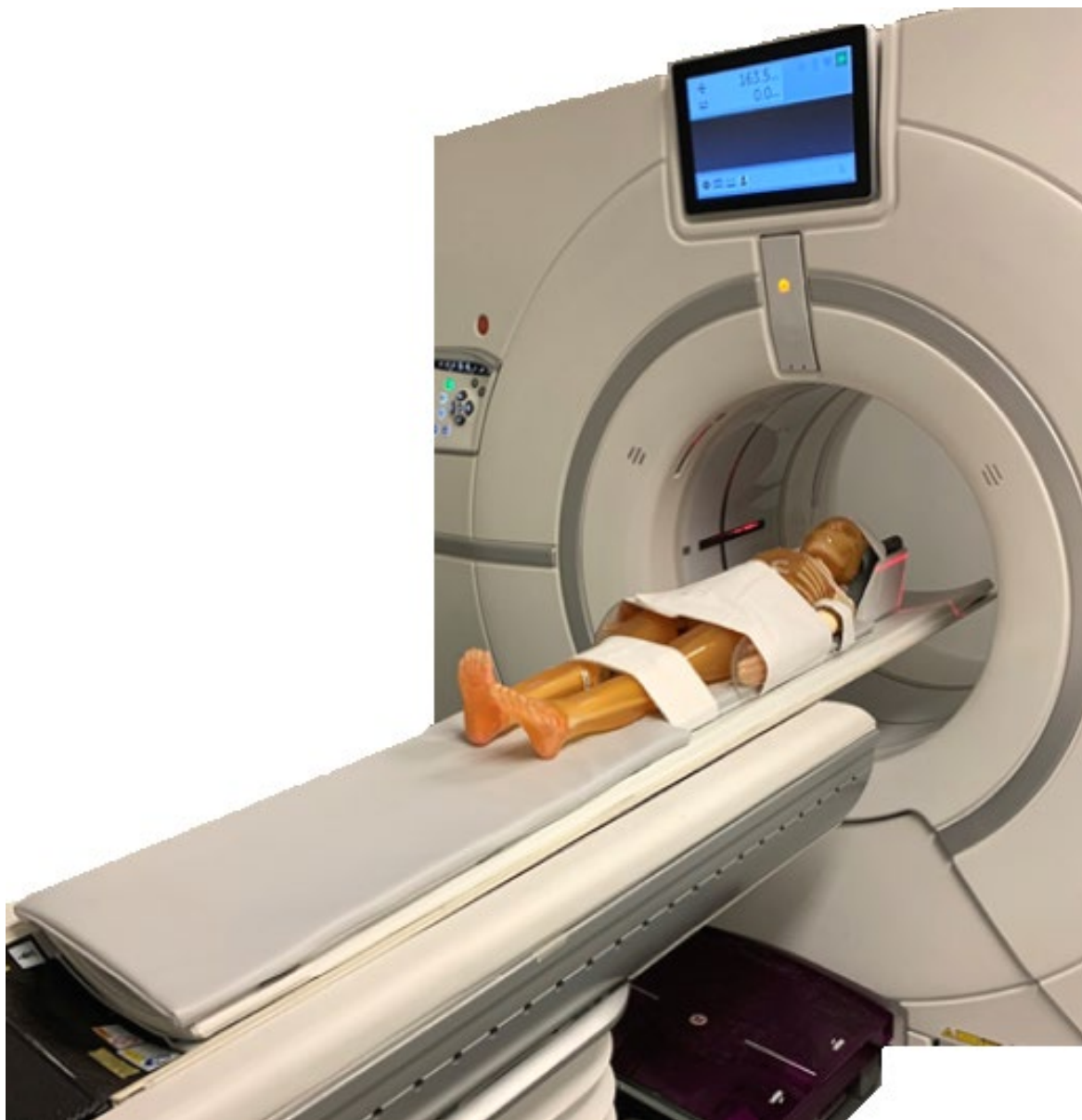

重要事項

ja - E8003S GE CT システム用チャイルドポジショナ

en - E8003S CHILD POSITIONER FOR GE CT SYSTEMS
fr - E8003S Positionneur pour enfant pour systèmes CT de GE
de - E8003S Kinderpositionierer für GE CT-Systeme
it - E8003S Posizionatore da bambino per sistemi GE CT
es - E8003S Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE
el - E8003S Τοποθετητής παιδιού για συστήματα αξονικού τομογράφου GE CT
ga - E8003S Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT
pt-BR - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ZH-CN - E8003S GE CT 系統的兒童體位固定裝置
bg - E8003S Детски позиционер за GE CT системи
zh - E8003S GE CT 系统的儿童体位固定裝置
hr - E8003S Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom
cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT
da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer
nl - E8003S Child Positioner voor GE CT Systemen
et - E8003S Lapse positsioneerija GE KT-süsteemidele
fi - E8003S Lasten asetin GE TT -järjestelmiä varten
mt - E8003S Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT
hu - E8003S Gyermek teströgzítő szett GE CT rendszerekhez
ko - E8003S GE CT 시스템 용 차일드 포지셔너
lv - E8003S Bērnu fiksators GE CT sistēmām
lt - E8003S Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms
no - E8003S Barneposisjonør for GE CT-systemer
pl - E8003S Pozycjoner pediatryczny do systemów TK firmy GE
pt - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ro - E8003S Pozitie pentru copii pentru sistemele GE CT
ru - E8003S Детский позиционер для систем GE CT
sr - E8003S Дечји позиционер за ГЕ ЦТ системе
id - E8003S Positioner Anak untuk Sistem GE CT
sk - E8003S Detský polohovateľ pre CT systémy GE
sl - E8003S Komplet za nsramestitev otroka v GE CT
sv - E8003S Barnfixering för GE CT-system
tr - E8003S GE CT Sistemleri için Çocuk Konumlandırıcı
uk - E8003S Дитячий позиционер для систем GE CT
kk - E8003S GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы
vi - E8003S Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT



 **製造者:**
Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 USA
810-750-5300
DomicoMed.com




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



この製品の使用により、アメリカ合衆国カリフォルニア州が生殖機能異常の原因となると指定した化学物質に曝される可能性があります。詳しくは、www.P65Warnings.ca.govにある 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP)、CAS: 872-50-4、EC: 212-828-1 のページをご覧ください。

各部の名称と部品番号

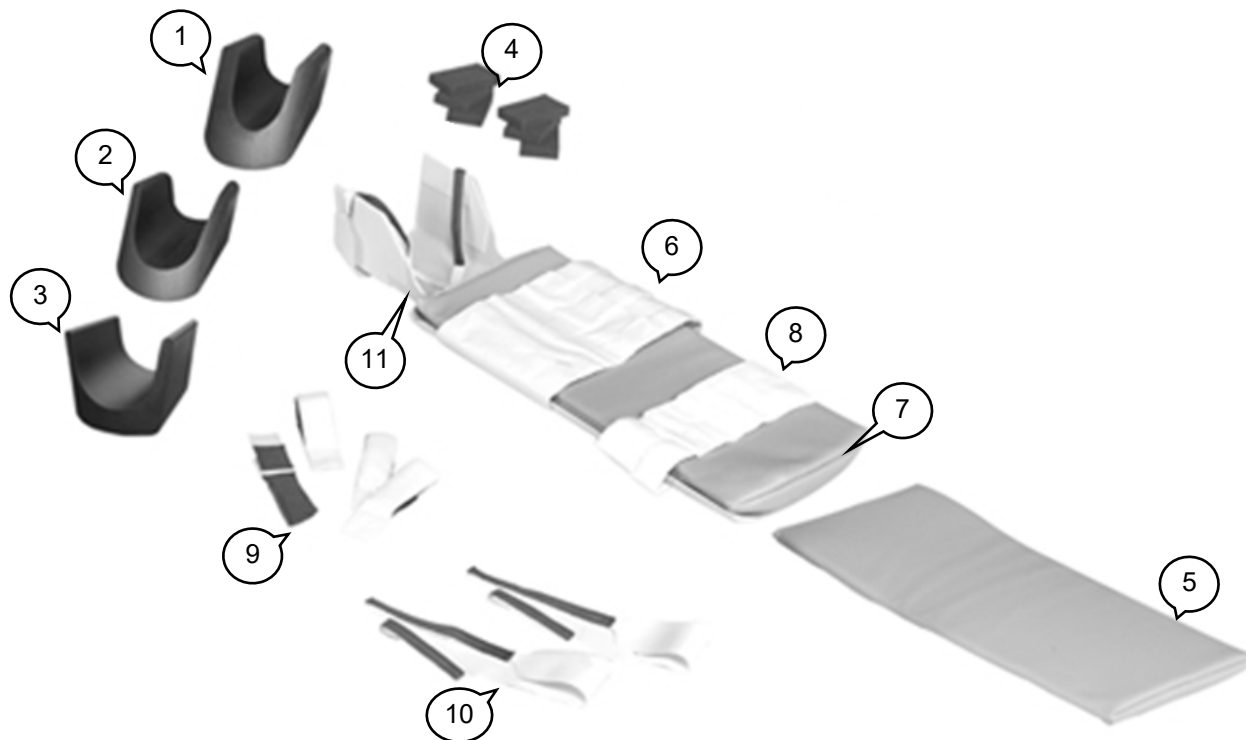

番号	部品番号	説明
1	28024	E8003SA CT 小児用ヘッドクッション - 小
2	28025	E8003SB CT 小児用ヘッドクッション - 中
3	28026	E8003SC CT 小児用ヘッドクッション - 大
4	20603	E8003DG スポンジフォーム
5	28060	E8005BD パッド、延長用
6	23802	E8005AG チャイルドポジショナーボディストラップ、幅広
7	28057	E8005AJ チャイルドポジショナーパッド
8	28058	E8005AH チャイルドポジショナーボディストラップ - 幅狭
9	26940	E8005BA チャイルドポジショナーリストストラップ
10	23531	E8002BB チャイルドポジショナーヘッドストラップ
11	21540	E8005AK チャイルドポジショナークレードル

注記: 当機器の使用に起因するすべての重大な事故は、製造者と、その機器が設置されている地域の保健医療当局および所轄官庁に必ず報告してください。




警告！ 台からの落下等を防ぐため、患者が乗る前に台部が安定していることを確認してください。



警告！ 患者の落下を防ぐため作業を開始する前に、患者を適切にポジショナー内に固定し、ポジショナー自体がストラップを使ってテーブルに固定されていることを確認してください。

準備


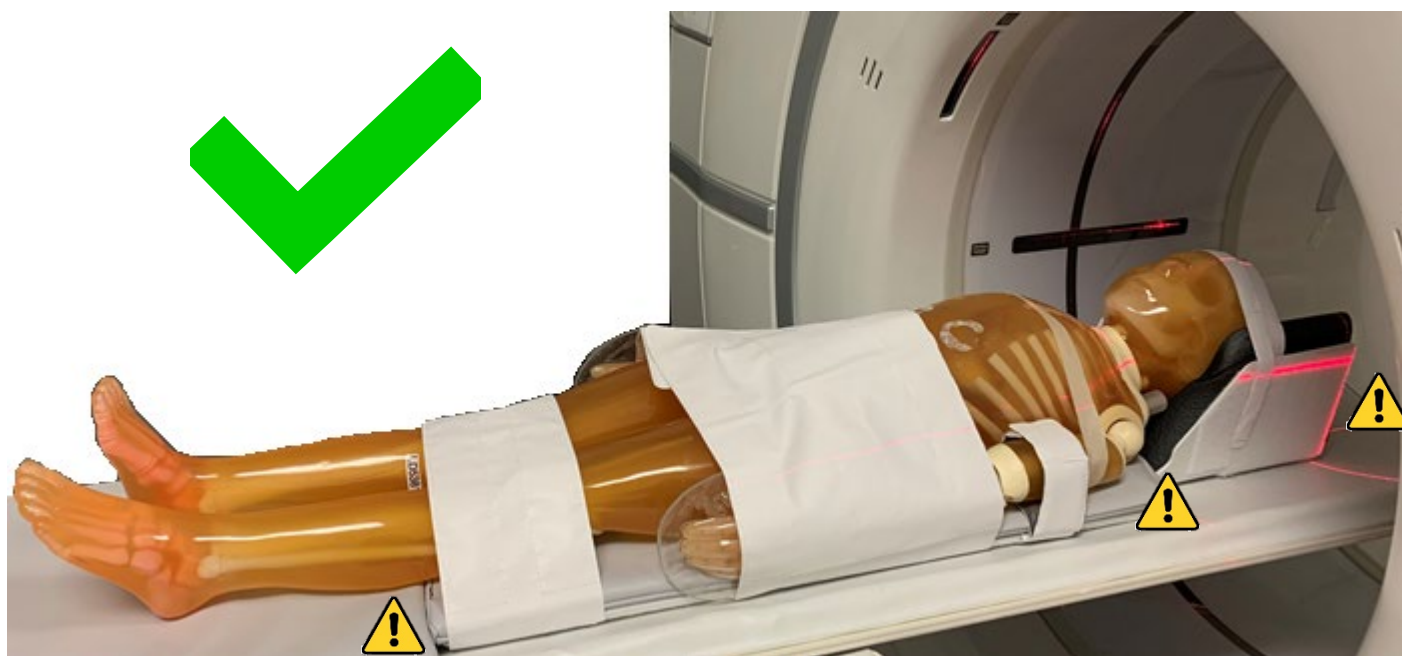




 警告！ 調べたい組織部分が台などの連結部分と重ならないよう、配置に注意してください。






テーブルの伸長ラッチ部分の邪魔にならないよう、ポジショナーはテーブルの端から約 30 センチのところに設置してください。

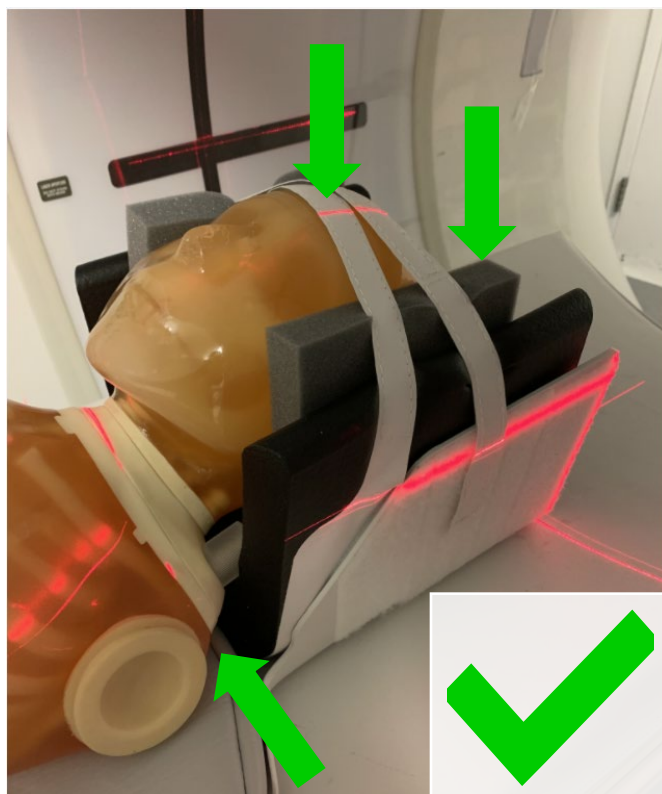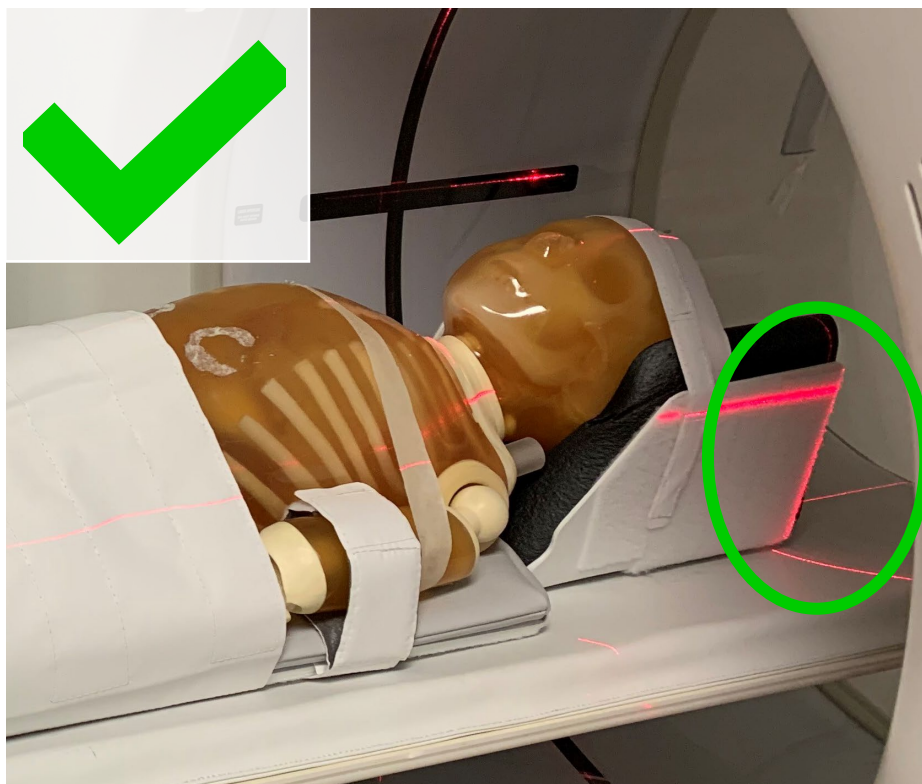

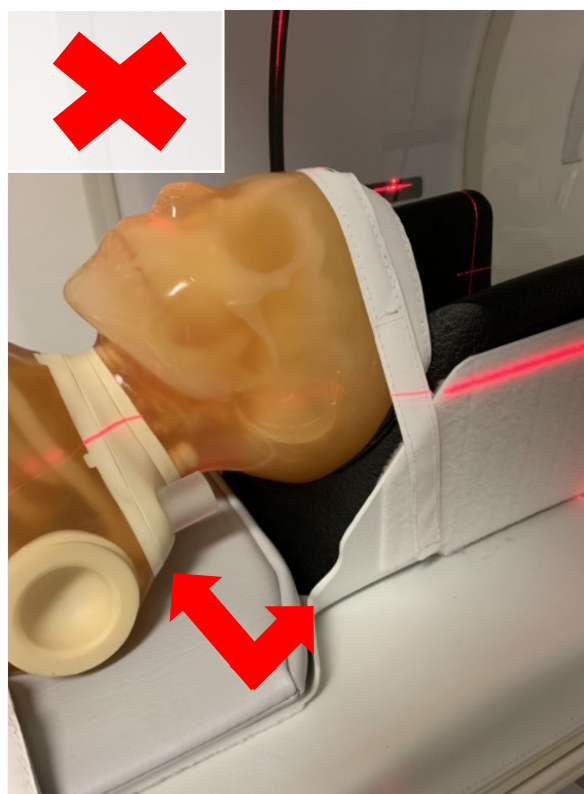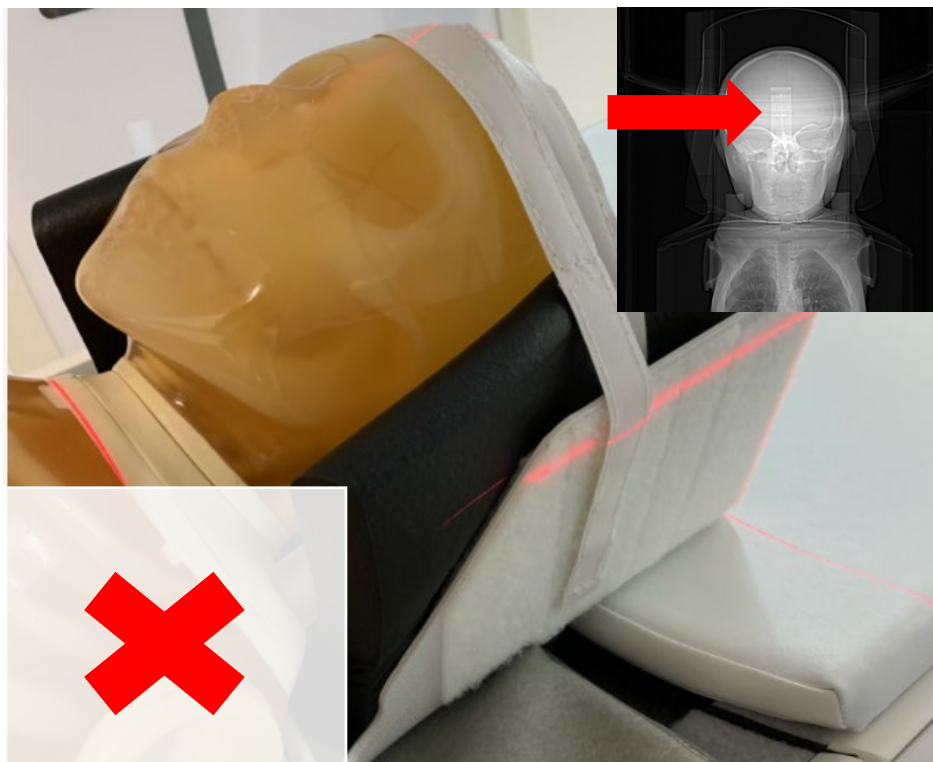

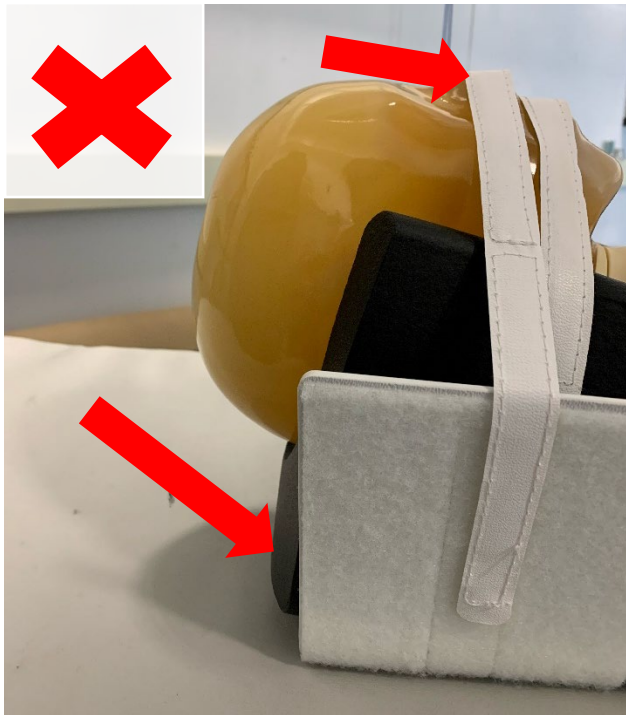

クリーニングと消毒

メーカーの指定した手順か、地域の定める施設内清掃手順に基づいて、次のアイテムまたはそれに準ずるものを使って汚れをきれいにふき取り、消毒してください：

- 一般に使用されている家庭用漂白剤 - 10 倍に水で希釈したもの（必要な消毒時間は最低 5 分）
- PDI 社のサニークロス® ブリーチウェットティッシュ
- クロロックスヘルスケア®社の漂白剤入り殺菌ウェットティッシュ
- クロロックスヘルスケア®社の漂白剤入り殺菌クリーナーズプレー
- クロロックスヘルスケア®社の過酸化水素入りクリーナー殺菌ウェットティッシュ
- クロロックス®社の漂白剤入りマルチクリーナー
- メドライン社のマイクロ殺菌漂白剤入り殺菌漂白液
- メドライン社のマイクロ殺菌漂白剤入り殺菌漂白ウェットティッシュ



警告！ クリーニングおよび殺菌用液剤が残存しないよう、最後にきれいな水で製品を洗ってください。
クリーナーや漂白液が残っていると患者に害を与える場合があります。