


GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

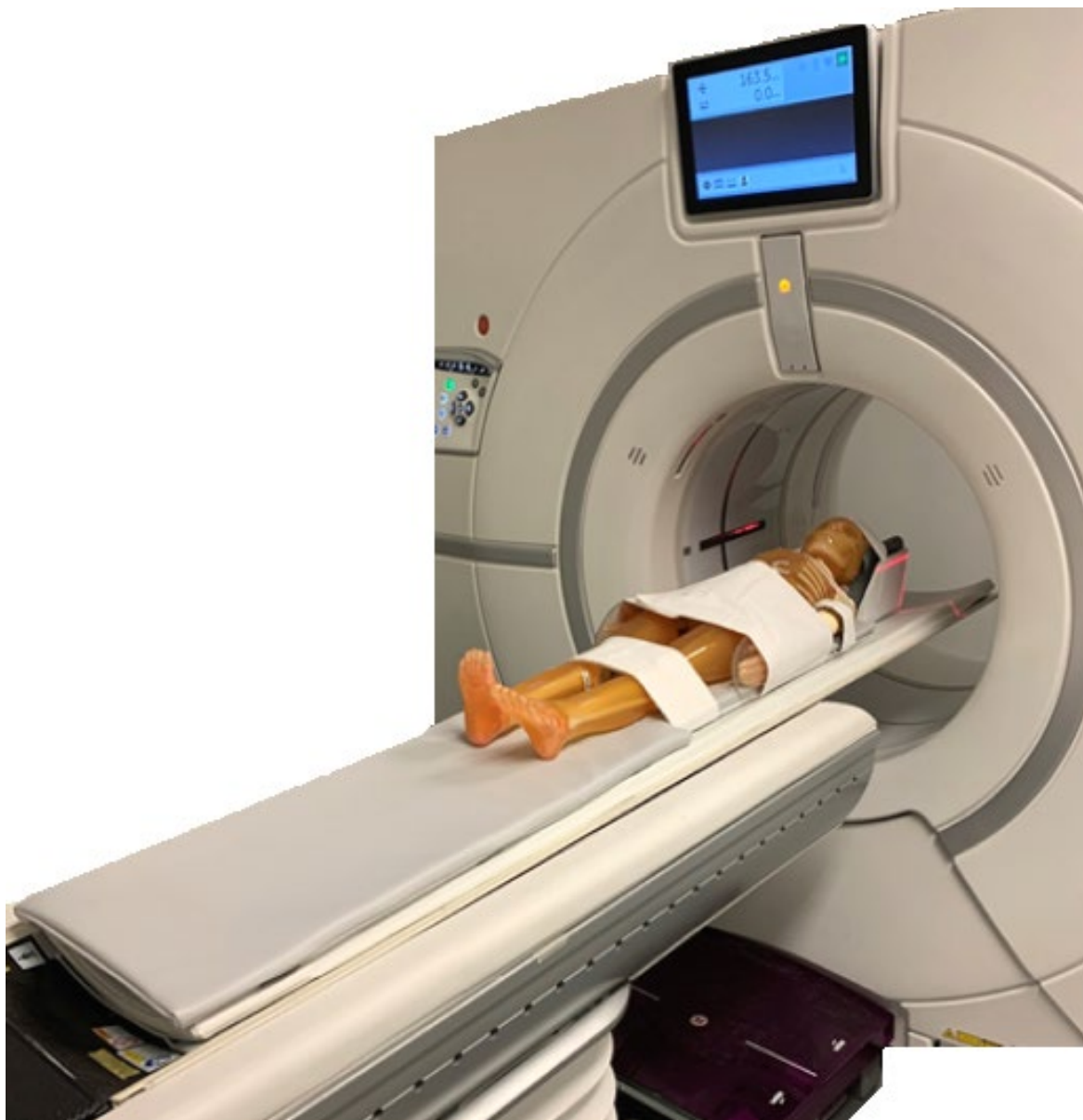

Маңызды ақпарат

kk – E8003S GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы

en – E8003S CHILD POSITIONER FOR GE CT SYSTEMS
fr - E8003S Positionneur pour enfant pour systèmes CT de GE
de - E8003S Kinderpositionierer für GE CT-Systeme
it - E8003S Posizionatore da bambino per sistemi GE CT
es - E8003S Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE
el – E8003S Τοποθετητής παιδιού για συστήματα αξονικού τομογράφου GE CT
ga – E8003S Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT
pt-BR - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ZH-CN - E8003S GE CT 系統的兒童體位固定裝置
ja - E8003S GE CTシステム用チャイルドポジショナ
bg - E8003S Детски позиционер за GE CT системи
zh - E8003S GE CT 系统的儿童体位固定装置
hr - E8003S Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom
cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT
da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer
nl - E8003S Child Positioner voor GE CT Systemen
et - E8003S Lapse positsioneerija GE KT-süsteemidele
fi - E8003S Lasten asetin GE TT -järjestelmiä varten
mt – E8003S Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT
hu - E8003S Gyermekek teströgzítő szett GE CT rendszerekhez
ko – E8003S GE CT 시스템 용 차일드 포지셔너
lv - E8003S Bērnu fiksators GE CT sistēmām
lt - E8003S Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms
no – E8003S Barneposisjoner for GE CT-systemer
pl - E8003S Pozycjoner pediatryczny do systemów TK firmy GE
pt - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ro - E8003S Pozitie pentru copii pentru sistemele GE CT
ru - E8003S Детский позиционер для систем GE CT
sr- E8003S Дечји позиционер за GE CT системе
id - E8003S Positioner Anak untuk Sistem GE CT
sk - E8003S Detský polohovateľ pre CT systémy GE
sl - E8003S Komplet za nsramestitev otroka v GE CT
sv - E8003S Barnfixering för GE CT-system
tr - E8003S GE CT Sistemleri için Çocuk Konumlandırıcı
uk - E8003S Дитячий позиціонер для систем GE CT
vi – E8003S Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT



Өндіруші:

Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 AҚШ
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Табиғи каучук
латекстен
жасалмаған




Advena Ltd., Tower Business
Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR
4013 Мальта



Бұл өнім Калифорния штатының мәліметтері бойынша ұрпақ жаңғырту денсаулығына қауіп төндіретін химиялық заттар шығаруы мүмкін. Толығырақ ақпарат алу үшін www.P65Warnings.ca.gov сайтына қараңыз. 1-метил-2-пирролидон (NMP) CAS №: 872-50-4, EC №: 212-828-1

Компоненттер

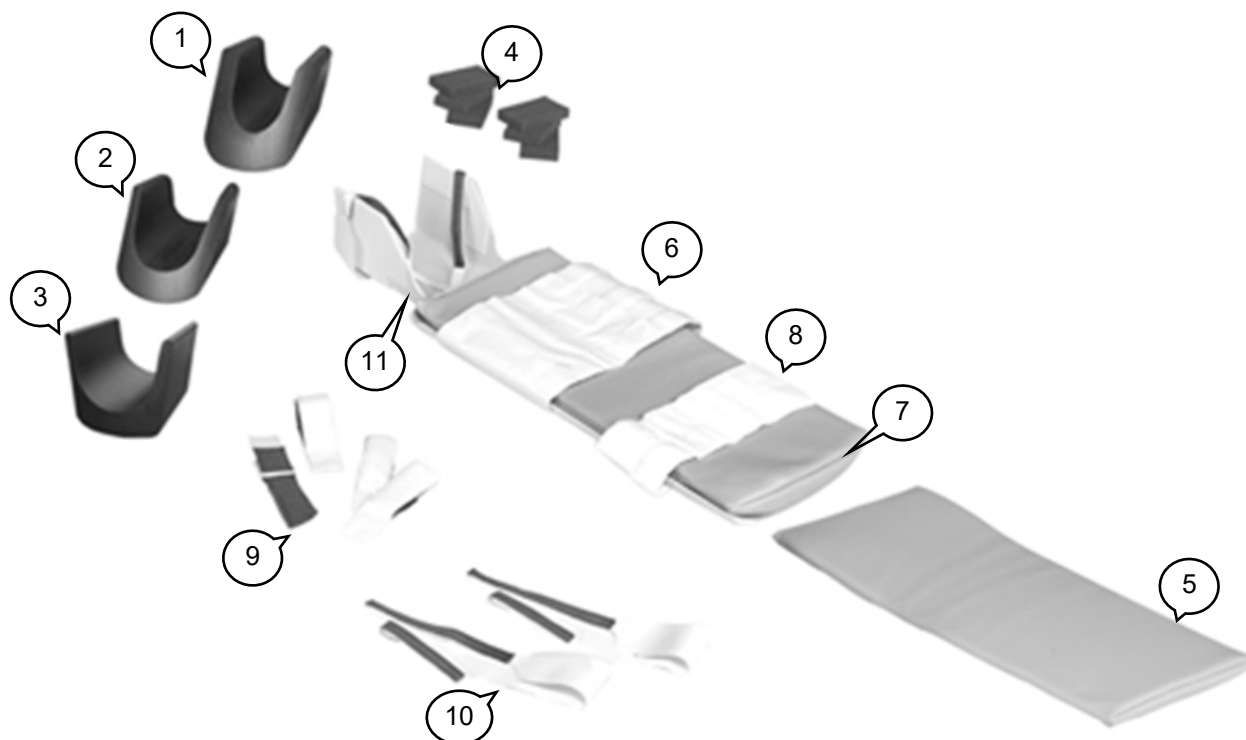

Поз.	Бөлшек №	Сипаттамасы
1	28024	E8003SA CT Баланың басын орналастырғыш, шағын
2	28025	E8003SB CT Баланың басын орналастырғыш, орташа
3	28026	E8003SC CT Баланың басын орналастырғыш, үлкен
4	20603	E8003DG Пенопласт блок
5	28060	E8005BD Төсеке, ұзын
6	23802	E8005AG Бекіткішке бала денесін таңатын белдік, жуан
7	28057	E8005AJ Баланы бекіткіш төсемесі
8	28058	E8005AH Бекіткішке бала денесін таңатын белдік, жіңішке
9	26940	E8005BA Бекіткішке баланың білегін таңатын белдік
10	23531	E8005BA Бекіткішке бала басын таңатын белдік
11	21540	E8005AK Баланы бекіткіштің бесігі

Ескертпе: Құрылғыны пайдалануға байланысты орын алатын кез келген жайсыз оқиға туралы өндірушіге және құрылғы орнатылған жердегі денсаулық сақтау органына / өкілетті органға хабарлау керек.




Абай болыңыз! Пациенттің құлауына жол бермеу үшін пациентті жатқызар алдында пациентті орналастыратын үстел тұрақты болуы керек.



Абай болыңыз! Процедураны бастамас бұрын пациентті бекіткішке дұрыстап бекітіп, бекіткішті үстелге пациент құламайтындай етіп белдікпен бекіту керек.

Дайындау

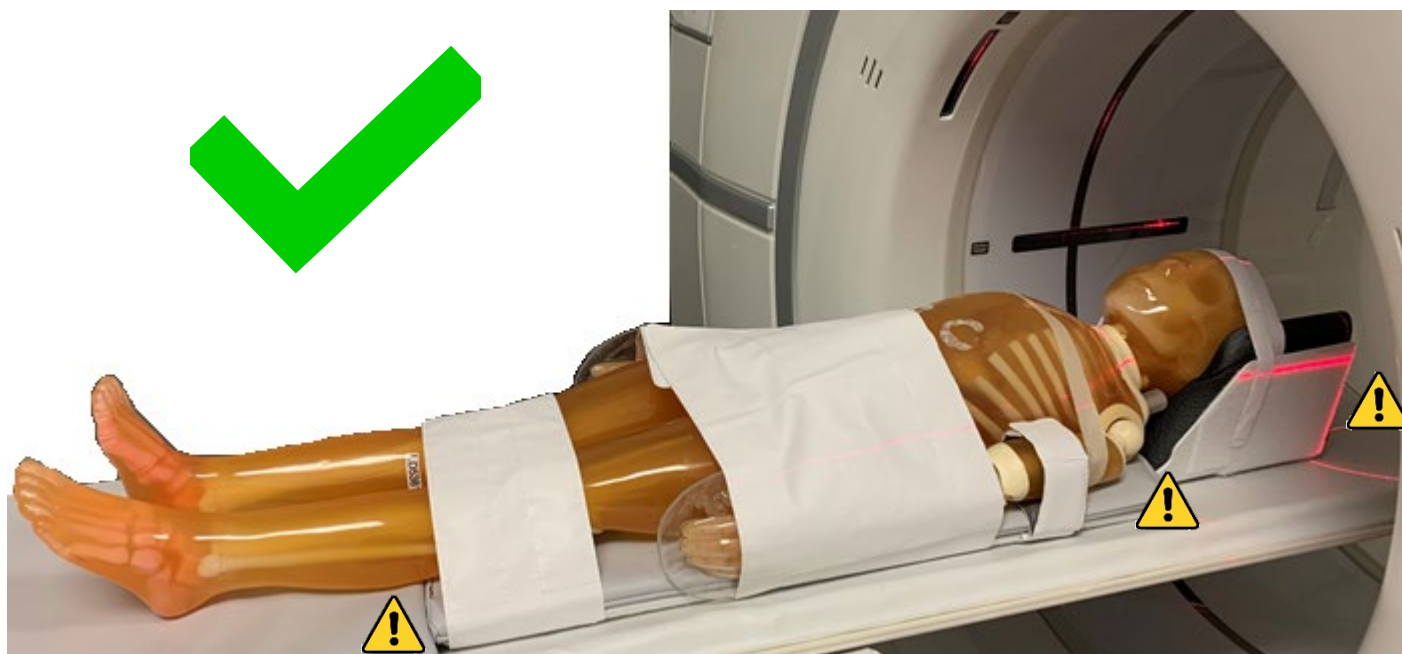




 **Абай болыңыз!** Анатомиялық зерттеу аймағын жіктердің үстіне орналастырмаңыз.





Бекіткішті үстел ұзартқышынан кедергі келтірілмеуі үшін үстел шетінен шамамен 12 дюйм, немесе 30,5 см қашықтықта орналастыру керек.

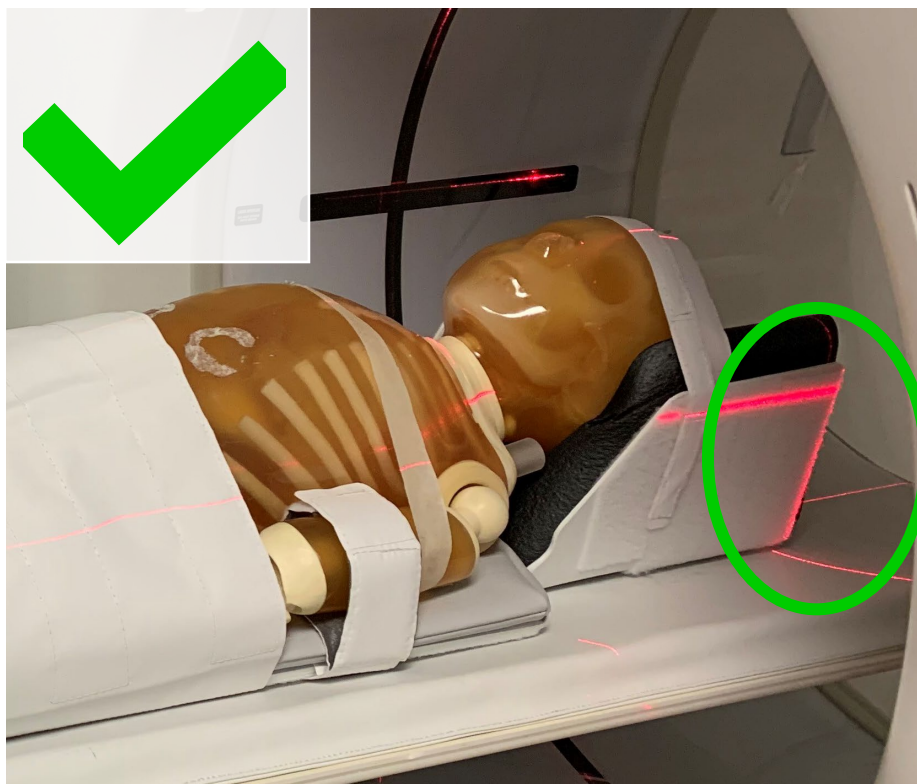

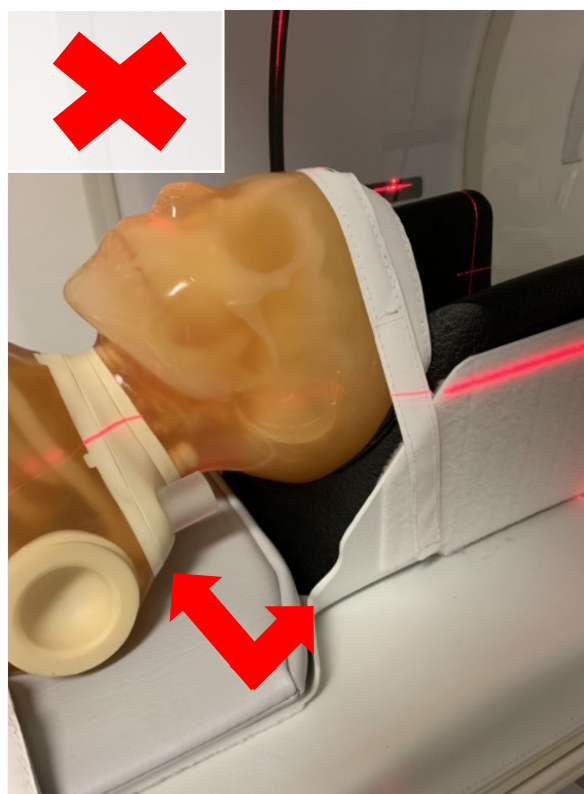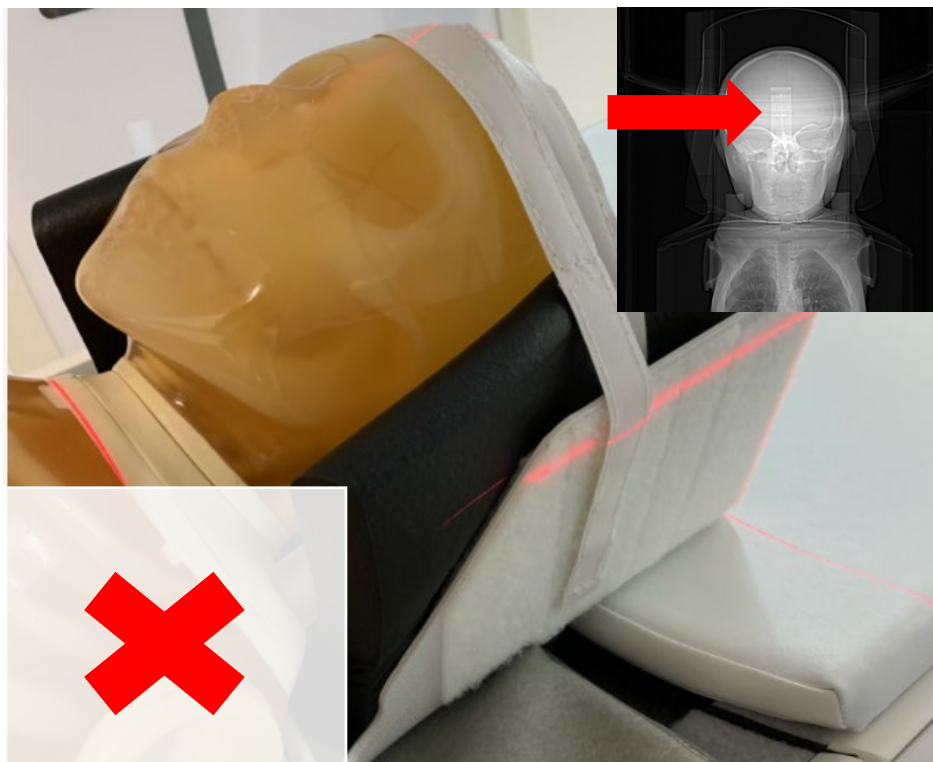



Тазалау және дезинфекциялау

Тазалау мен дезинфекцияны өндірушінің нұсқауларына / жергілікті қоршаған ортаны ластамай тазалау әдістеріне сәйкес төмендегі тәсілмен жүргізу керек:

- Қалыпты тұрмыстық ағартқыш – 10:1 пропорцияда сұйытылған (дезинфекция уақыты кемінде 5 минут)
- Sani-Cloth® PDI ағартқыш майлықтары
- Clorox Healthcare® бактерицидті ағартқыш майлықтары
- Clorox Healthcare® бактерицидті ағартып тазалайтын спрейі
- Clorox Healthcare® сутегі асқын тотығымен тазартатын дезинфекциялайтын майлықтарф
- Clorox® Ағартқыш қосылған әмбебап тазартқышы
- Medline компаниясының Micro-Kill бактерицидті ағартқыш ерітіндісі
- Medline компаниясының Micro-Kill бактерицидті ағартқыш майлықтары



Ескерту! Тазартқыш / дезинфекциялатын ерітіндінің қалдықтарын жою үшін таза сумен шаю **КЕРЕК**. Әйтпесе бұл пациентке жарақат әкелуі мүмкін.