


Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT

Istruzzjonijiet għall-Użu

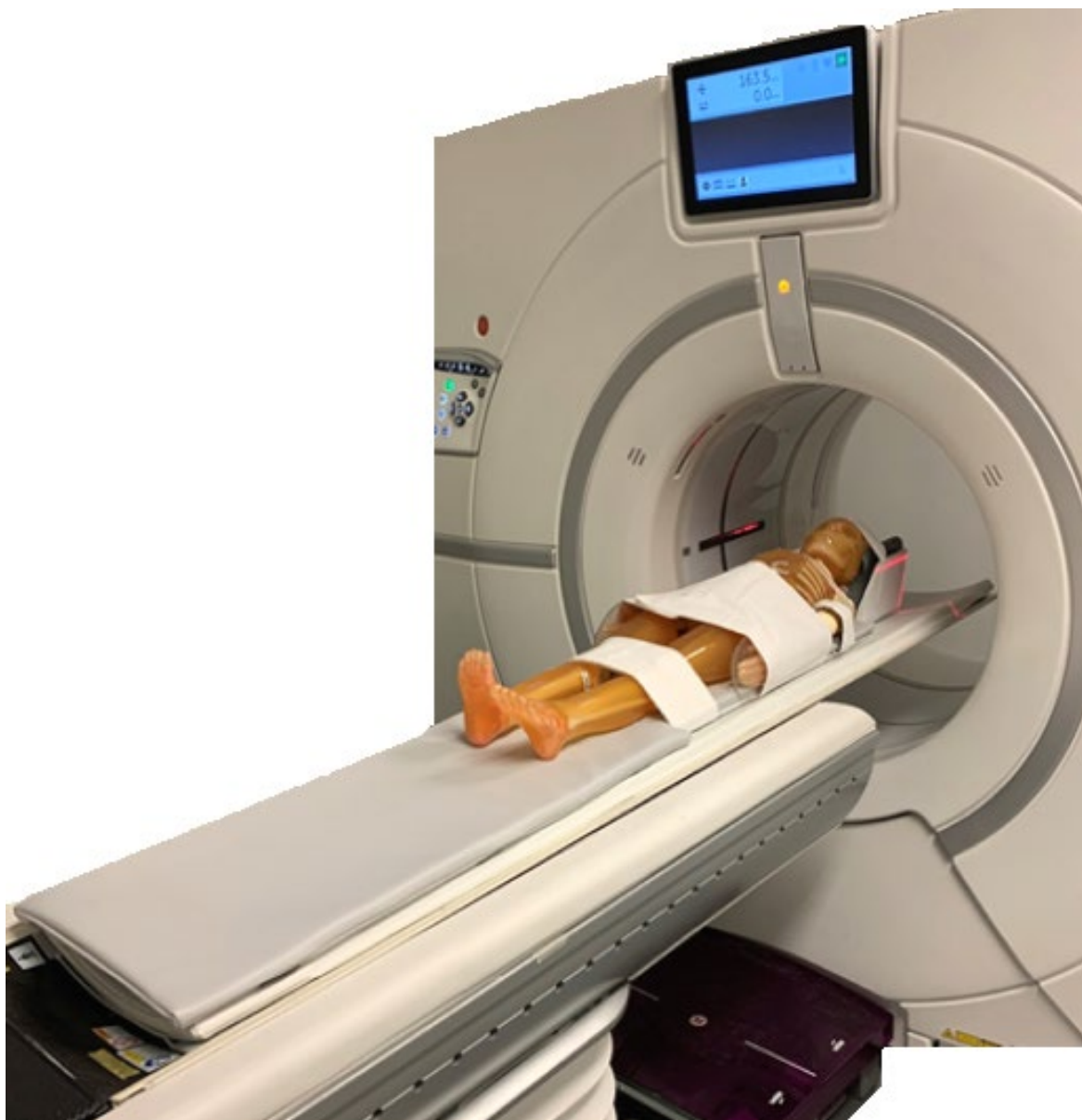

Tagħrif Importanti

mt - Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT

en – E8003S CHILD POSITIONER FOR GE CT SYSTEMS
fr - E8003S Positionneur pour enfant pour systèmes CT de GE
de - E8003S Kinderpositionierer für GE CT-Systeme
it - E8003S Posizionatore da bambino per sistemi GE CT
es - E8003S Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE
el – E8003S Τοποθετητής παιδιού για συστήματα αξονικού τομογράφου GE CT
ga – E8003S Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT
pt-BR - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ZH-CN - E8003S GE CT 系統的兒童體位固定裝置
ja - E8003S GE CTシステム用チャイルドポジショナ
bg - E8003S Детски позиционер за GE CT системи
zh - E8003S GE CT 系统的儿童体位固定装置
hr - E8003S Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom
cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT
da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer
nl - E8003S Child Positioner voor GE CT Systemen
et - E8003S Lapse positsioneerija GE KT-süsteemidele
fi - E8003S Lasten asetin GE TT -järjestelmiä varten
hu - E8003S Gyermekek teströgzítő szett GE CT rendszerekhez
ko – E8003S GE CT 시스템 용 차일드 포지셔너
lv - E8003S Bērnu fiksators GE CT sistēmām
lt - E8003S Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms
no – E8003S Barneposisjoner for GE CT-systemer
pl - E8003S Pozycjoner pediatryczny do systemów TK firmy GE
pt - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ro - E8003S Pozitie pentru copii pentru sistemele GE CT
ru - E8003S Детский позиционер для систем GE CT
sr - E8003S Дечји позиционер за GE CT системе
id - E8003S Positioner Anak untuk Sistem GE CT
sk - E8003S Detský polohovateľ pre CT systémy GE
sl - E8003S Komplet za nsramestitev otroka v GE CT
sv - E8003S Barnfixering för GE CT-system
tr - E8003S GE CT Sistemleri için Çocuk Konumlandırıcı
uk - E8003S Дитячий позиционер для систем GE CT
kk – E8003S GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы
vi – E8003S Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT



Manifatturat minn:
Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 USA
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Mhux Magħmul
mill-
Latex tal-Gomma
Naturali




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



TWISSIJA:

Dan il-prodott jista' jesponik għal sustanzi kimiċi li l-Istat tal-Kalifornja jaf li jikkawżaw ħsara riproduttiva. Għal aktar informazzjoni żur www.P65Warnings.ca.gov. 1-methyl-2-pyrroldione (NMP)
CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1

Komponenti

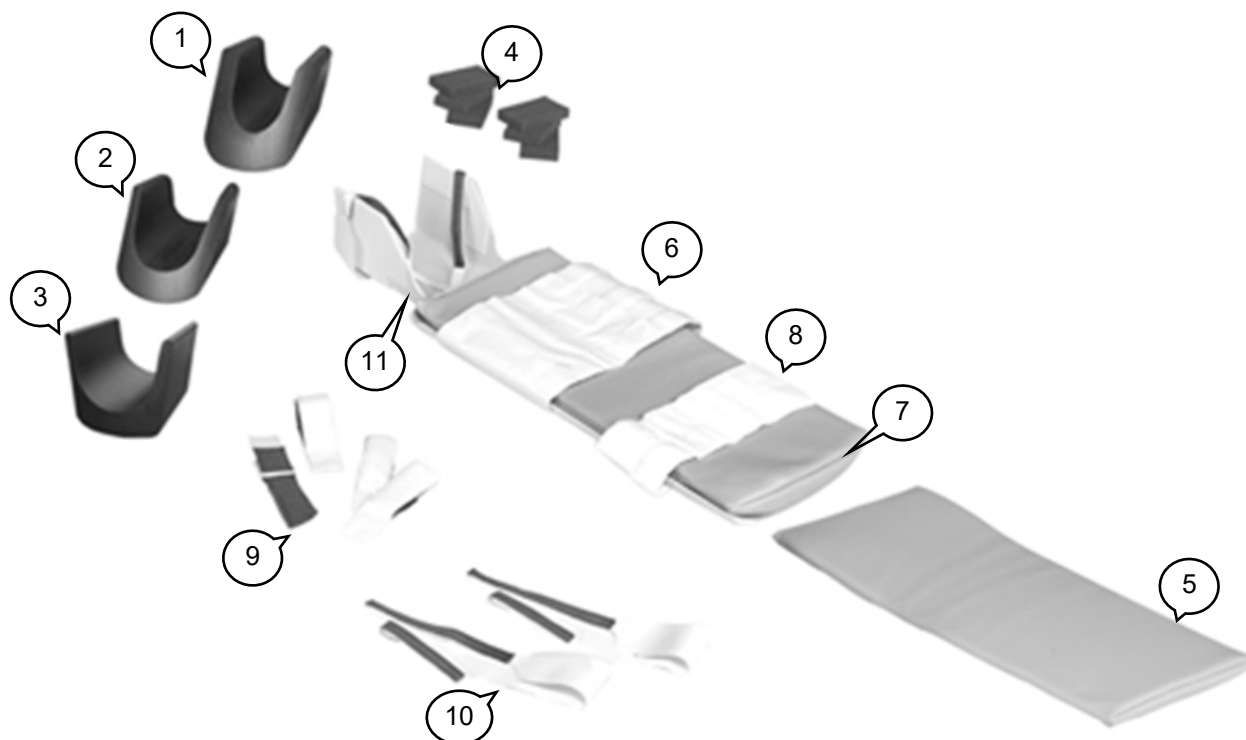

Oġġett	Numru tal-Part	Deskrizzjoni
1	28024	E8003SA CT Imħadda għal ras it-Tfal - Żghira
2	28025	E8003SB CT Imħadda għal ras it-Tfal - Medja
3	28026	E8003SC CT Imħadda għal ras it-Tfal - Kbira
4	20603	E8003DG Blokkja tal-Fowm
5	28060	E8005BD Kuxxinett, Estensjoni
6	23802	E8005AG Ċinga Korporali tal-Požizzjonatur tat-Tfal, Wiesgħa
7	28057	E8005AJ Kuxxinett tal-Požizzjonatur tat-Tfal
8	28058	E8005AH Ċinga Korporali tal-Požizzjonatur tat-Tfal, Dejqa
9	26940	E8005BA Ċineg tal-Polz tal-Požizzjonatur tat-Tfal
10	23531	E8002BB Ċineg tar-Ras tal-Požizzjonatur tat-Tfal
11	21540	E8005AK Nieqa tal-Požizzjonatur tat-Tfal

Nota: Kwalunkwe incident serju marbut tal-użu tat-tagħmir għandu jiġi rappurtat lill-manifattur u lill-awtorità tas-saħħa/awtorità kompetenti ta' fejn ikun installat it-tagħmir.




Twissija! Il-bord għall-pazjent irid ikun stabbli qabel li jitgħabba l-pazjent biex il-pazjent ma jaqax.



Twissija! Qabel ma jingħata bidu għall-proċedura, il-pazjent irid ikun marbut mal-pożizzjonatur u l-pożizzjonatur irid ikun marbut mal-mejda b'ċineg li jżommu lill-pazjent milli jaqa'.


Muntagġ


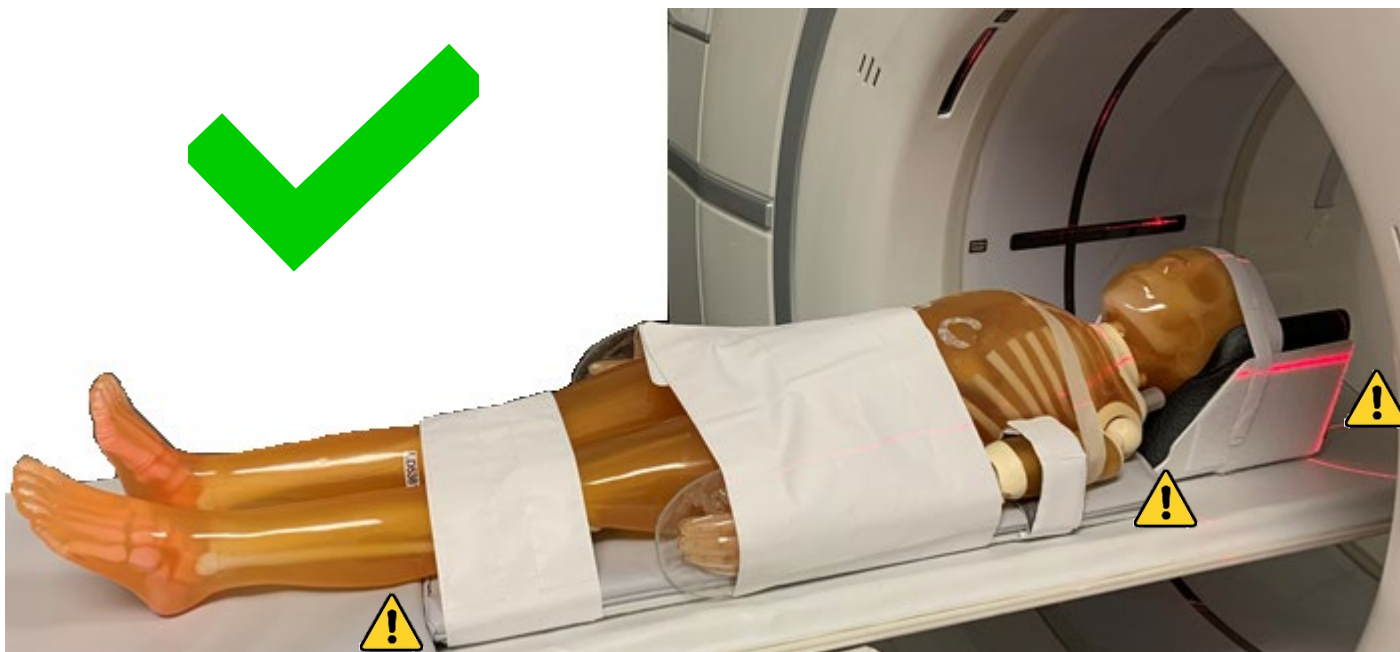



Twissija! Tpoġġix partijiet tal-ġisem ta' interess fuq il-gunzjonijiet.



Il-pożizzjonatur għandu jkun madwar ~12-il pulzier jew ~30.5cm mit-tarf tal-mejda biex ma jkunx hemm interferenza mill-extender latch tal-mejda.

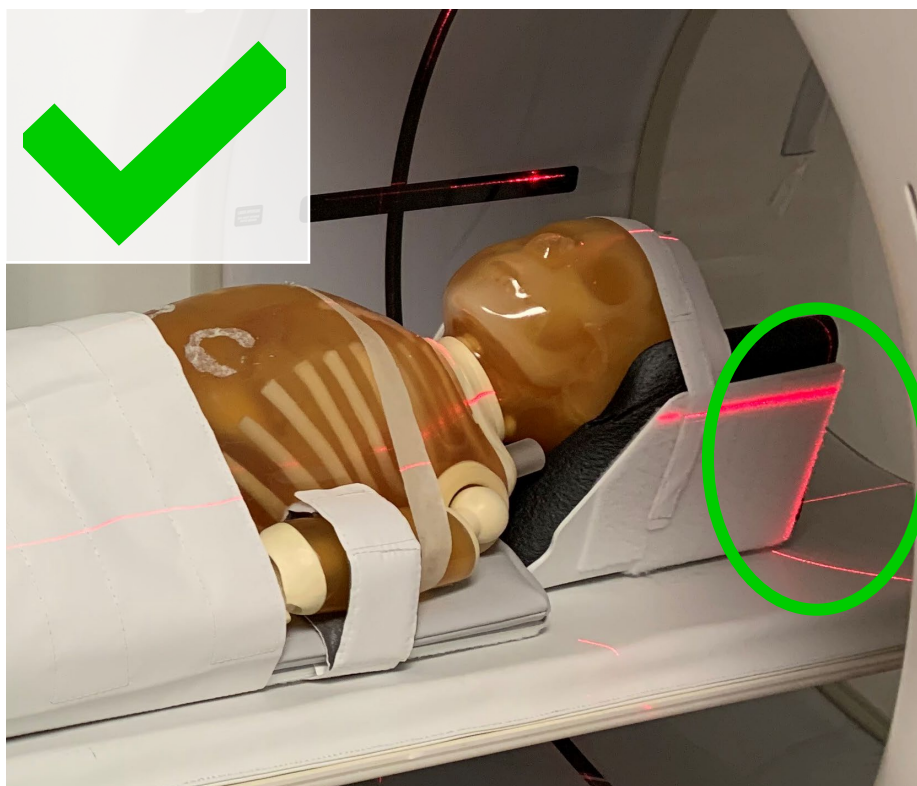

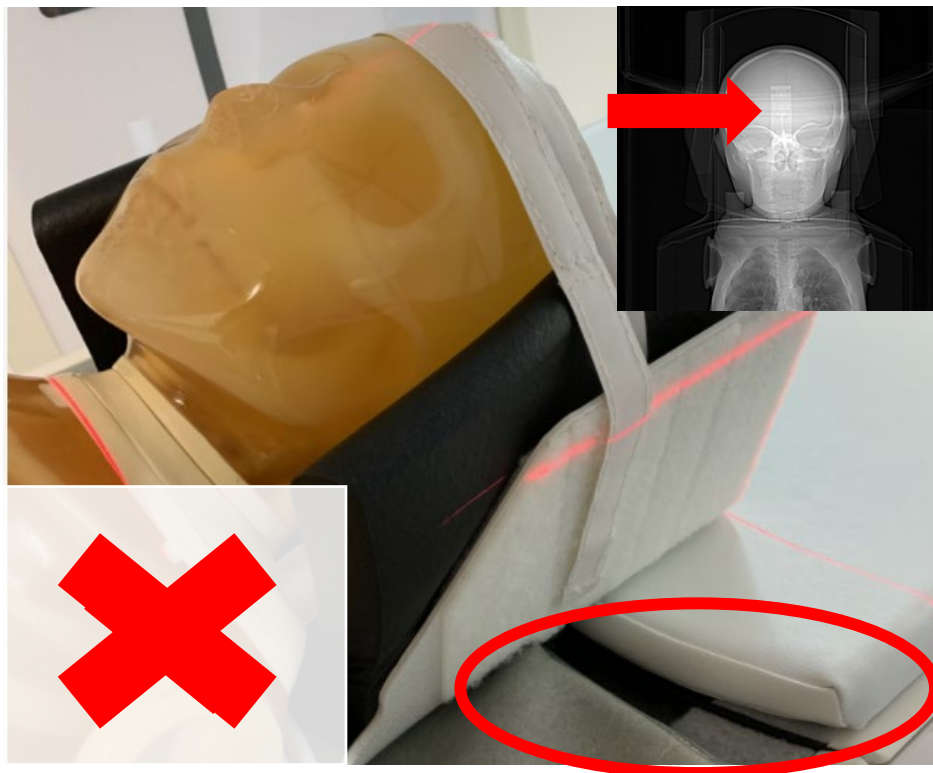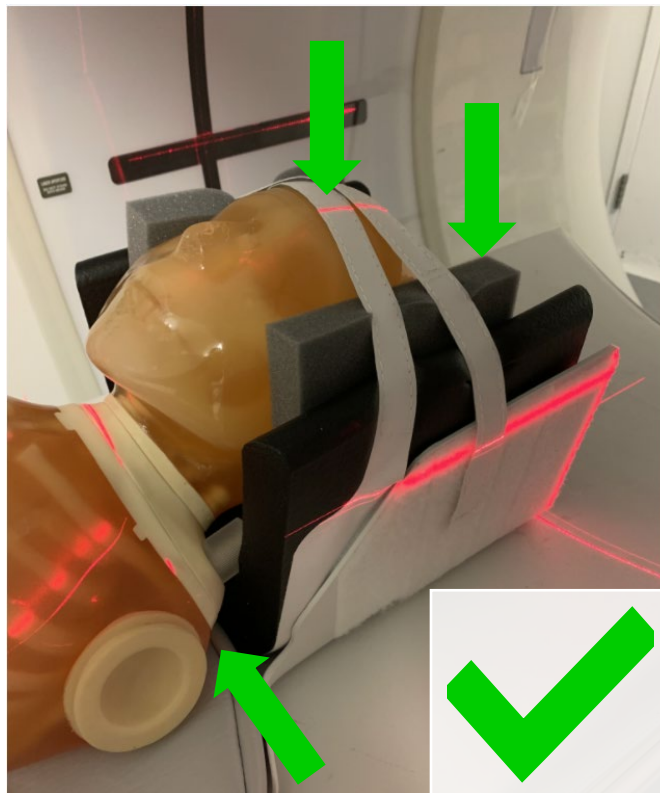

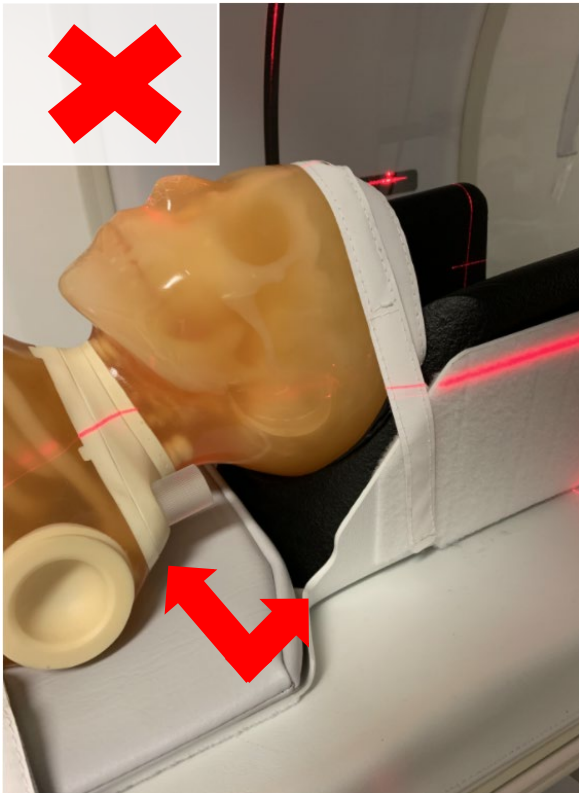

Tindif u Dizinfazzjoni

Naddaf billi tneħhi l-ħmieġ u ddiżinfetta skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur/skont il-prattiki ta' tindif ambjentali tal-facilità lokali billi tuża:

28023-303-000 Pożizzjonatur tat-Tfal għal GE CT Istruzzjonijiet għall-Użu

Data ta' Hruġ: 07JUL2021

- Bleach domestiku komuni - dilwit 10:1 (ħin minimu ta' diżinfazzjoni 5 minuti)
- Sani-Cloth® Bleach Wipes by PDI
- Bleach Germicidal Wipes by Clorox Healthcare®
- Bleach Germicidal Cleaner Spray by Clorox Healthcare®
- Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectant Wipes by Clorox Healthcare®
- Clorox® Multi Surface Cleaner With Bleach
- Micro-Kill Bleach Germicidal Bleach Solution by Medline
- Micro-Kill Bleach Germicidal Bleach Wipes by Medline



Twissija! DEJJEM laħlaħ il-prodotti b'ilma nadif biex tneħħi kull fdalijiet tal-prodott tat-tindif/diżinfazzjoni. Jekk dan ma jsirx, jista' jirriżulta fi ħsara lill-pazjent.