


# GE CT 系统的儿童体位固定装置 使用说明书

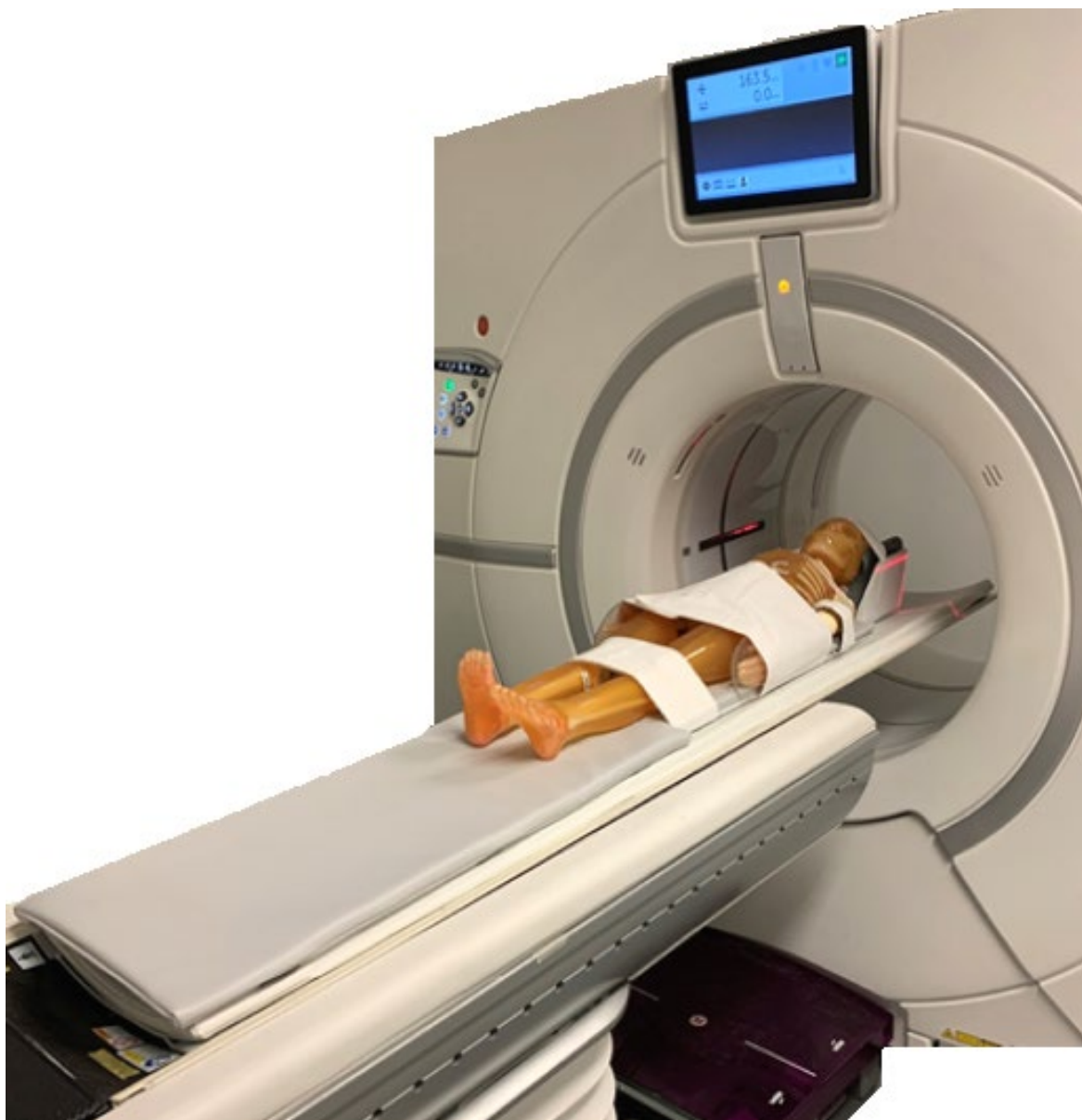

# 重要信息

## ZH-CN - E8003S GE CT 系統的兒童體位固定裝

en - E8003S CHILD POSITIONER FOR GE CT SYSTEMS  
fr - E8003S Positionneur pour enfant pour systèmes CT de GE  
de - E8003S Kinderpositionierer für GE CT-Systeme  
it - E8003S Posizionatore da bambino per sistemi GE CT  
es - E8003S Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE  
el - E8003S Τοποθετητής παιδιού για συστήματα αξονικού τομογράφου GE CT  
ga - E8003S Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT  
pt-BR - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE  
ja - E8003S GE CT システム用チャイルドポジショナ  
bg - E8003S Детски позиционер за GE CT системи  
zh - E8003S GE CT 系统的儿童体位固定装置  
hr - E8003S Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom  
cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT  
da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer  
nl - E8003S Child Positioner voor GE CT Systemen  
et - E8003S Lapse positsioneerija GE KT-süsteemidele  
fi - E8003S Lasten asetin GE TT -järjestelmiä varten  
mt - E8003S Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT  
hu - E8003S Gyermek teströgzítő szett GE CT rendszerekhez  
ko - E8003S GE CT 시스템 용 차일드 포지셔너  
lv - E8003S Bērnu fiksators GE CT sistēmām  
lt - E8003S Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms  
no - E8003S Barneposisjonør for GE CT-systemer  
pl - E8003S Pozycjoner pediatryczny do systemów TK firmy GE  
pt - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE  
ro - E8003S Pozitie pentru copii pentru sistemele GE CT  
ru - E8003S Детский позиционер для систем GE CT  
sr - E8003S Дечји позиционер за GE CT системе  
id - E8003S Positioner Anak untuk Sistem GE CT  
sk - E8003S Detský polohovateľ pre CT systémy GE  
sl - E8003S Komplet za nsramestitev otroka v GE CT  
sv - E8003S Barnfixering för GE CT-system  
tr - E8003S GE CT Sistemleri için Çocuk Konumlandırıcı  
uk - E8003S Дитячий позиционер для систем GE CT  
kk - E8003S GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы  
vi - E8003S Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT



  
制造商:  
Domico Med-Device, LLC  
14241 North Fenton Rd.  
Fenton, MI 48430 USA  
810-750-5300  
DomicoMed.com




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2<sup>nd</sup> Flr.,  
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



警告:

本产品可能会使您暴露于化学物质, 加利福尼亚州已知该化学物质可导致生殖危害。详情请访问  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)。1-甲基吡咯烷酮 (1-methyl-2-pyrrolidone, NMP) CAS: 872-50-4,  
EC: 212-828-1

# 组件

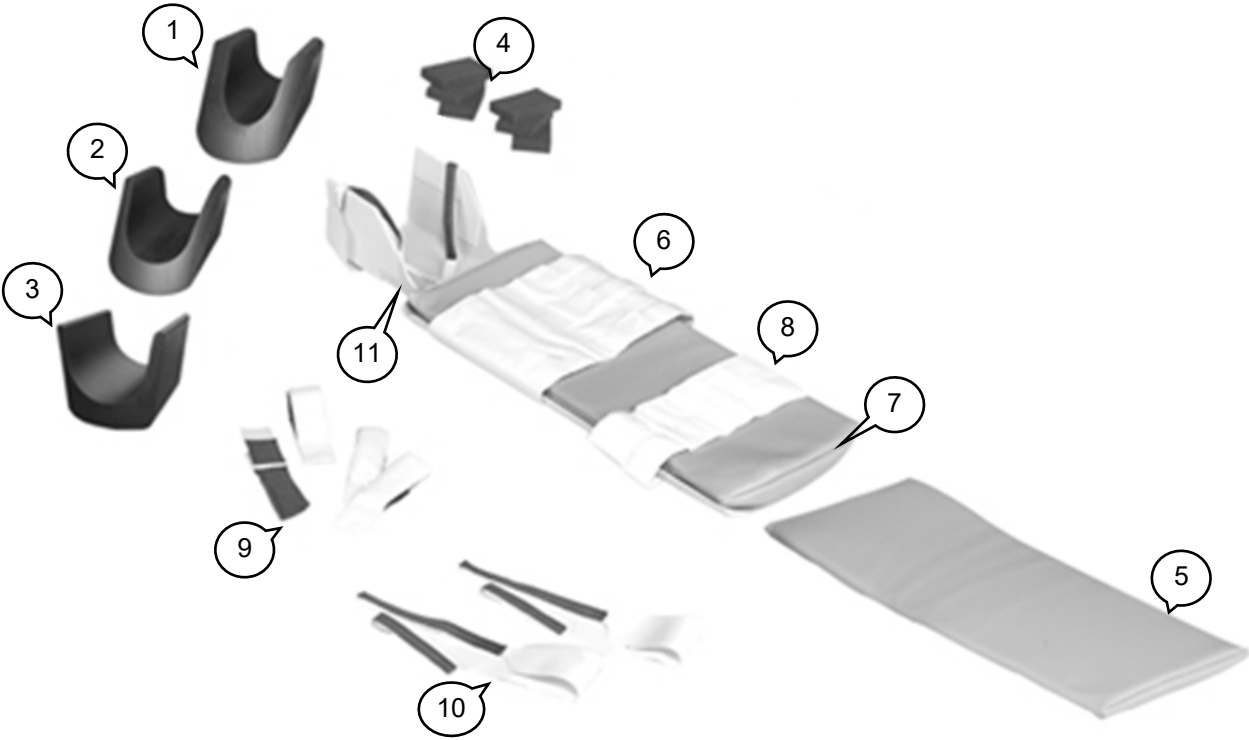

| 产品 | 零件编号  | 说明                  |
|----|-------|---------------------|
| 1  | 28024 | E8003SA CT 儿童头枕——小号 |
| 2  | 28025 | E8003SB CT 儿童头枕——中号 |
| 3  | 28026 | E8003SC CT 儿童头枕——大号 |
| 4  | 20603 | E8003DG 泡沫块         |
| 5  | 28060 | E8005BD 垫子，加长       |
| 6  | 23802 | E8005AG 儿童身体固定带，宽   |
| 7  | 28057 | E8005AJ 儿童体位固定垫     |
| 8  | 28058 | E8005AH 儿童身体固定带——窄  |
| 9  | 26940 | E8005BA 儿童手腕固定带     |
| 10 | 23531 | E8002BB 儿童头部固定带     |
| 11 | 21540 | E8005AK 儿童体位固定支架    |

请注意：任何与使用该设备相关的严重事件，均应向制造商以及安装该设备所在地的卫生权威/主管当局汇报。




**警告！** 必须在让患者躺在患者床板上之前，确保床板不会移动，以防患者摔下。



**警告！** 在开始操作前，必须正确地将患者牢固安放在体位固定装置中，还必须使用固定带将体位固定装置牢固地固定在操作台上，以防患者摔下。

## 设置


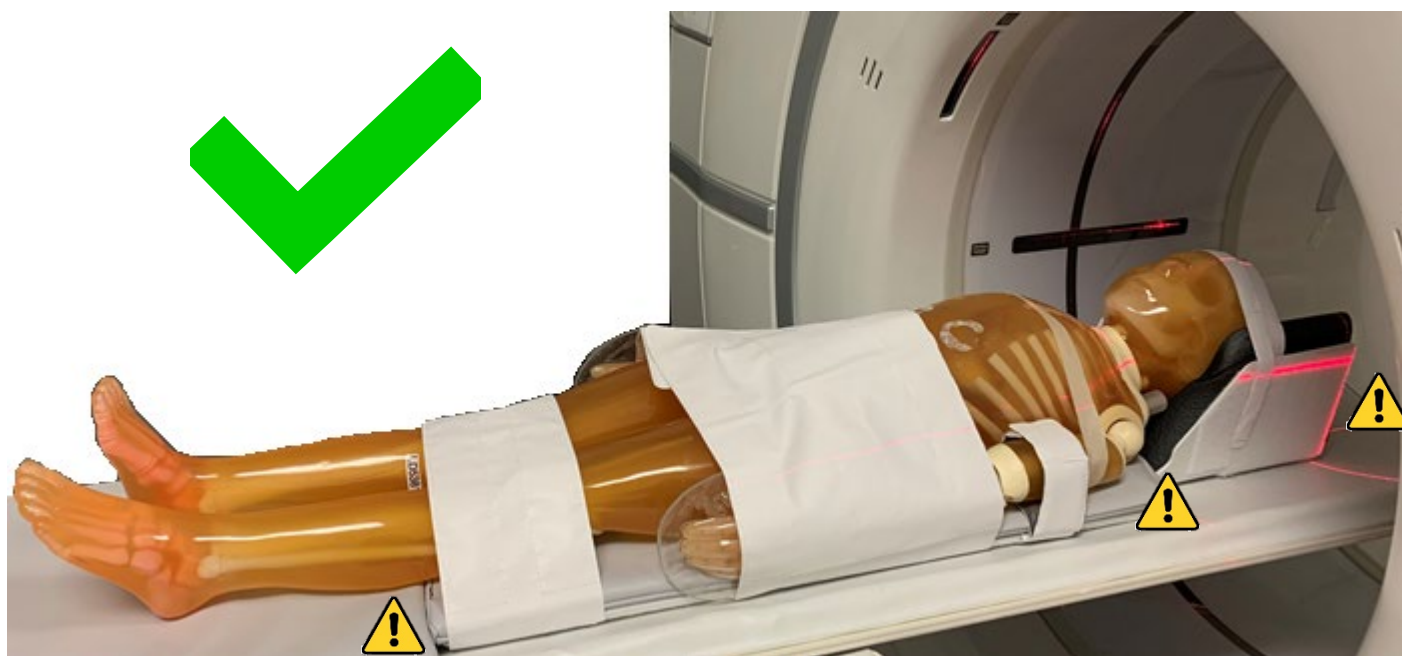




 警告！不要将希望检查的身体部位安放在交接点之处。






应将体位固定装置放在距离操作台末端 12 英寸或 30.5 厘米左右处，以确保操作台加长部分的闩锁不会干扰检查。

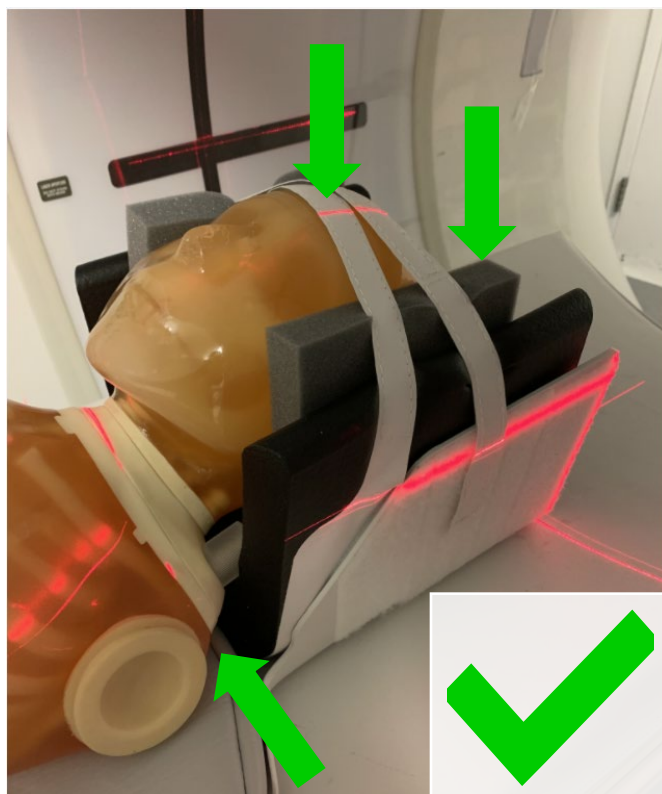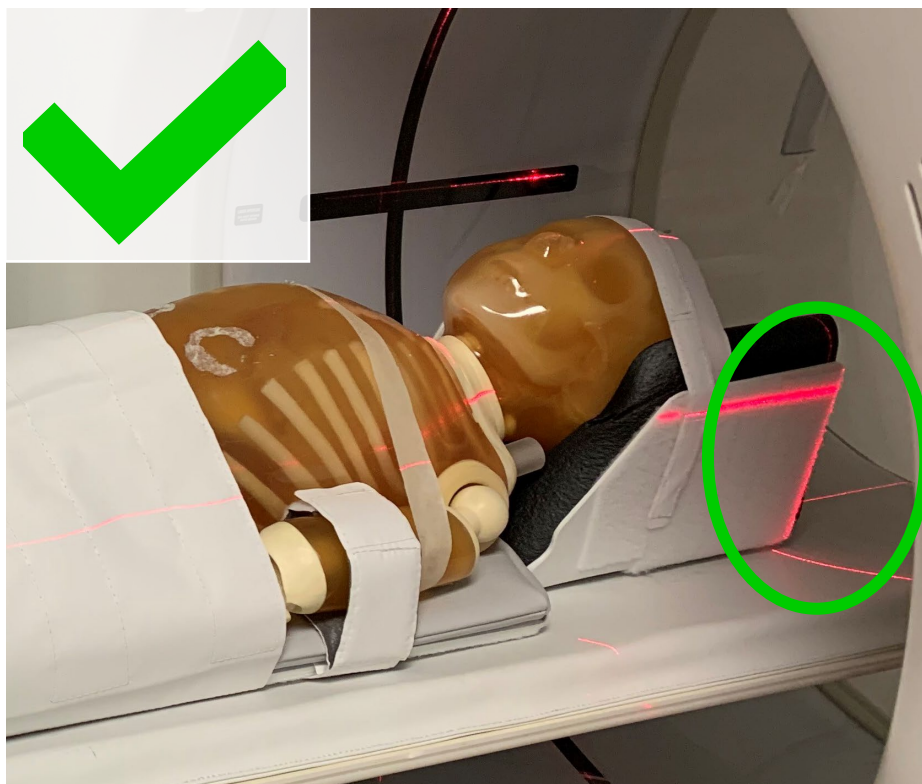

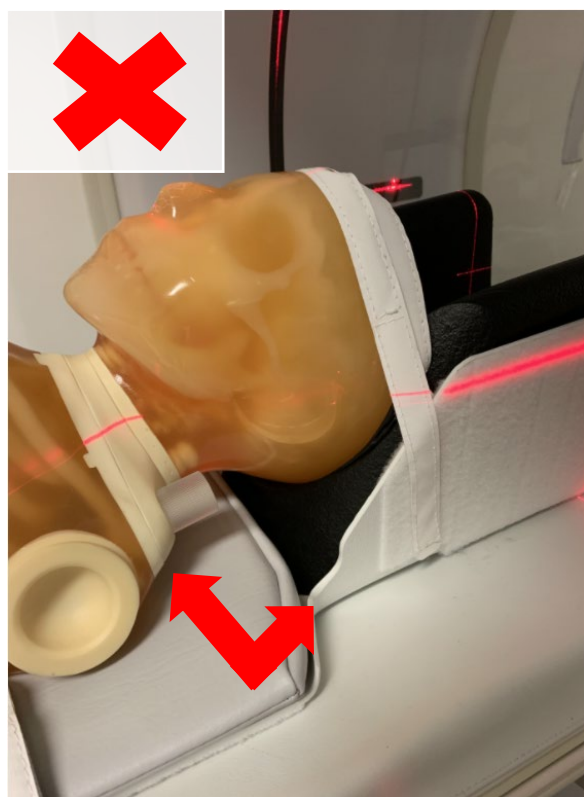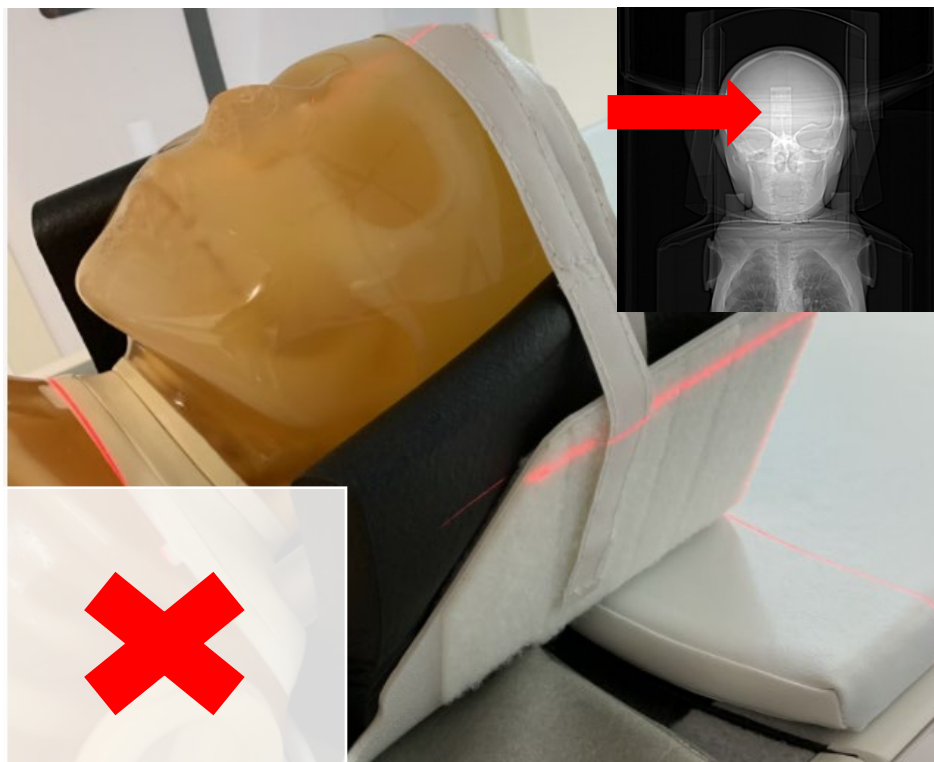

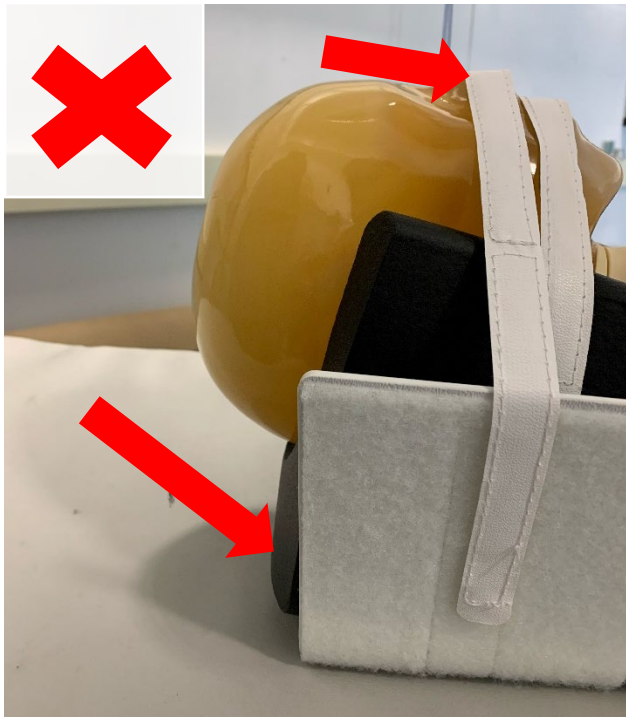

## 清洁与消毒

按照制造商的说明/依照当地设施的环境清洁做法，洗去污垢并为设备消毒，具体使用：

- 普通家用漂白剂——按 10:1 稀释（消毒时间至少为 5 分钟）
- PDI 生产的 Sani-Cloth® 漂白湿巾
- Clorox Healthcare® 生产的漂白杀菌湿巾
- Clorox Healthcare® 生产的漂白杀菌清洁喷剂
- Clorox Healthcare® 生产的过氧化氢清洁消毒湿巾
- Clorox® 多用途表面漂白清洁剂
- Medline 生产的 Micro-Kill 漂白杀菌漂白剂
- Medline 生产的 Micro-Kill 漂白杀菌漂白湿巾



**警告！** 总是用清水冲洗产品，以洗去任何残留的清洁/消毒剂。未做到这一点可能导致患者受伤。