


Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE Instrucciones de uso

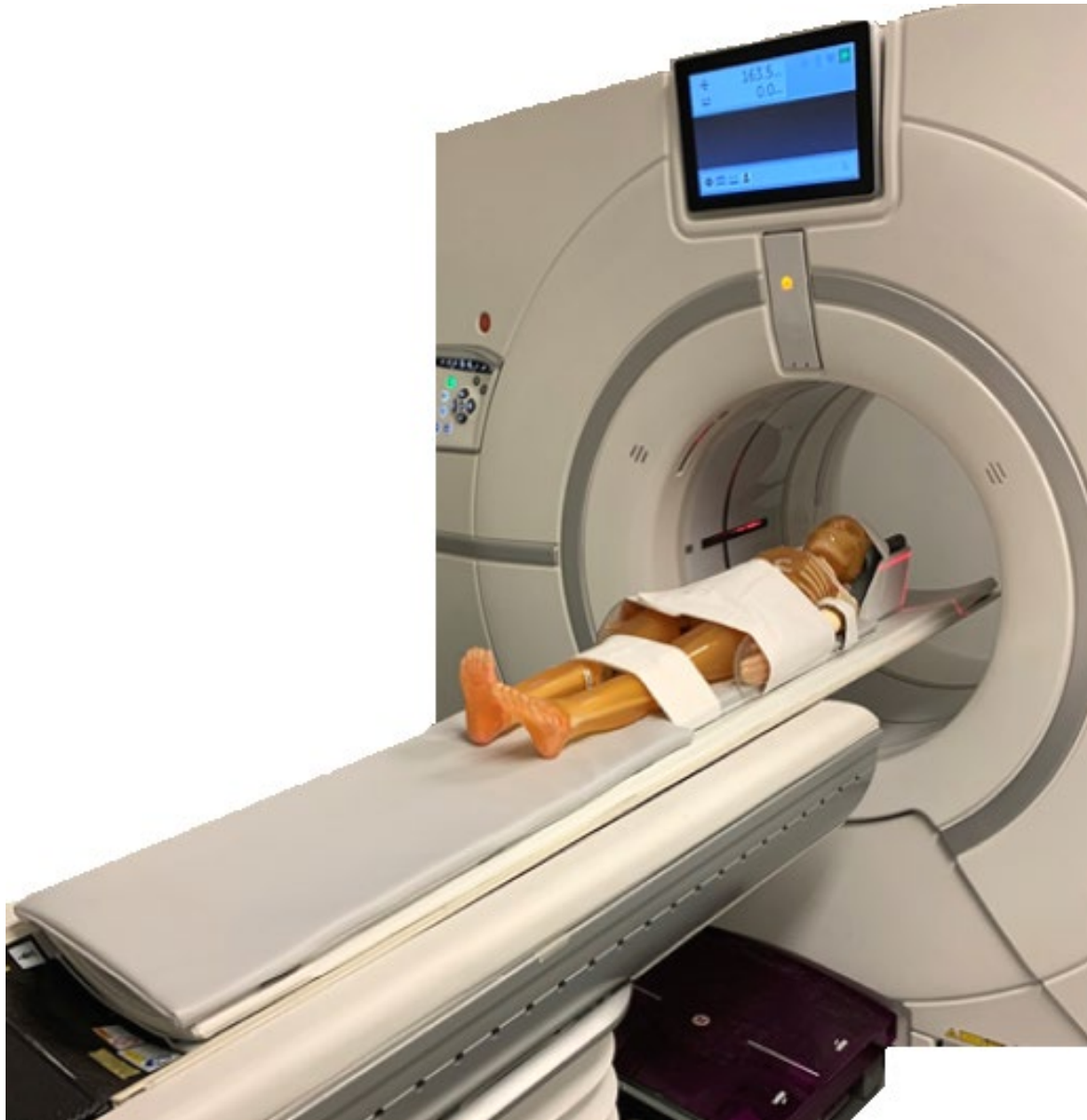

Información importante

es - E8003S Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE

en - E8003S CHILD POSITIONER FOR GE CT SYSTEMS
fr - E8003S Positionneur pour enfant pour systèmes CT de GE
de - E8003S Kinderpositionierer für GE CT-Systeme
it - E8003S Posizionatore da bambino per sistemi GE CT
el - E8003S Τοποθετητής παιδιού για συστήματα αξονικού τομογράφου GE CT
ga - E8003S Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT
pt-BR - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ZH-CN - E8003S GE CT 系統的兒童體位固定裝置
ja - E8003S GE CTシステム用チャイルドポジショナ
bg - E8003S Детски позиционер за GE CT системи
zh - E8003S GE CT 系统的儿童体位固定装置
hr - E8003S Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom
cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT
da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer
nl - E8003S Child Positioner voor GE CT Systemen
et - E8003S Lapse positsioneerija GE KT-süsteemidele
fi - E8003S Lasten asetin GE TT -järjestelmiä varten
mt - E8003S Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT
hu - E8003S Gyermek testőrgőztő szett GE CT rendszerekhez
ko - E8003S GE CT 시스템 용 차일드 포지셔너
lv - E8003S Bērnu fiksators GE CT sistēmām
lt - E8003S Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms
no - E8003S Barneposisjonør for GE CT-systemer
pl - E8003S Pozycjoner pediatryczny do systemów TK firmy GE
pt - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ro - E8003S Poziție pentru copii pentru sistemele GE CT
ru - E8003S Детский позиционер для систем GE CT
sr - E8003S Дечји позиционер за GE ЦТ системе
id - E8003S Positioner Anak untuk Sistem GE CT
sk - E8003S Detský polohovateľ pre CT systémy GE
sl - E8003S Komplet za nsramestitev otroka v GE CT
sv - E8003S Barnfixering för GE CT-system
tr - E8003S GE CT Sistemleri için Çocuk Konumlandırıcı
uk - E8003S Дитячий позиционер для систем GE CT
kk - E8003S GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы
vi - E8003S Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT



Fabricado por:

Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 EE. UU.
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



No está hecho con
Látex de caucho
natural




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



ADVERTENCIA:

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas que el estado de California reconoce como causantes de daños reproductivos. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. 1-methyl-2-pyrroldione (NMP)
CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1

Componentes

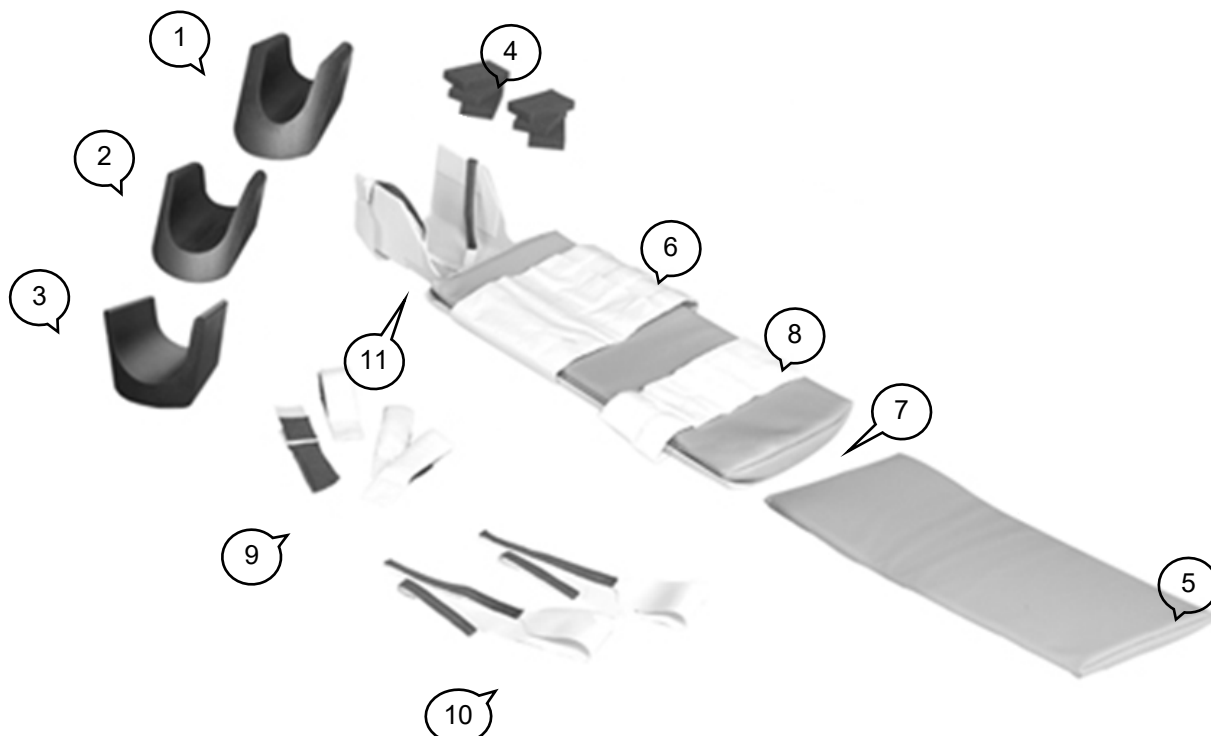

Artículo	Número de parte	Descripción
1	28024	E8003SA Cojín para la cabeza de niños para tomografía computada - Pequeño
2	28025	E8003SB Cojín para la cabeza de niños para tomografía computada - Mediano
3	28026	E8003SC Cojín para la cabeza de niños para tomografía computada - Grande
4	20603	E8003DG Bloque de espuma
5	28060	E8005BD Almohadilla, extensión
6	23802	E8005AG Correa corporal para posicionador infantil, ancho
7	28057	E8005AJ Almohadilla para posicionador infantil
8	28058	E8005AH Correa corporal para posicionador infantil - Angosto
9	26940	E8005BA Correas para la muñeca para posicionador infantil
10	23531	E8002BB Correas para la cabeza para posicionador infantil
11	21540	E8005AK Cuna para posicionador infantil

Nota: Cualquier incidente grave relacionado con el uso del dispositivo debe informarse al fabricante y a la autoridad sanitaria/autoridad competente donde está instalado el dispositivo.




¡Advertencia! La placa de traslado del paciente debe estar estable antes de colocar al paciente para evitar que se caiga.



¡Advertencia! Antes de iniciar el procedimiento, el paciente debe sujetarse de manera segura en el posicionador, el posicionador debe asegurarse a la mesa con correas para evitar que el paciente se caiga.


Configuración


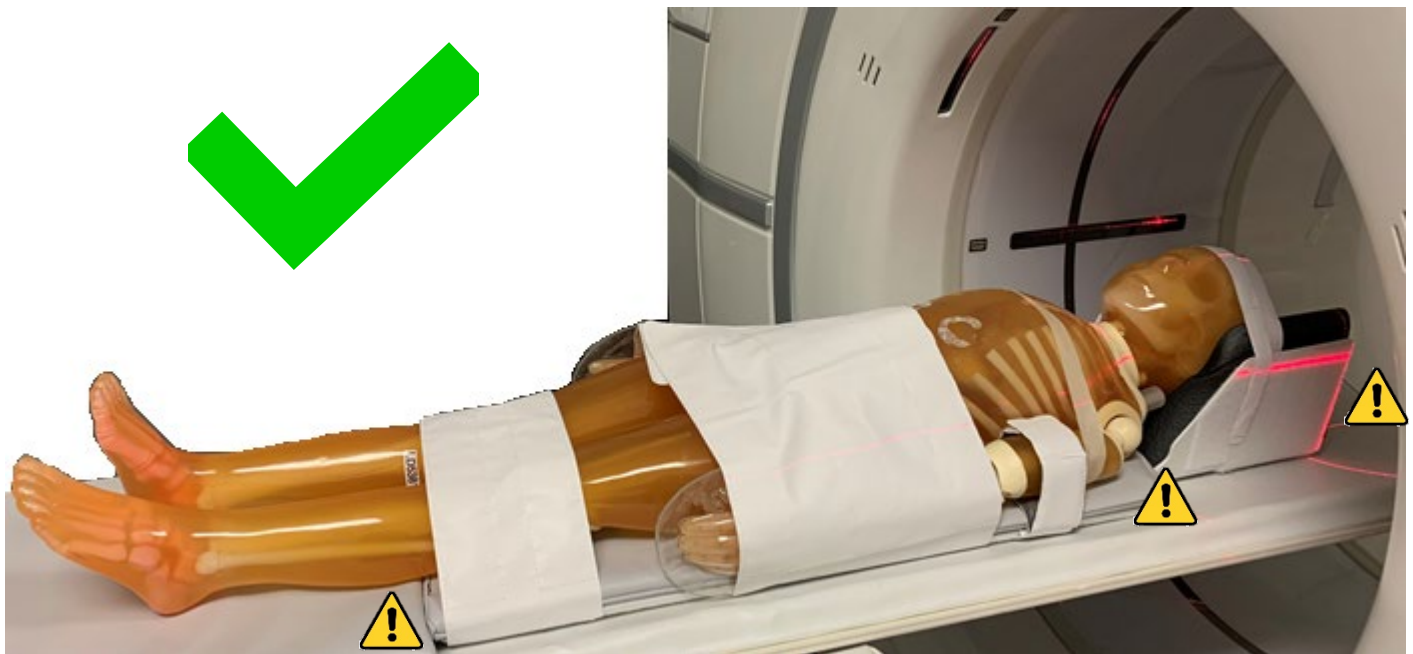



Advertencia! No coloque la anatomía de interés sobre las uniones.



El posicionador debe estar aproximadamente a ~12 pulgadas o ~30.5 cm del extremo de la mesa para que no haya interferencia del pestillo del extensor de la mesa.

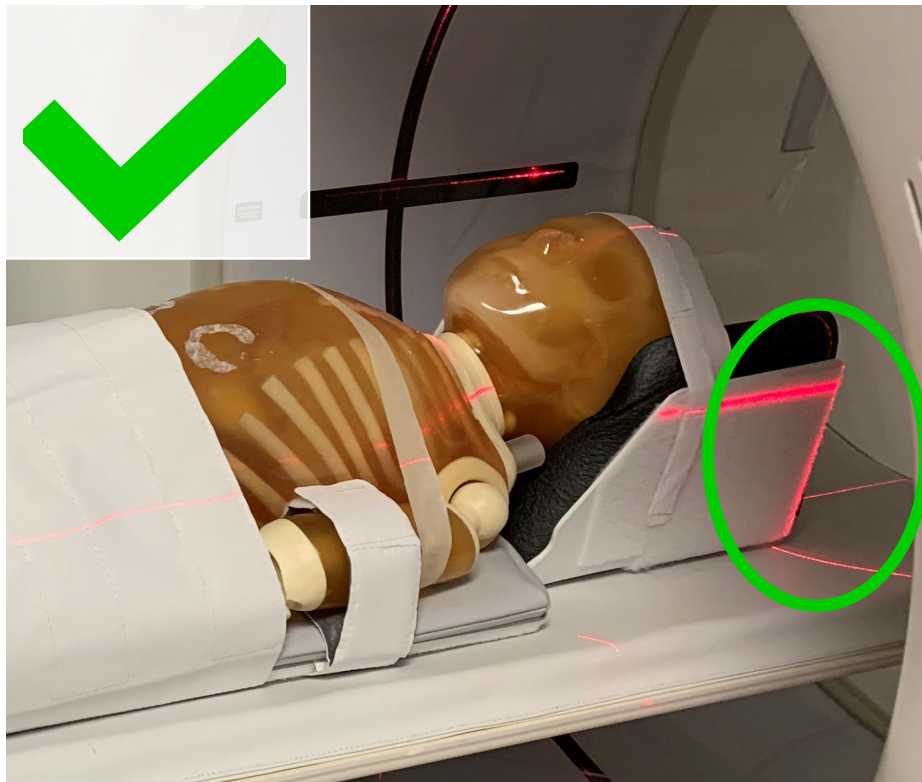

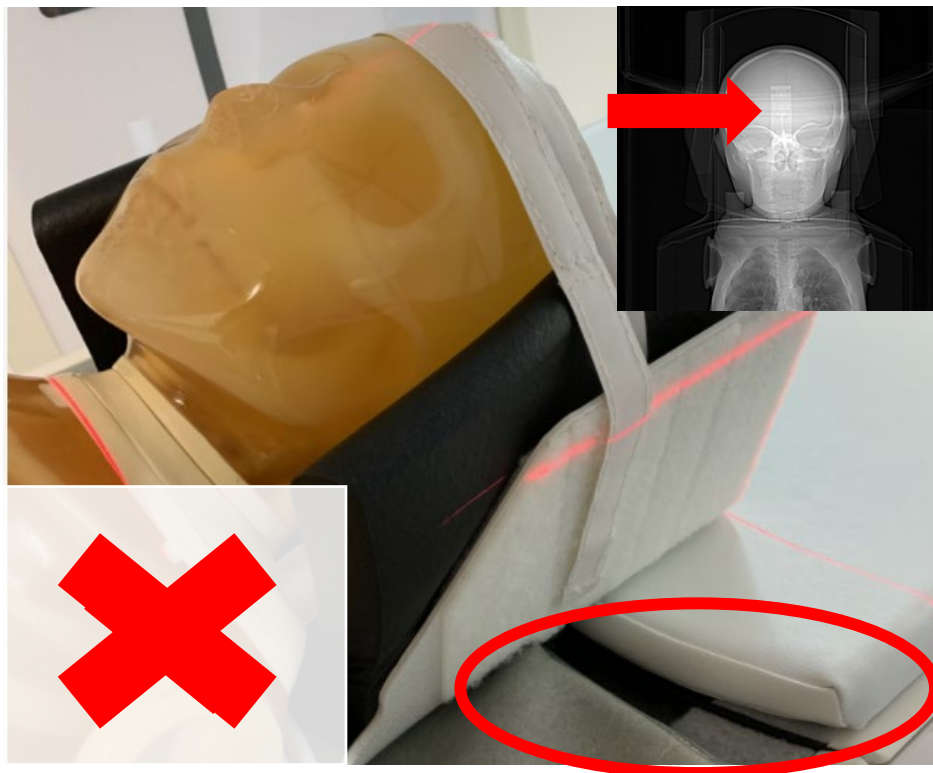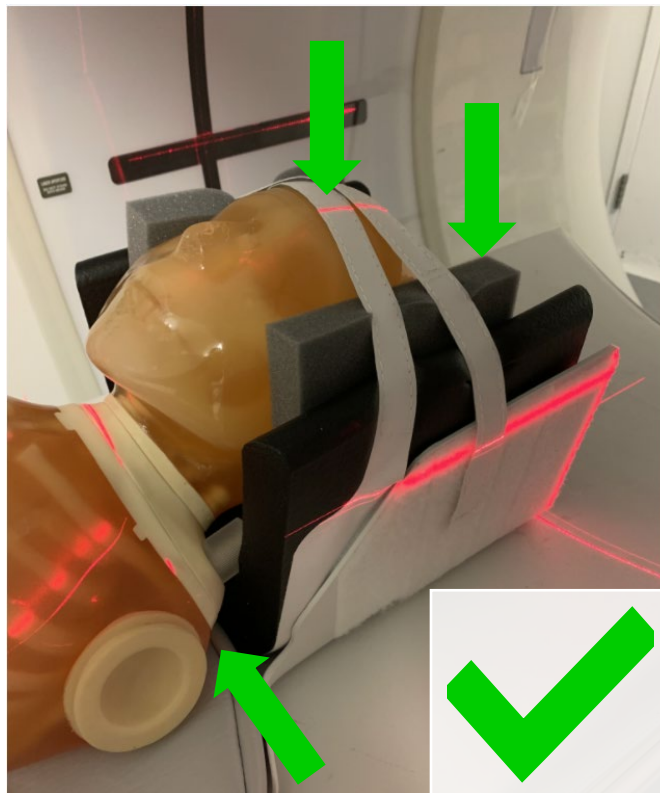

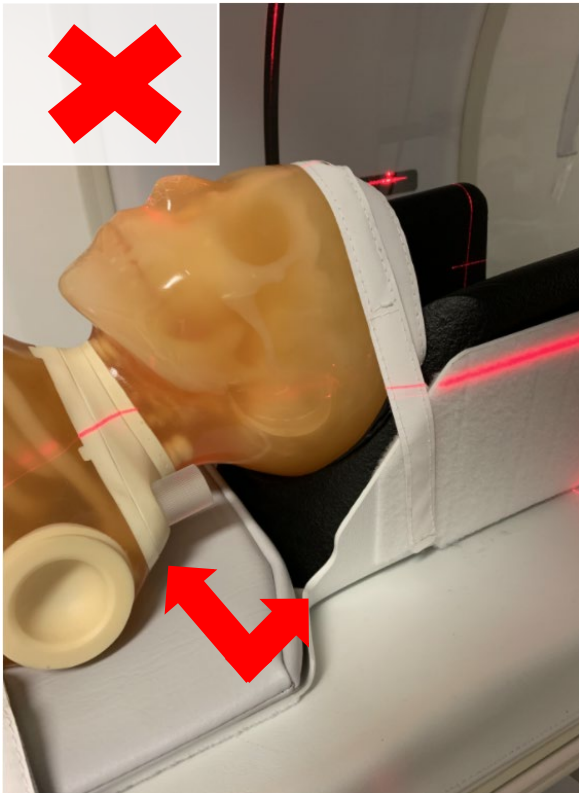

Limpieza y desinfección

Limpie quitando la suciedad y desinfecte de acuerdo con las instrucciones del fabricante/las prácticas de limpieza ambiental de las instalaciones locales utilizando:

- Lejía doméstica común - Diluida 10:1 (5 minutos de tiempo mínimo de desinfección)
- Toallitas con lejía Sani-Cloth® de PDI
- Toallitas germicidas con lejía de Clorox Healthcare®
- Spray limpiador germicida con lejía de Clorox Healthcare®
- Toallitas limpiadoras desinfectantes con peróxido de hidrógeno de Clorox Healthcare®
- Limpiador de superficies múltiples con lejía Clorox®
- Solución de lejía germicida Micro-Kill Bleach de Medline
- Toallitas con lejía germicida Micro-Kill Bleach de Medline



¡Advertencia! SIEMPRE enjuague los productos con agua limpia para eliminar cualquier residuo de la solución de limpieza/desinfección. No hacerlo puede resultar en lesión del paciente.