


Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT

Hướng dẫn Sử dụng

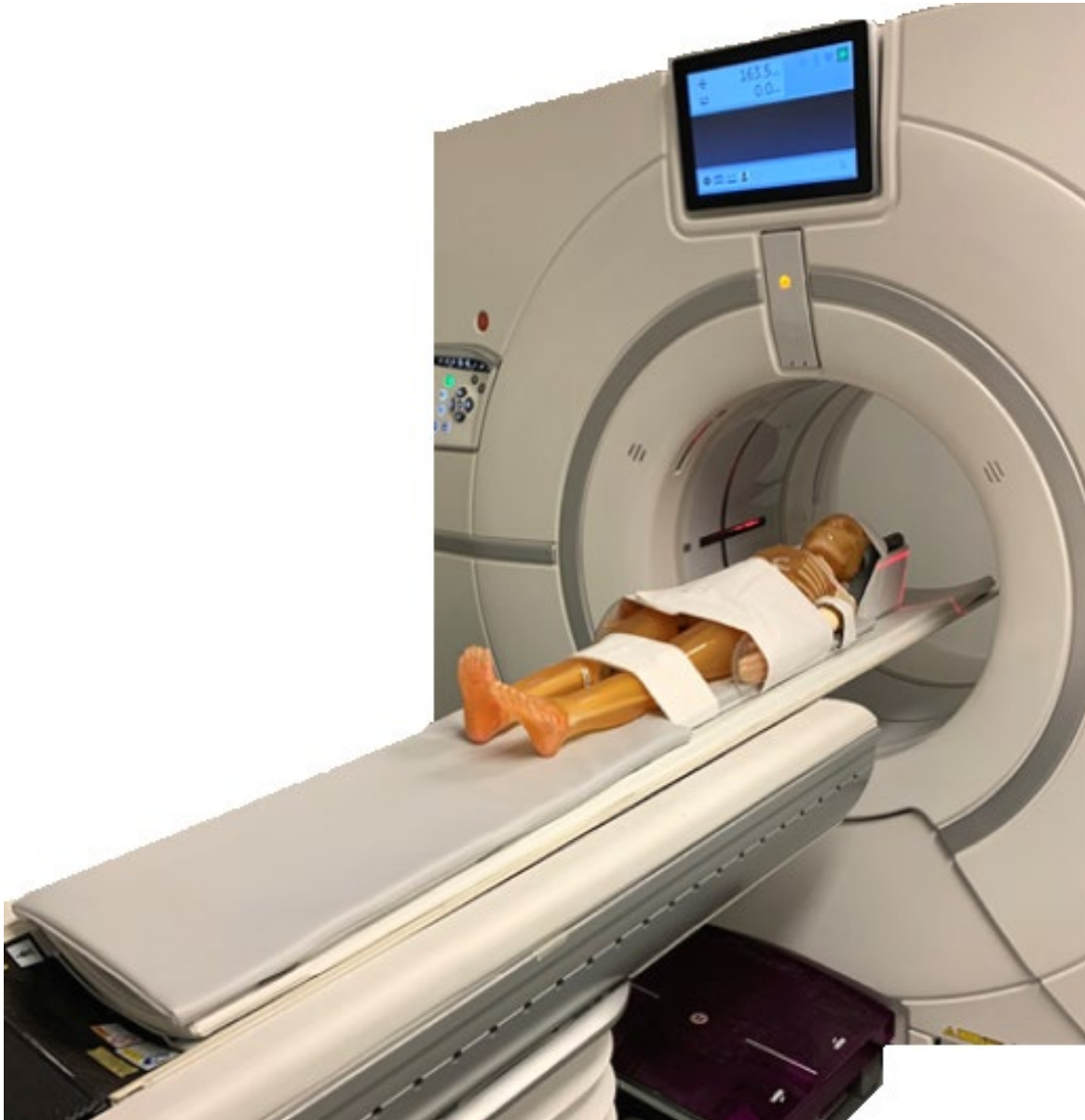

Thông tin Quan trọng

vi – E8003S Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT

en – E8003S CHILD POSITIONER FOR GE CT SYSTEMS

fr - E8003S Positionneur pour enfant pour systèmes CT de GE

de - E8003S Kinderpositionierer für GE CT-Systeme

it - E8003S Posizionatore da bambino per sistemi GE CT

es - E8003S Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE

el – E8003S Τοποθετητής παιδιού για συστήματα αξονικού τομογράφου GE CT

ga – E8003S Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT

pt-BR - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE

ZH-CN - E8003S GE CT 系統的儿童體位固定裝置

ja - E8003S GE CTシステム用チャイルドポジショナ

bg - E8003S Детски позиционер за GE CT системи

zh - E8003S GE CT 系統的儿童体位固定裝置

hr - E8003S Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom

cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT

da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer

nl - E8003S Child Positioner voor GE CT Systemen

et - E8003S Lapse positsioneerija GE KT-süsteemidele

fi - E8003S Lasten asetin GE TT -järjestelmiä varten

mt - E8003S Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT

hu - E8003S Gyermekek teströgzítő szett GE CT rendszerekhez

ko - E8003S GE CT 시스템 용 차일드 포지셔너

lv - E8003S Bērnu fiksators GE CT sistēmām

lt - E8003S Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms

no - E8003S Barneposisjoner for GE CT-systemer

pl - E8003S Pozycjoner pediatryczny do systemów TK firmy GE

pt - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE

ro - E8003S Pozitie pentru copii pentru sistemele GE CT

ru - E8003S Детский позиционер для систем GE CT

sr - E8003S Дечји позиционер за GE CT системе

id - E8003S Positioner Anak untuk Sistem GE CT

sk - E8003S Detský polohovateľ pre CT systémy GE

sl - E8003S Komplet za nsramestitev otroka v GE CT

sv - E8003S Barnfixering för GE CT-system

tr - E8003S GE CT Sistemleri için Çocuk Konumlandırıcı

uk - E8003S Дитячий позиционер для систем GE CT

kk - E8003S GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы

DOMICO
Med-Device

REF 28023



Sản xuất Bởi:

Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 USA
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Không Được
Làm Bằng
Mủ Cao Su Tự
Nhiên



Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta




CẢNH

BÁO:

Sản phẩm này có thể khiến bạn tiếp xúc với các hóa chất được Tiểu bang California xác định là gây hại cho sức khỏe sinh sản. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.P65Warnings.ca.gov. 1-methyl-2-pyrroldione (NMP) CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1

Các thành phần

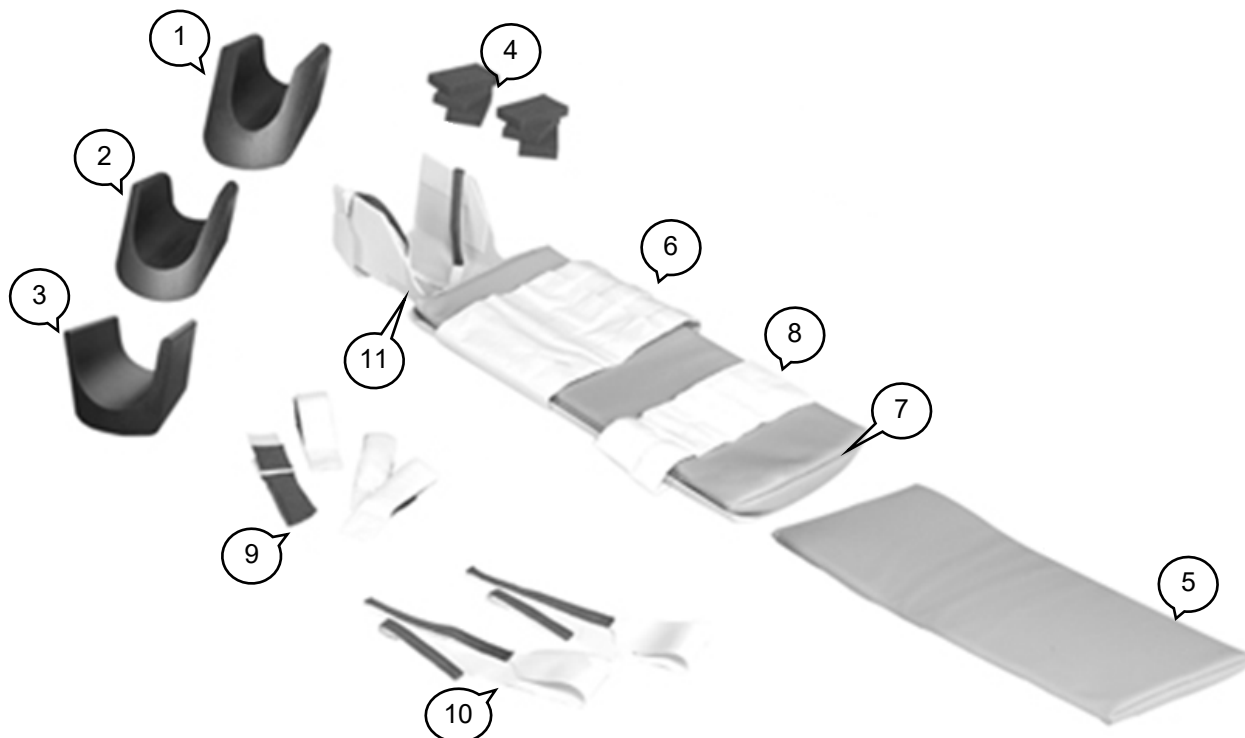

Bộ phận	Số Bộ phận	Mô tả
1	28024	E8003SA CT Đệm đầu trẻ em - Nhỏ
2	28025	E8003SB CT Đệm đầu trẻ em - Vừa
3	28026	E8003SC CT Đệm đầu trẻ em - Lớn
4	20603	E8003DG Miếng xấp
5	28060	E8005BD Tấm đệm, Phần mở rộng
6	23802	E8005AG Dây buộc Người của Thiết bị Cố định Trẻ em, Rộng
7	28057	E8005AJ Tấm đệm của Thiết bị Cố định Trẻ em
8	28058	E8005AH Dây buộc Người của Thiết bị Cố định Trẻ em - Hẹp
9	26940	E8005BA Dây buộc Cổ tay của Thiết bị Cố định Trẻ em
10	23531	E8002BB Dây buộc Đầu của Thiết bị Cố định Trẻ em
11	21540	E8005AK Phần đỡ của Thiết bị Cố định Trẻ em

Ghi chú: Mọi sự cố nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng thiết bị cần được báo cho nhà sản xuất và cơ quan y tế/cơ quan có thẩm quyền nơi thiết bị được lắp đặt.




Cảnh báo! Bảng bệnh nhân phải chắc chắn trước khi cho bệnh nhân vào để tránh bệnh nhân bị té ngã.



Cảnh báo! Trước khi bắt đầu thủ thuật, bệnh nhân phải được buộc chắc vào thiết bị cố định, và thiết bị cố định phải được buộc chắc vào bàn có dây đai để tránh bệnh nhân bị té ngã.


Chuẩn bị


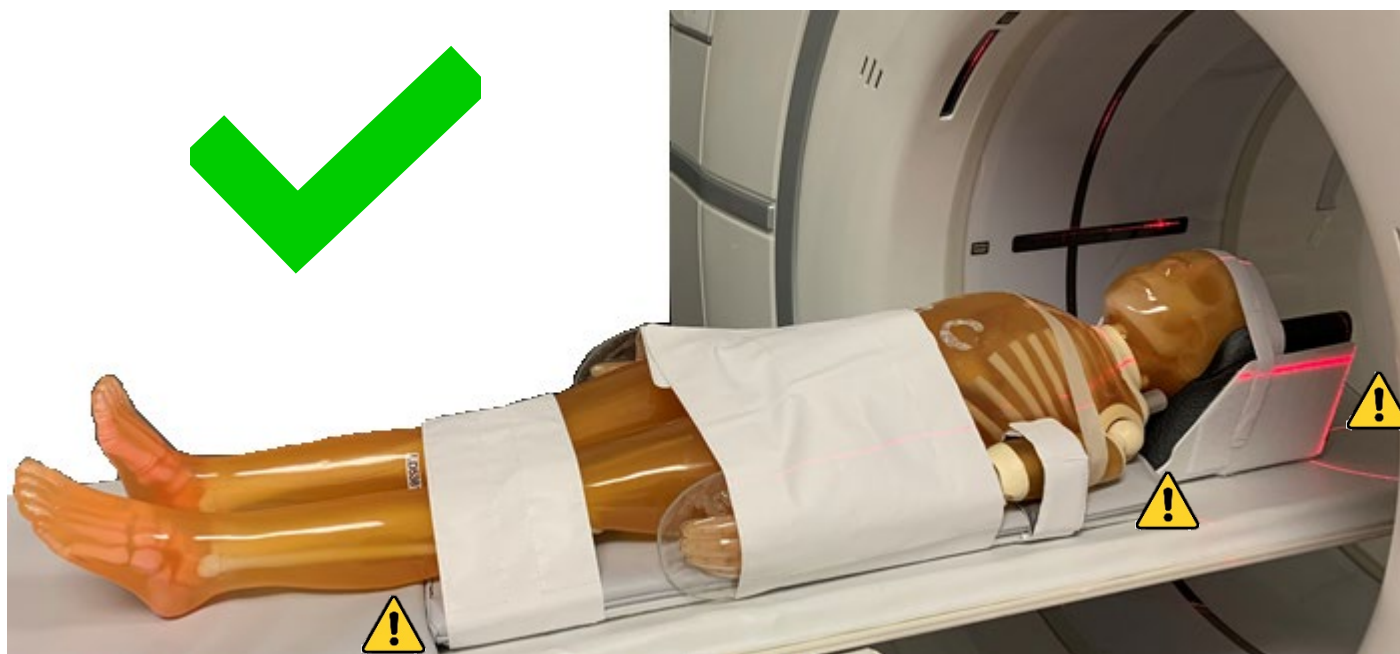



Cảnh báo! Không đặt phần cơ thể cần chụp ở phía trên các điểm nổi.



Thiết bị cố định phải cách phần cuối bàn khoảng ~ 12in tức là ~ 30.5cm để chốt mở rộng bàn không gây cản trở.

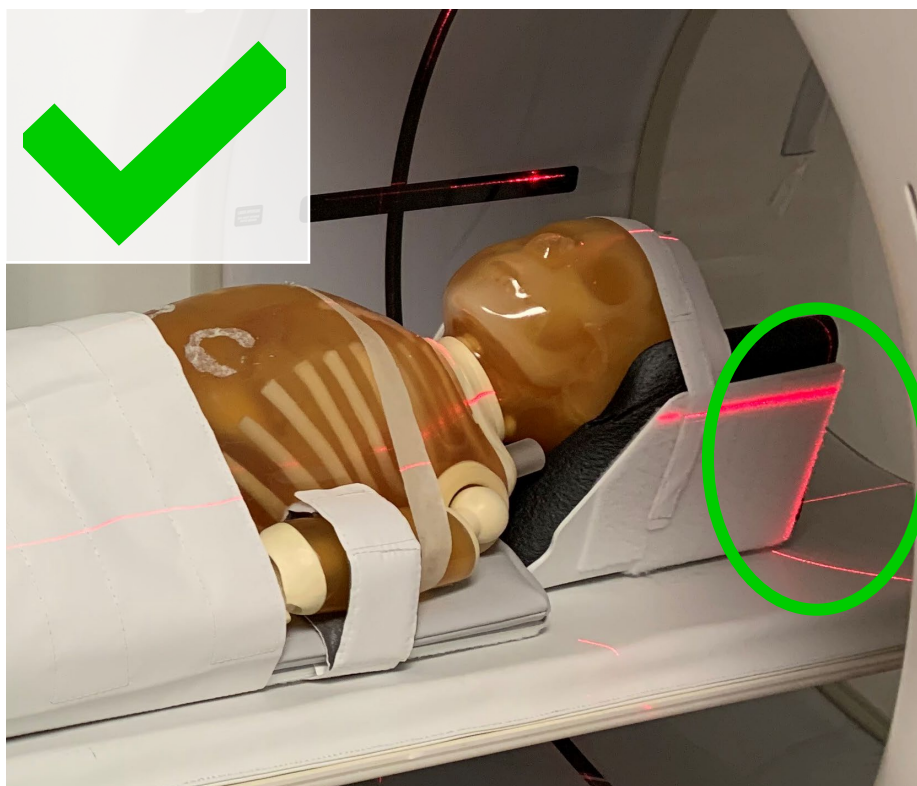

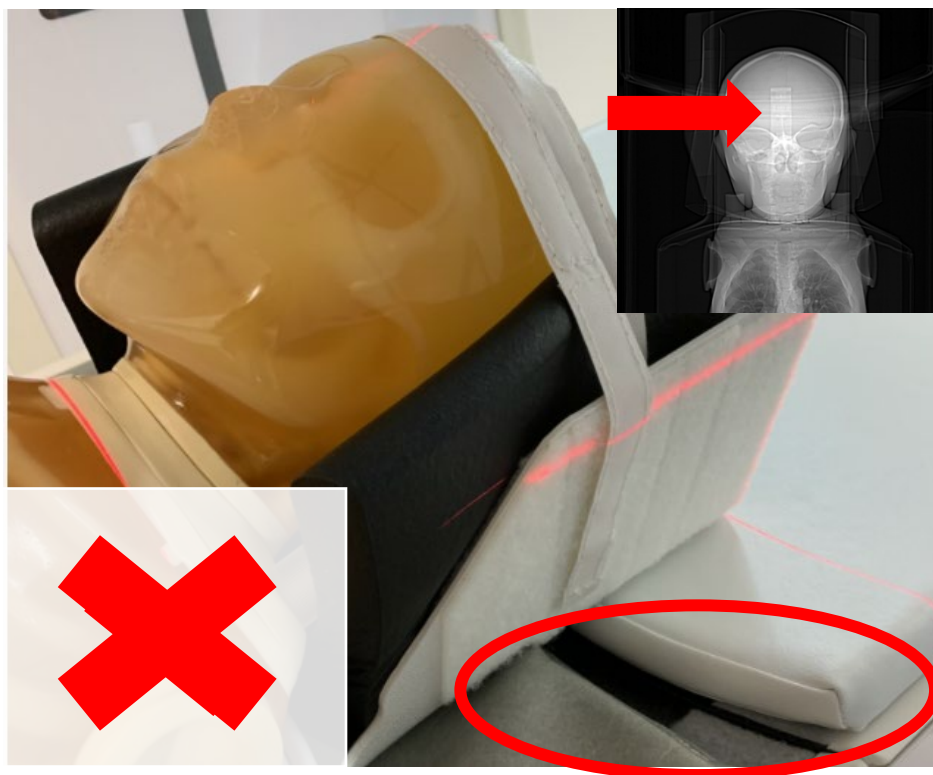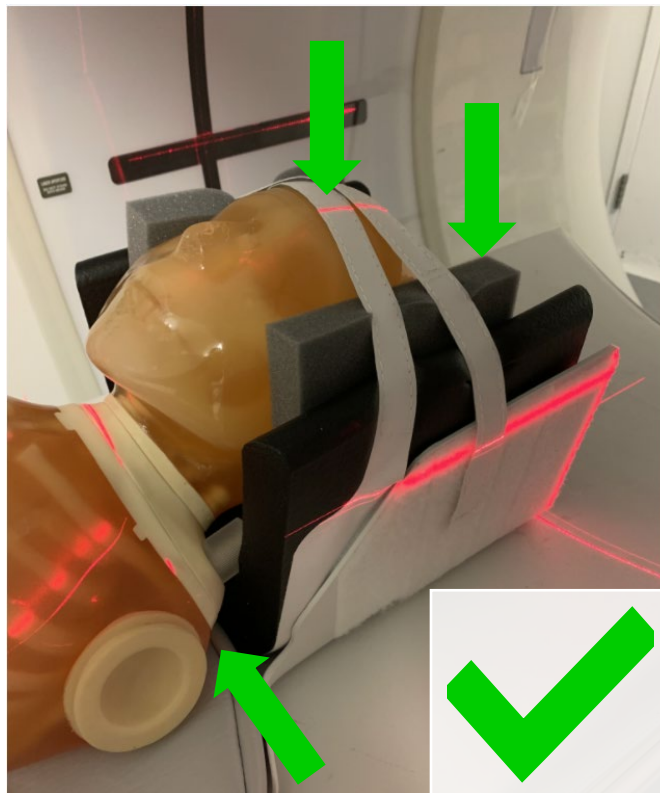

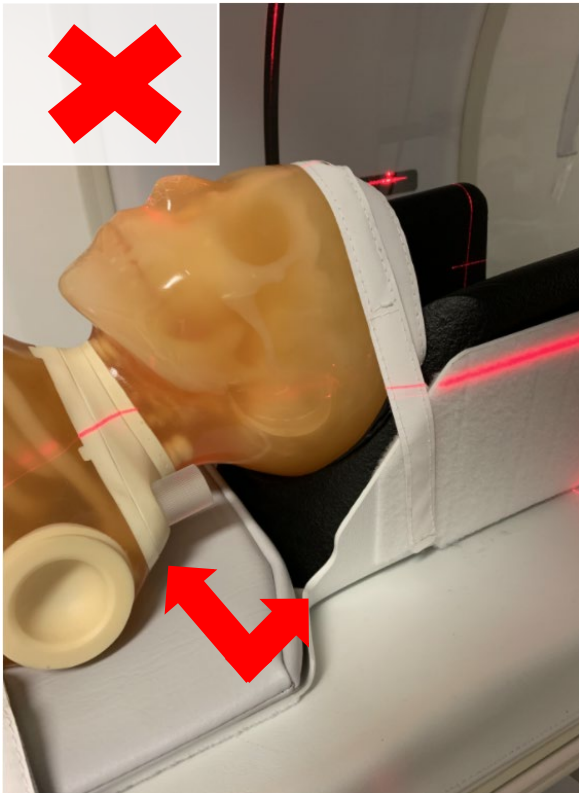

Vệ sinh và Khử trùng

Vệ sinh bằng cách chùi sạch vết bẩn và khử trùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất/theo cách vệ sinh môi trường của cơ sở địa phương bằng cách sử dụng:

- Thuốc tẩy gia dụng thông thường - pha loãng 10:1 (thời gian khử trùng tối thiểu là 5 phút)
- Khăn Tẩy Sani-Cloth® của PDI
- Khăn Diệt khuẩn của Clorox Healthcare®
- Nước xịt Tẩy rửa Diệt khuẩn của Clorox Healthcare®
- Khăn Khử trùng Tẩy rửa Peroxide Cleaner của Clorox Healthcare®
- Nước Tẩy Nhiều Bề mặt Clorox®
- Nước Tẩy Diệt khuẩn Micro-Kill Bleach của Medline
- Khăn Tẩy Diệt khuẩn Micro-Kill Bleach của Medline



Cảnh báo! LUÔN LUÔN rửa lại sản phẩm bằng nước sạch để loại bỏ bất kỳ chất nào còn sót lại từ dung dịch tẩy rửa/khử trùng. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến thương tích cho bệnh nhân.