

Child Positioner voor gebruik met: Premier, Voyager, Explorer systemen

Instructies voor het gebruik



nl – Child Positioner voor gebruik met Premier, Voyager, Explorer systemen

en - E8823MR Child Positioner For Use With Systems: Premier, Voyager, Explorer
fr - E8823MR Positionneur pour enfant pour systèmes : Premier, Voyager, Explorer
de - E8823MR Kinderpositionierer zur Verwendung mit Systemen: Premier, Voyager, Explorer
it - E8823MR Posizionatore da bambino per l'uso con i sistemi: Premier, Voyager, Explorer
es - E8823MR Posicionador infantil para usar con los sistemas: Premier, Voyager, Explorer
el - E8823MR Τοποθετητής παιδιού για χρήση με τα συστήματα: Premier, Voyager, Explorer
ga - E8823MR Socraitheoir Páiste le húsáid in éineacht le Córais: Premier, Voyager, Explorer
pt-BR - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
ZH - E8823MR 兒童體位固定裝置 - 適用系統 : Premier、Voyager、Explorer
ja - E8823MR Premier、Voyager、Explorer システム対応 チャイルドポジショナー
bg - E 8823MR Детски позиционер за използване със системи: Premier, Voyager, Explorer
zh - E8823MR 兒童體位固定裝置 - 適用系統 : Premier、Voyager、Explorer
hr - E8823MR Dječja kolijevka za uporabu sa sustavima: Premier, Voyager, Explorer
cs - E8823MR Dětská kolébka Kit Pro použití se systémy: Premier, Voyager, Explorer
da - E8823MR Positioneringsenhed til børn til systemerne: Premier, Voyager, Explorer
et - Lapse positsioneerija süsteemidele Premier, Voyager, Explorer
fi - E8823MR Lasten asetin käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa: Premier, Voyager, Explorer
mt - E8823MR Pożizzjonatur tat-Tfal biex jintuża mas-Sistemi: Premier, Voyager, Explorer
hu - E8823MR Gyermekek test rögzítő, amely az alábbi rendszerekkel használható: Premier, Voyager, Explorer
ko - E8823MR 자식 포지셔너시스템과 함께 사용하기 위해: Premier, Voyager, Explorer
lv - E8823MR Bērnu fiksators lietošanai ar sistēmām: Premier, Voyager, Explorer
lt - E8823MR Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas naudoti su sistemomis „Premier“, „Voyager“, „Explorer“
no - E8823MR Underordnet stillingsstiller For bruk med systemer: Premier, Voyager, Explorer
pl - E8823MR Pozycjoner pediatryczny do użytku z systemami: Premier, Voyager, Explorer
pt - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
ro - E8823MR Kit de leagăn pediatric pentru utilizare cu sisteme: Premier, Voyager, Explorer
ru - E8823MR Детский позиционер Для использования с системами: Premier, Voyager, Explorer
sr - E8823MR Дечији позиционер За употребу са системима: Premier, Voyager, Explorer
id - E8823MR Posisi anak Untuk Digunakan dengan Sistem: Premier, Voyager, Explorer
sk - E8823MR Detský polohovateľ na použitie so systémami: Premiér, Voyager, Explorer
sl - E8823MR Komplet za namestitve otroka v sistemih: Premier, Voyager, Explorer
sv - E8823MR Barnfixering för användning med systemen: Premier, Voyager, Explorer
tr - E8823MR Alt konumlayıcı Sistemlerle Kullanım İçin: Premier, Voyager, Explorer
uk - E8823MR Дочірній позиціонер Для використання з системами: Premier, Voyager, Explorer
kk - E8823MR Premier, Voyager, Explorer жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткішті пайдалану жөніндегі нұсқаулық
vi - E8823MR Thiết bị Cố định Trẻ em để sử dụng với các Hệ thống: Premier, Voyager, Explorer



Gemaakt door:
Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 USA
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Niet gemaakt met
Natuurlijk rubber
latex




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



WARNING:

Dit product kan u blootstellen aan chemische stoffen waarvan de staat Californië weet dat ze schade kunnen toebrengen aan de voortplanting. Voor meer informatie, ga naar www.P65Warnings.ca.gov. 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP) CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1; Trixyl phosphate (TXP) CAS: 25155-23-1, EC: 246-677-8

Onderdelen

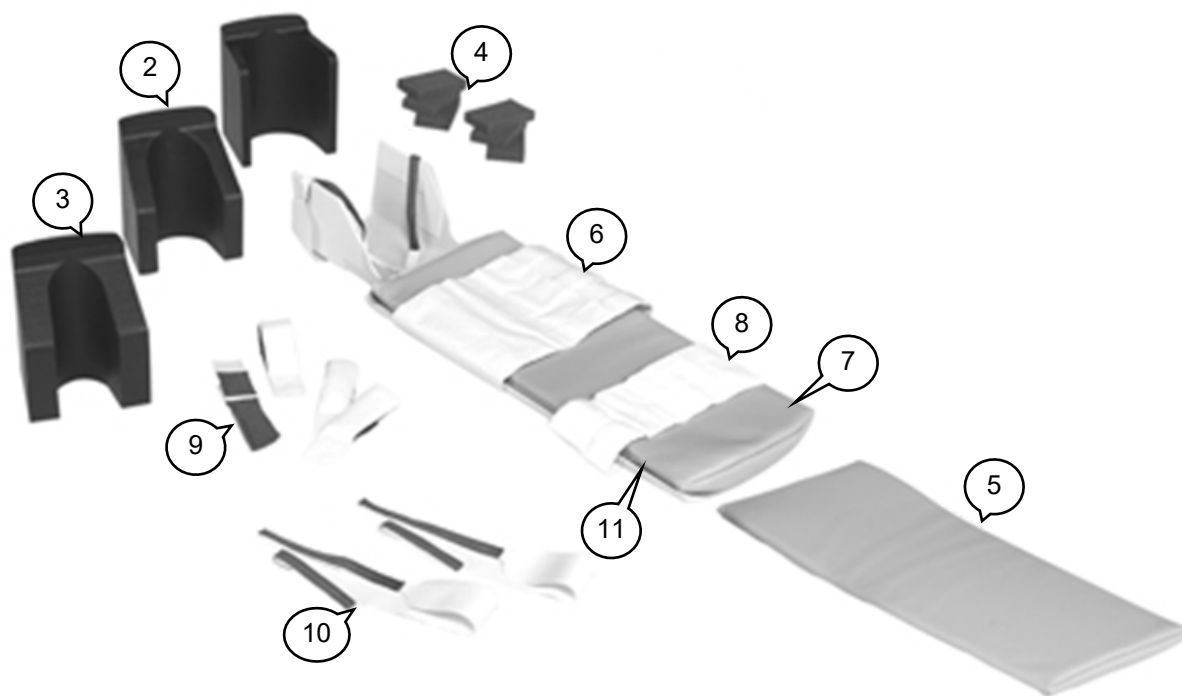

Onderdeel	Onderdeelnummer	Beschrijving
1	21349	E8005AN MR/NUC Inzetstuk voor kinderhoofd, groot
2	21350	E8005AM MR/NUC Inzetstuk voor kinderhoofd, medium
3	21351	E8005AL MR/NUC Inzetstuk voor kinderhoofd, klein
4	20603	E8003DG Schuimblok
5	28060	E8005BD Uitbreidingskussen
6	23802	E8005AG Child positioner Lichaamsband, breed
7	28057	E8005AJ Child Positioner kussen
8	28058	E8005AH Child positioner Lichaamsband, smal
9	26940	E8005BA Polsbanden voor Child positioner
10	23531	E8002BB Child Positioner Hoofdriemen
11	21540	E8005AK Child Positioner houder voor het hoofd

Opmerking: Elk ernstig incident in verband met het gebruik van het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de gezondheidsautoriteit/bevoegde instantie waar het hulpmiddel is geïnstalleerd.




Waarschuwing! De brancard moet stabiel zijn voordat de patiënt geladen wordt, om te voorkomen dat de patiënt valt.



Waarschuwing! Vóór het begin van de procedure moet de patiënt op de juiste wijze in de positioner worden vastgezet en moet de positioner met riemen aan de tafel worden vastgemaakt om te voorkomen dat de patiënt valt.


Instellen


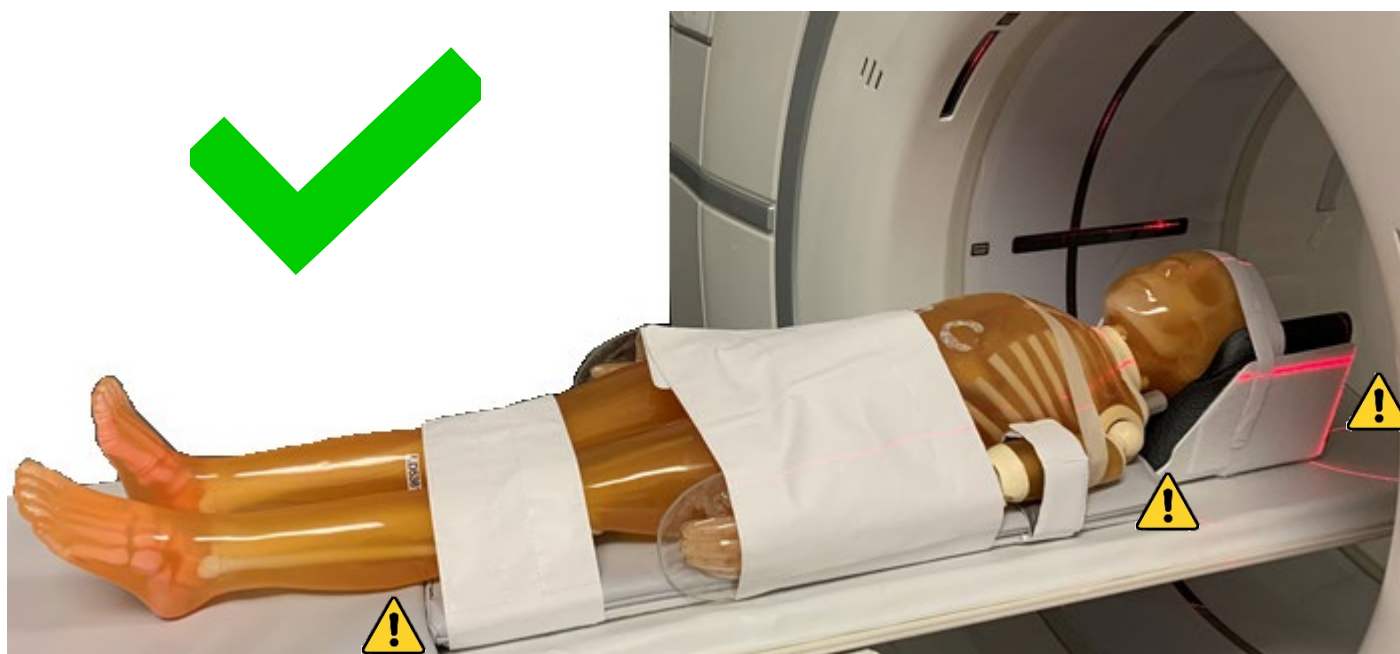



Waarschuwing! Plaats de anatomie van belang niet over de verbindingen.



De positioner moet ongeveer ~12in of ~30,5cm van het uiteinde van de tafel staan, zodat er geen interferentie is met de vergrendeling van de tafelverlenger.

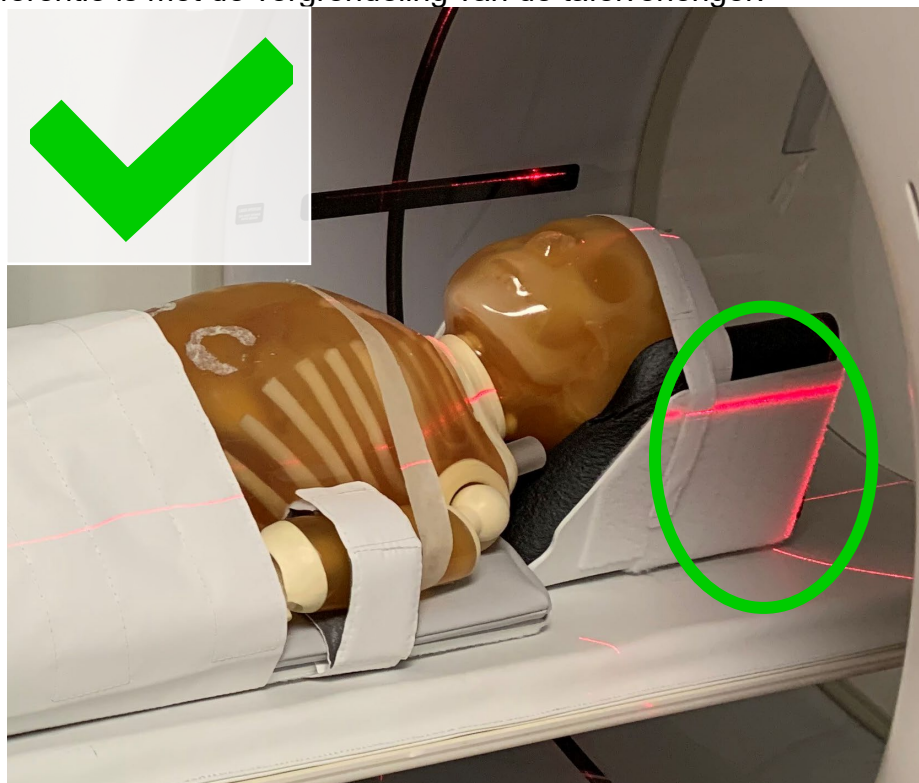

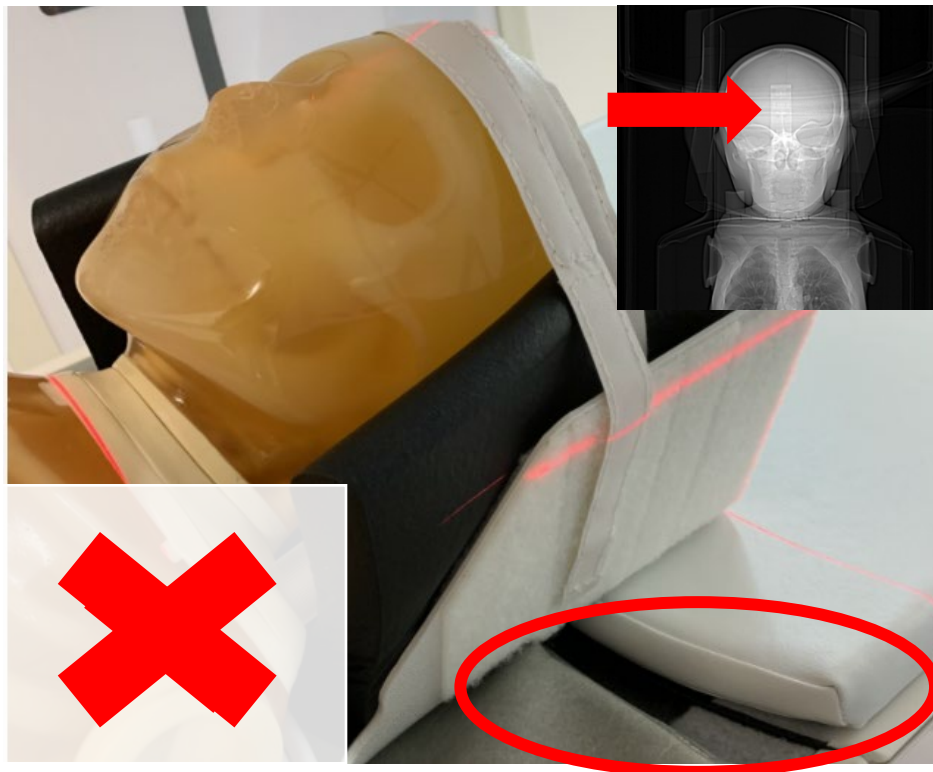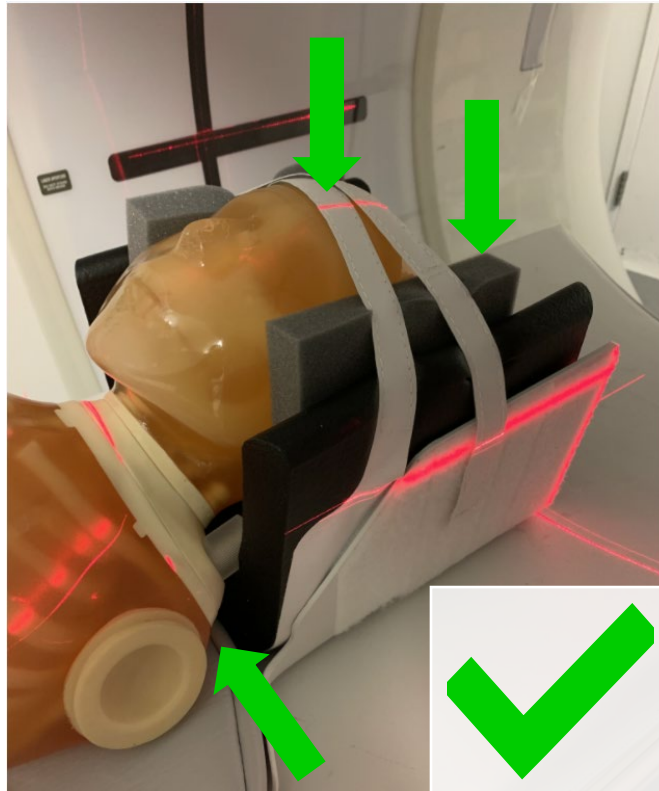

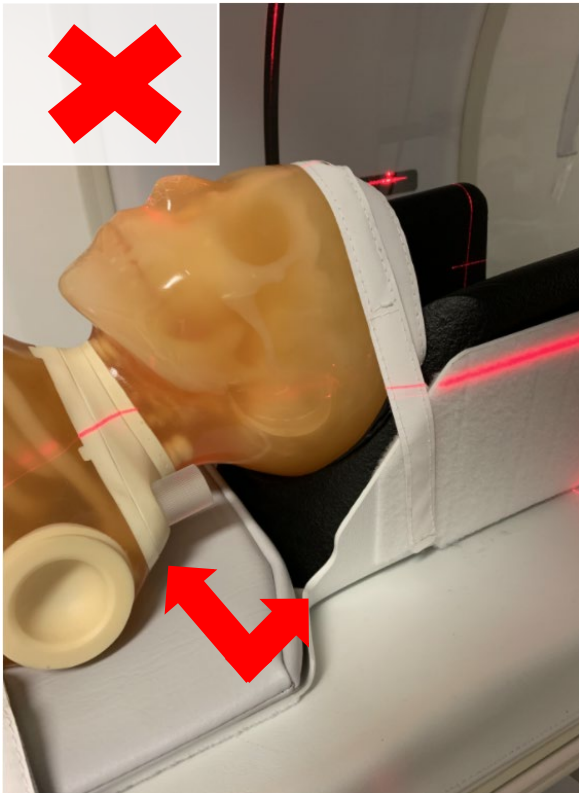

Reiniging en desinfectie

Reinig door het vuil te verwijderen en desinfecteer volgens de instructies van de fabrikant/volgens de plaatselijke milieuvriendelijke reinigingspraktijken door gebruik te maken van:

- Gewoon huishoudbleekmiddel - verdund 10:1 (Minimale desinfectietijd 5 minuten)
- Sani-Cloth® Bleekdoekjes van PDI
- Bleach Germicidal doekjes van Clorox Healthcare®
- Bleach Germicidal Cleaner Spray van Clorox Healthcare®
- Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectant doekjes van Clorox Healthcare®
- Clorox® Multi-oppervlakte reiniger met bleekmiddel
- Micro-Kill Bleach Germicidal Bleach Solution van Medline
- Micro-Kill Bleach Germicidal Bleach Wipes van Medline



Waarschuwing! Spoel de producten ALTIJD met helder water om eventuele resten van de reinigings-/desinfectievloeistof te verwijderen. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot letsel bij de patiënt.