

Pożizzjonatur tat-Tfal biex jintuża mas-Sistemi: Premier, Voyager, Explorer Istruzzjonijiet għall-Użu



mt - E8823MR Pożizzjonatur tat-Tfal biex jintuża mas-Sistemi: Premier, Voyager, Explorer

en - E8823MR Child Positioner for Use With Systems: Premier, Voyager, Explorer
fr - E8823MR Positionneur pour enfant pour systèmes : Premier, Voyager, Explorer
de - E8823MR Kinderpositionierer zur Verwendung mit Systemen: Premier, Voyager, Explorer
it - E8823MR Posizionatore da bambino per l'uso con i sistemi: Premier, Voyager, Explorer
es - E8823MR Posicionador infantil para usar con los sistemas: Premier, Voyager, Explorer
el - E8823MR Τοποθετητής παιδιού για χρήση με τα συστήματα: Premier, Voyager, Explorer
ga - E8823MR Socraitheoir Páiste le húsáid in éineacht le Córais: Premier, Voyager, Explorer
pt-BR - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
ZH - E8823MR 兒童體位固定裝置 - 適用系統 : Premier, Voyager, Explorer
ja - E8823MR Premier、Voyager、Explorerシステム対応 チャイルドポジショナー
bg - E 8823MR Детски позиционер за използване със системи: Premier, Voyager, Explorer
zh - E8823MR 兒童體位固定裝置 - 適用系統 : Premier, Voyager, Explorer
hr - E8823MR Dječja kolijevka za uporabu sa sustavima: Premier, Voyager, Explorer
cs - E8823MR Dětská kolébka Kit Pro použití se systémy: Premier, Voyager, Explorer
da - E8823MR Positioneringsenhed til børn til systemerne: Premier, Voyager, Explorer
nl - Child Positioner voor gebruik met: Premier, Voyager, Explorer systemen
et - Lapse positsioneerija süsteemidele Premier, Voyager, Explorer
fi - E8823MR Lasten asetin käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa: Premier, Voyager, Explorer
hu - E8823MR Gyermek test rögzítő, amely az alábbi rendszerekkel használható: Premier, Voyager, Explorer
ko - E8823MR 자식 포지셔너시스템과 함께 사용하기 위해: Premier, Voyager, Explorer
lv - E8823MR Bērnu fiksators lietošanai ar sistēmām: Premier, Voyager, Explorer
lt - E8823MR Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas naudoti su sistemomis „Premier“, „Voyager“, „Explorer“
no - E8823MR Underordnet stillingsstiller For bruk med systemer: Premier, Voyager, Explorer
pl - E8823MR Pozycjoner pediatryczny do użytku z systemami: Premier, Voyager, Explorer
pt - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
ro - E8823MR Kit de leagăn pediatric pentru utilizare cu sisteme: Premier, Voyager, Explorer
ru - E8823MR Детский позиционер Для использования с системами: Premier, Voyager, Explorer
sr - E8823MR Дечији позиционер За употребу са системима: Premier, Voyager, Explorer
id - E8823MR Posisi anak Untuk Digunakan dengan Sistem: Premier, Voyager, Explorer
sk - E8823MR Detský polohovateľ na použitie so systémami: Premiér, Voyager, Explorer
sl - E8823MR Komplet za namestitev otroka v sistemih: Premier, Voyager, Explorer
sv - E8823MR Barnfixering för användning med systemen: Premier, Voyager, Explorer
tr - E8823MR Alt konumlayıcı Sistemlerle Kullanım İçin: Premier, Voyager, Explorer
uk - E8823MR Дочірній позиціонер Для використання з системами: Premier, Voyager, Explorer
kk - E8823MR Premier, Voyager, Explorer жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткішті пайдалану жөніндегі нұсқаулық
vi - E8823MR Thiết bị Cố định Trẻ em để sử dụng với các Hệ thống: Premier, Voyager, Explorer



Manifatturat minn:
Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 USA
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



**Mhux magħmul mill-
Latex tal-Gomma
Naturali**




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



TWISSIJA:

Dan il-prodott jista' jesponik għal sustanzi kimiċi li l-Istat tal-Kalifornja jaf li jikkawżaw ħsara riproduttiva. Għal aktar informazzjoni żur www.P65Warnings.ca.gov. 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP) CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1; Fosfat trikasiliku (TXP) CAS: 25155-23-1, EC: 246-677-8

Komponenti

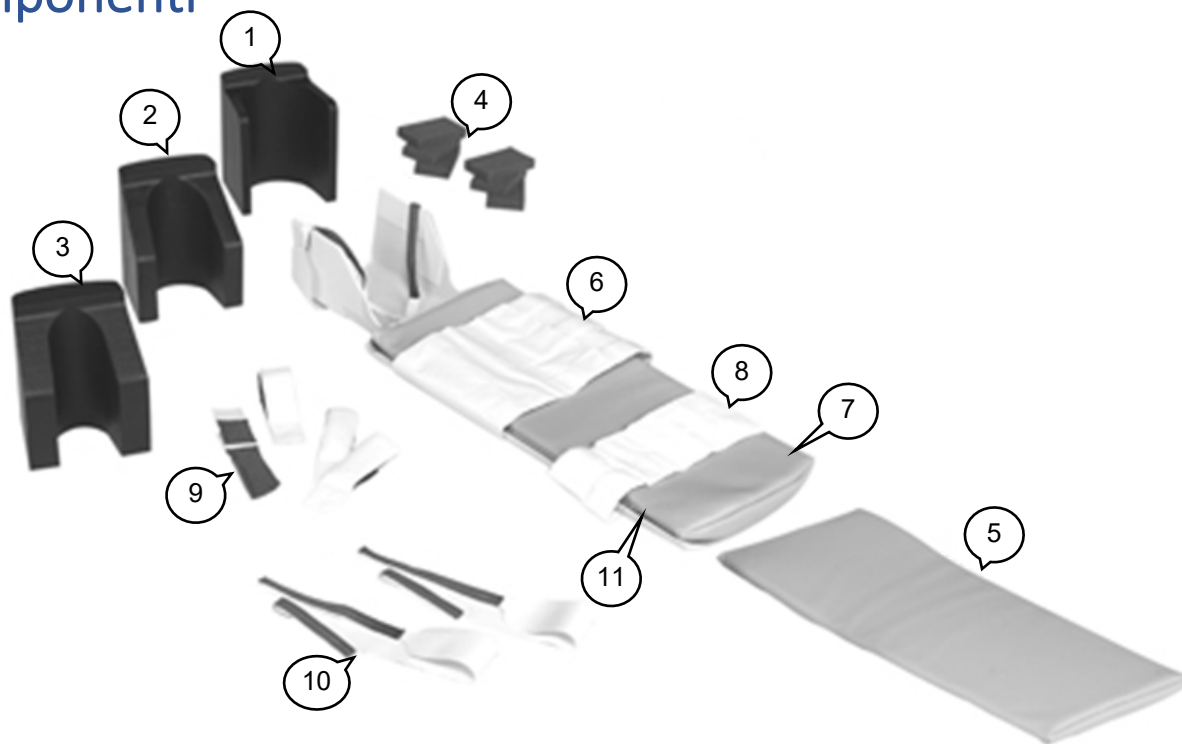

Oġġett	Numru tal-Part	Deskrizzjoni
1	21349	E8005AN MR/NUC Insert għal Ras it-Tfal, Kbira
2	21350	E8005AM MR/NUC Insert għal Ras it-Tfal, Medja
3	21351	E8005AL MR/NUC Insert għal Ras it-Tfal, Żgħira
4	20603	E8003DG Blokkja tal-Fowm
5	28060	E8005BD Kuxxinett, Estensjoni
6	23802	E8005AG Ċinga Korporali tal-Požizzjonatur tat-Tfal, Wiesgħa
7	28057	E8005AJ Kuxxinett tal-Požizzjonatur tat-Tfal
8	28058	E8005AH Ċinga Korporali tal-Požizzjonatur tat-Tfal, Dejqa
9	26940	E8005BA Ċineg tal-Polz tal-Požizzjonatur tat-Tfal
10	23531	E8002BB Ċineg tar-Ras tal-Požizzjonatur tat-Tfal
11	21540	E8005AK Nieqa tal-Požizzjonatur tat-Tfal

Nota: Kwalunkwe incident serju marbut tal-użu tat-tagħmir għandu jiġi rappurtat lill-manifattur u lill-awtorità tas-saħħa/awtorità kompetenti ta' fejn ikun installat it-tagħmir.




TWISSIJA: Il-bord għall-pazjent irid ikun stabbli qabel li jitgħabba l-pazjent biex il-pazjent ma jaqax.



Twissija! Qabel ma jingħata bidu għall-proċedura, il-pazjent irid ikun marbut mal-pożizzjonatur u l-pożizzjonatur irid ikun marbut mal-mejda b'ċineg li jżommu lill-pazjent milli jaqa'.


Muntagġ


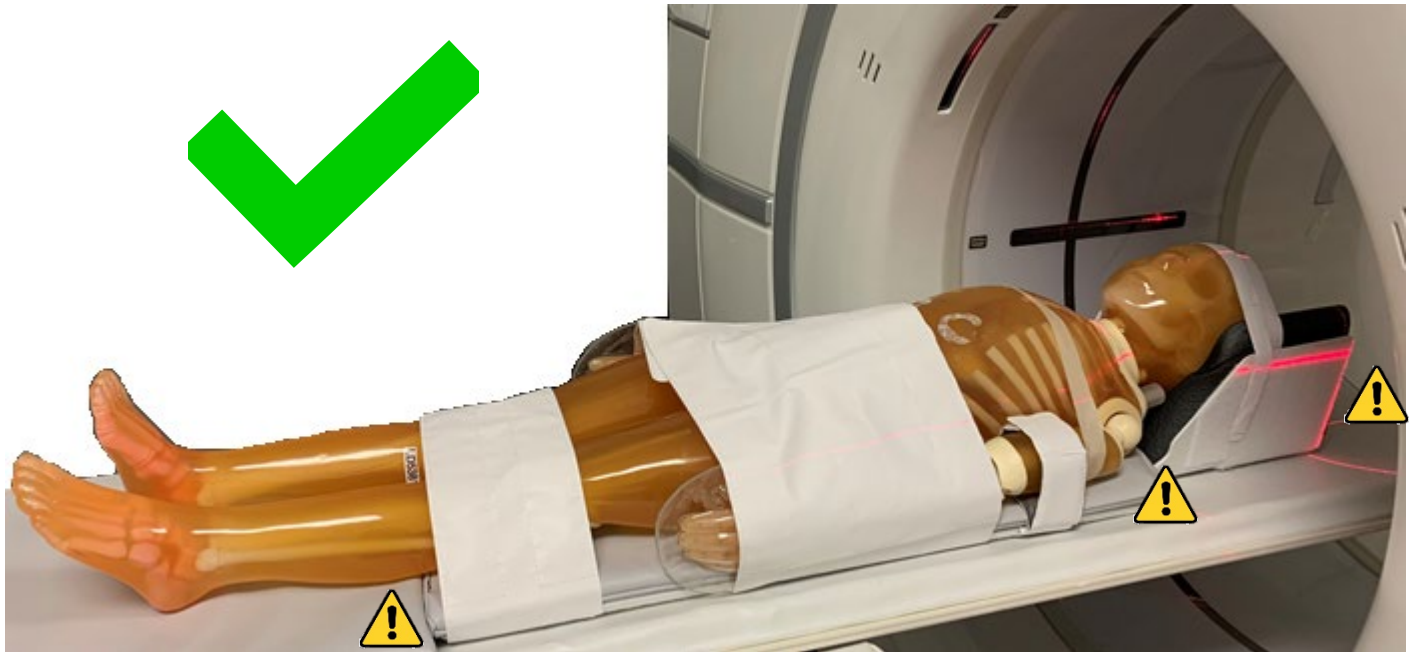



TWISSIJA: Tpoġġix partijiet tal-ġisem ta' interess fuq il-ġunzjonijiet.



Il-pożizzjonatur għandu jkun madwar ~12-il pulzier jew ~30.5cm mit-tarf tal-mejda biex ma jkunx hemm interferenza mill-extender latch tal-mejda.

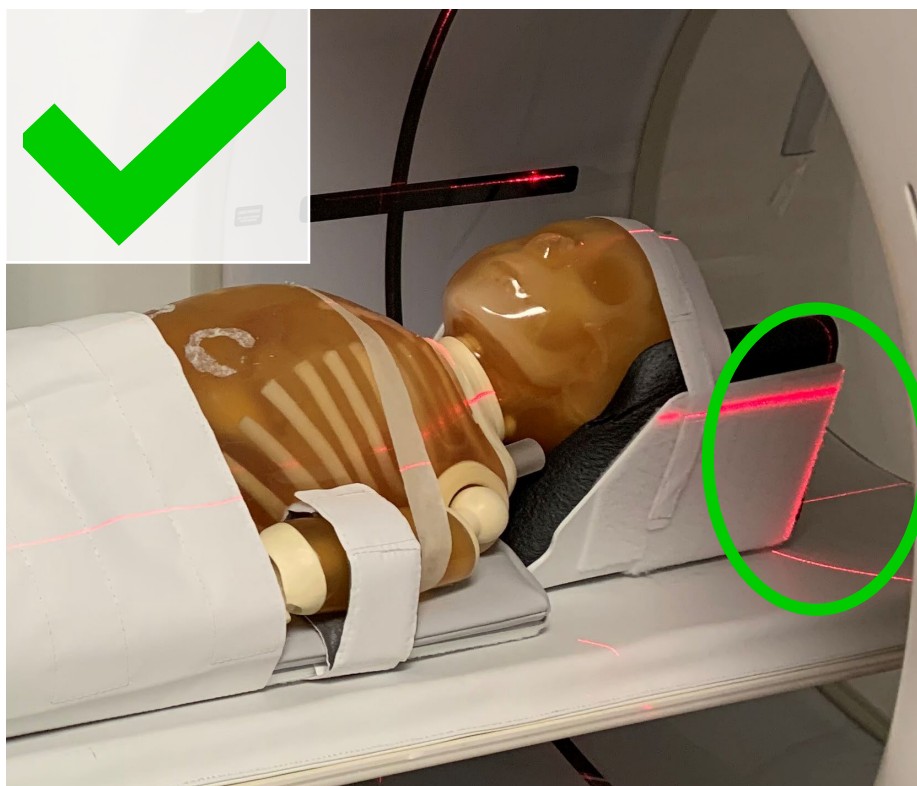

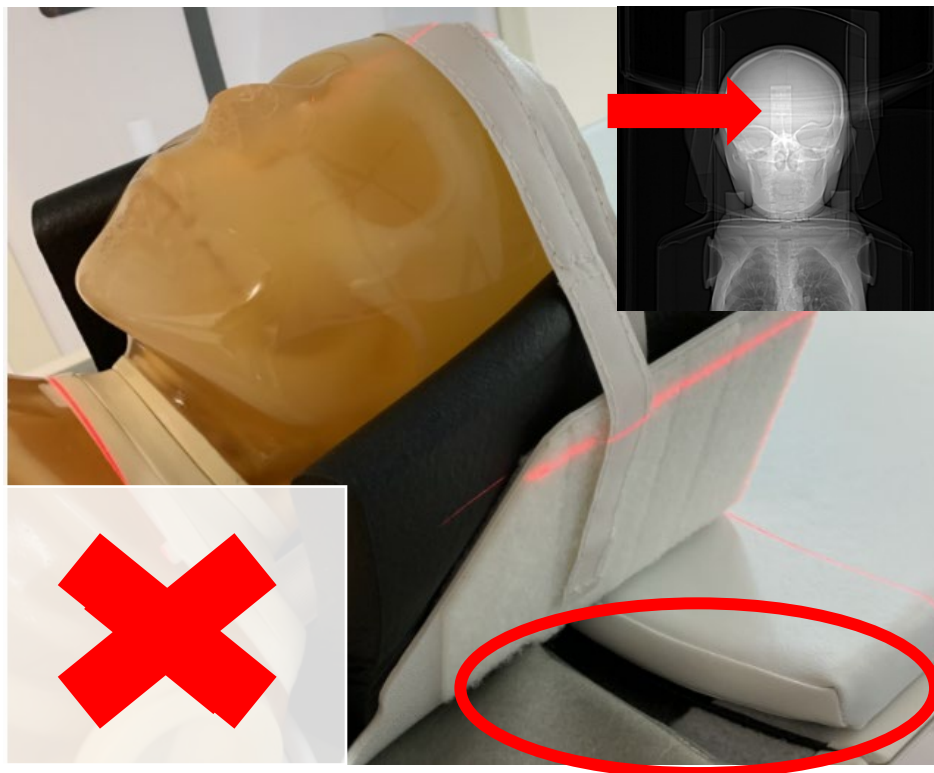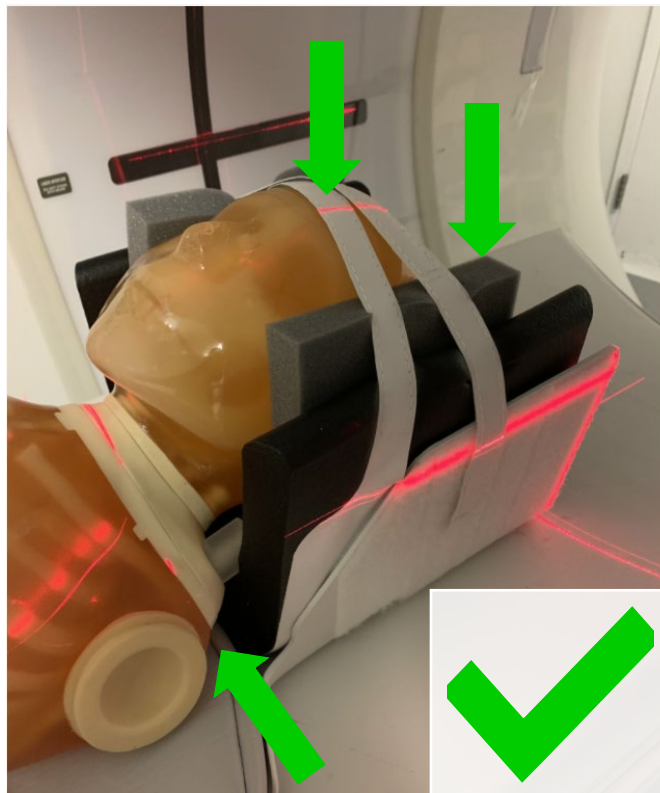

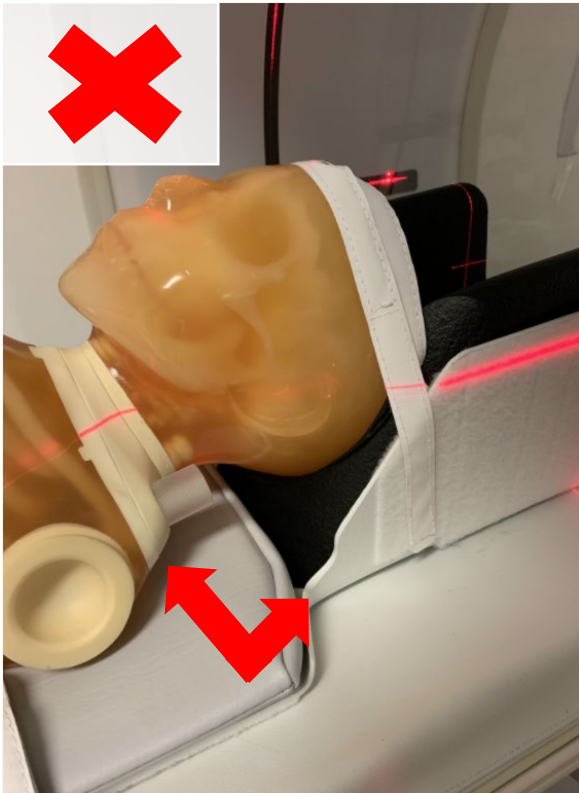

Tindif u Diżinfazzjoni

Naddaf billi tneħħi l-ħmieġ u ddiżinfetta skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur/skont il-prattiki ta' tindif ambjentali tal-faċilità lokali billi tuża:

- Bleach domestiku komuni - dilwit 10:1 (ħin minimu ta' diżinfazzjoni 5 minuti)
- Sani-Cloth® Bleach Wipes by PDI
- Bleach Germicidal Wipes by Clorox Healthcare®
- Bleach Germicidal Cleaner Spray by Clorox Healthcare®
- Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectant Wipes by Clorox Healthcare®
- Clorox® Multi Surface Cleaner With Bleach
- Micro-Kill Bleach Germicidal Bleach Solution by Medline
- Micro-Kill Bleach Germicidal Bleach Wipes by Medline



TWISSIJA: DEJJEM laħlaħ il-prodotti b'ilma nadif biex tneħħi kull fdalijiet tal-prodott tat-tindif/diżinfazzjoni. Jekk dan ma jsirx, jista' jirriżulta fi ħsara lill-pazjent.