


GE CT 系統的兒童體位固定裝置 使用說明書

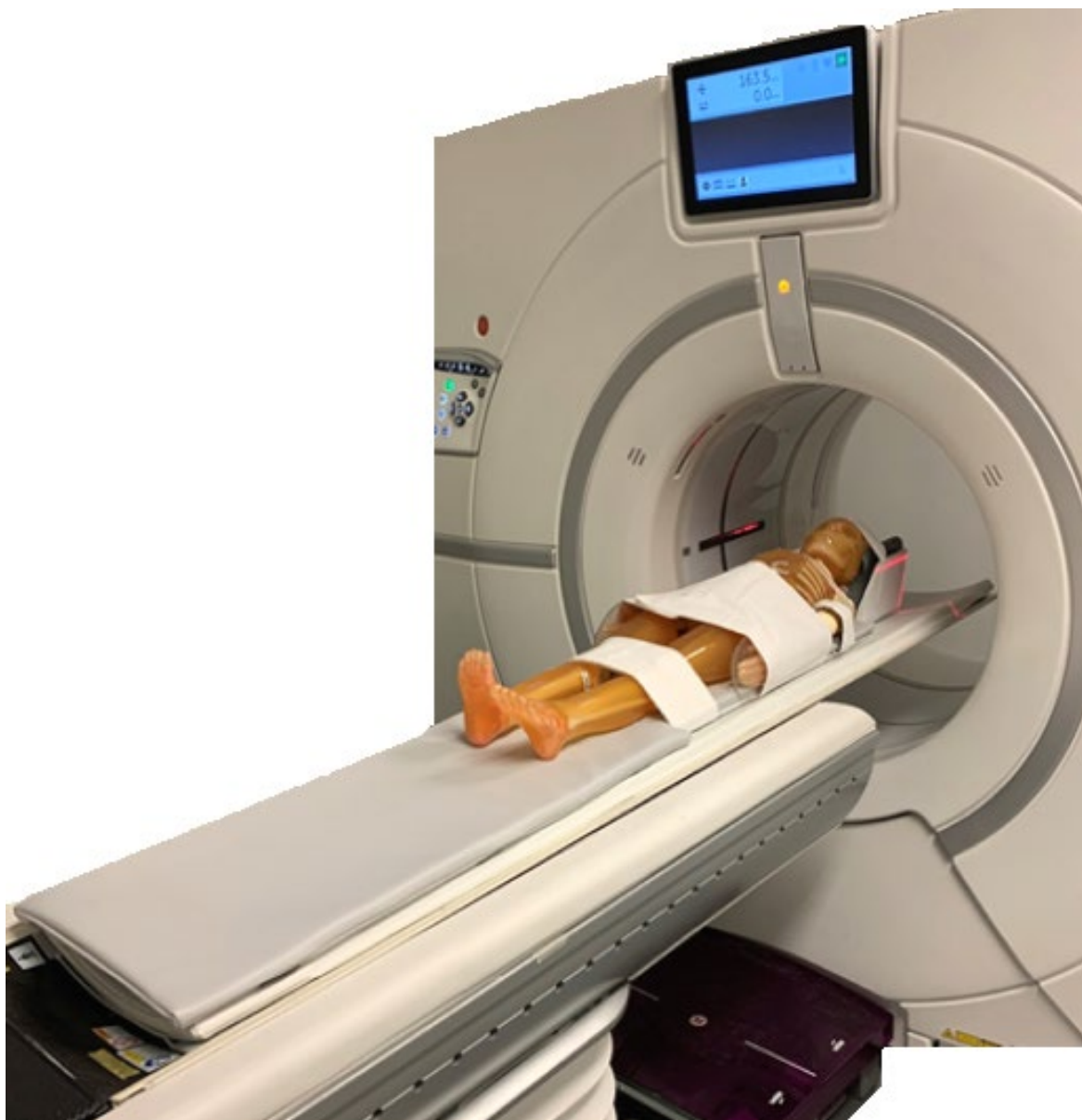

重要資訊

ZH-CN - E8003S GE CT 系統的兒童體位固定裝

en – E8003S CHILD POSITIONER FOR GE CT SYSTEMS
fr - E8003S Positionneur pour enfant pour systèmes CT de GE
de - E8003S Kinderpositionierer für GE CT-Systeme
it - E8003S Posizionatore da bambino per sistemi GE CT
es - E8003S Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE
el – E8003S Τοποθετητής παιδιού για συστήματα αξονικού τομογράφου GE CT
ga – E8003S Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT
pt-BR - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ja - E8003S GE CT システム用チャイルドポジショナ
bg - E8003S Детски позиционер за GE CT системи
zh - E8003S GE CT 系統的兒童體位固定裝置
hr - E8003S Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom
cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT
da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer
nl - E8003S Child Positioner voor GE CT Systemen
et - E8003S Lapse positsioneerija GE KT-süsteemidele
fi - E8003S Lasten asetin GE TT -järjestelmiä varten
mt – E8003S Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT
hu - E8003S Gyermek teströgzítő szett GE CT rendszerekhez
ko – E8003S GE CT 시스템 용 차일드 포지셔너
lv - E8003S Bērnu fiksators GE CT sistēmām
lt - E8003S Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms
no – E8003S Barneposisjonør for GE CT-systemer
pl - E8003S Pozycjoner pediatryczny do systemów TK firmy GE
pt - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ro - E8003S Pozitie pentru copii pentru sistemele GE CT
ru - E8003S Детский позиционер для систем GE CT
sr- E8003S Дечји позиционер за GE ЦТ системе
id - E8003S Positioner Anak untuk Sistem GE CT
sk - E8003S Detský polohovateľ pre CT systémy GE
sl - E8003S Komplet za nsramestitev otroka v GE CT
sv - E8003S Barnfixering för GE CT-system
tr - E8003S GE CT Sistemleri için Çocuk Konumlandırıcı
uk - E8003S Дитячий позиционер для систем GE CT
kk – E8003S GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы
vi – E8003S Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT



製造商：
Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 USA
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



不含
天然乳膠




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



警告：

本產品可能會使您暴露於化學物質，加利福尼亞州已知該化學物質可導致生殖危害。詳情請進入
www.P65Warnings.ca.gov。1-甲基吡咯烷酮（1-methyl-2-pyrrolidone，NMP）CAS：872-50-4，
EC：212-828-1

組件

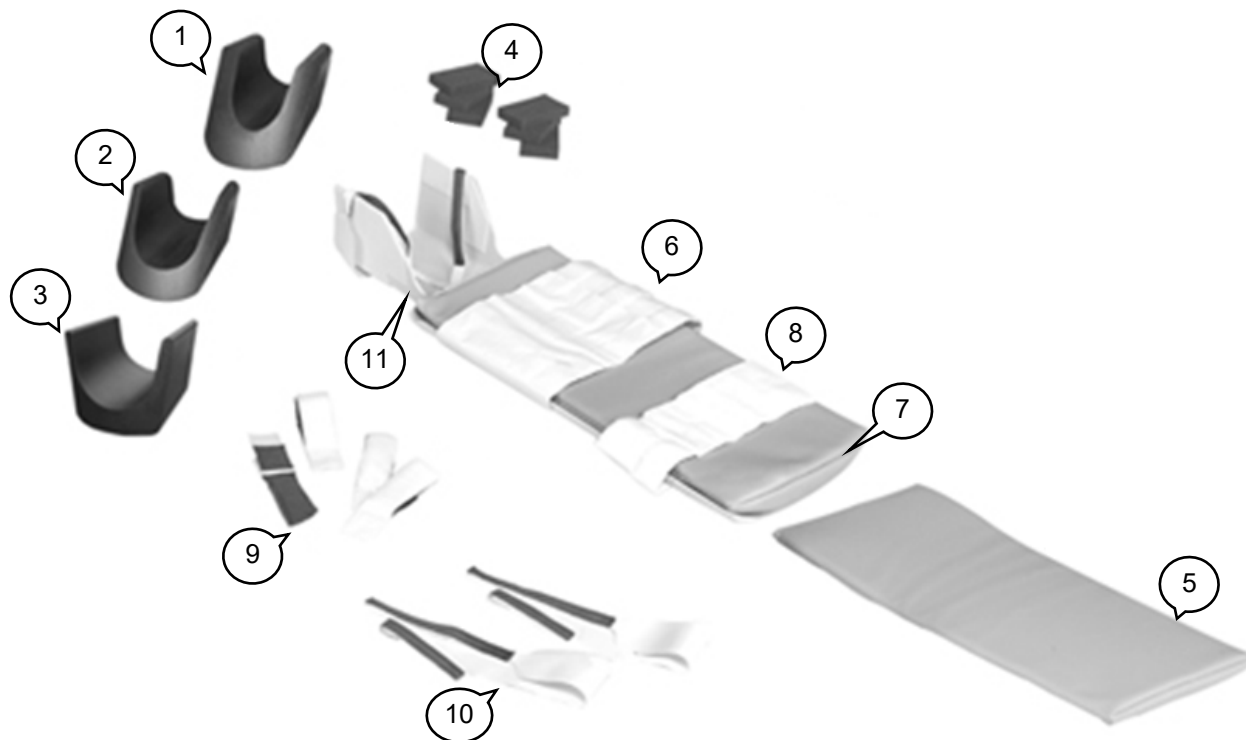

產品	零件編號	說明
1	28024	E8003SA CT 兒童頭枕——小號
2	28025	E8003SB CT 兒童頭枕——中號
3	28026	E8003SC CT 兒童頭枕——大號
4	20603	E8003DG 泡沫塊
5	28060	E8005BD 墊子，加長
6	23802	E8005AG 兒童身體固定帶，寬
7	28057	E8005AJ 兒童體位固定墊
8	28058	E8005AH 兒童身體固定帶——窄
9	26940	E8005BA 兒童手腕固定帶
10	23531	E8002BB 兒童頭部固定帶
11	21540	E8005AK 兒童體位固定支架

請注意：任何與使用該設備相關的嚴重事件，均應向製造商以及安裝該設備所在地的衛生權威/主管當局匯報。




警告！ 必須在讓患者躺在患者床板上之前，確保床板不會移動，以防患者摔下。



警告！ 在開始操作前，必須正確地將患者牢固安放在體位固定裝置中，還必須使用固定帶將體位固定裝置牢固地固定在操作台上，以防患者摔下。

設置


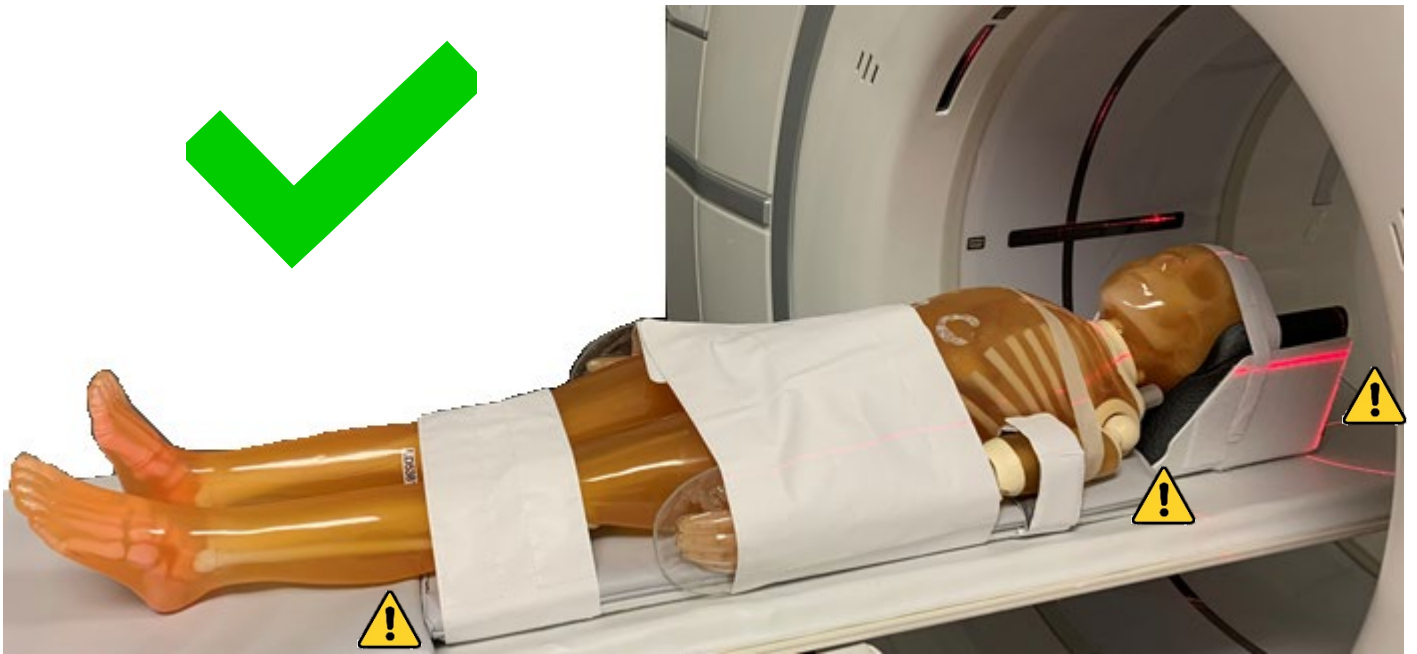




 警告！不要將希望檢查的身體部位安放在交接點之處。






應將體位固定裝置放在距離操作台末端 12 英寸或 30.5 厘米左右處，以確保操作台加長部分的門鎖不會干擾檢查。

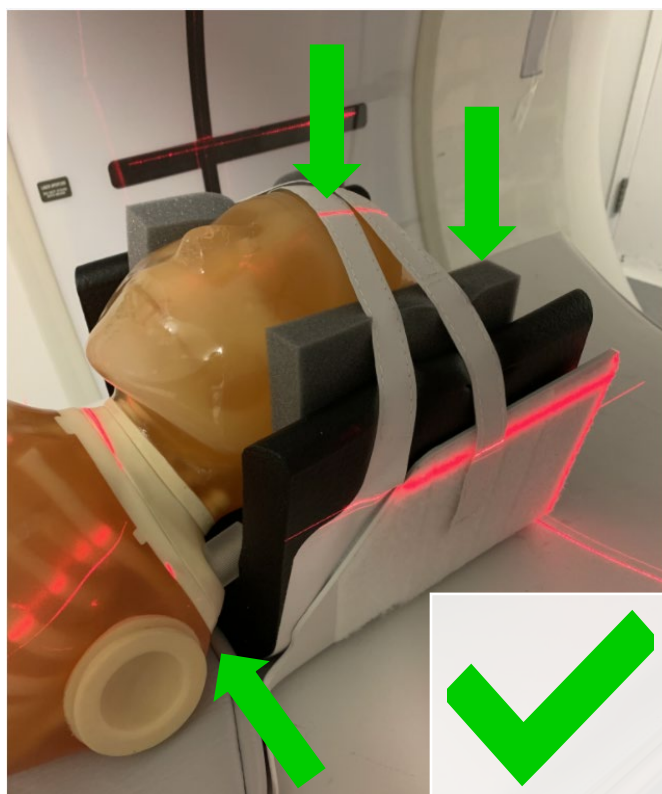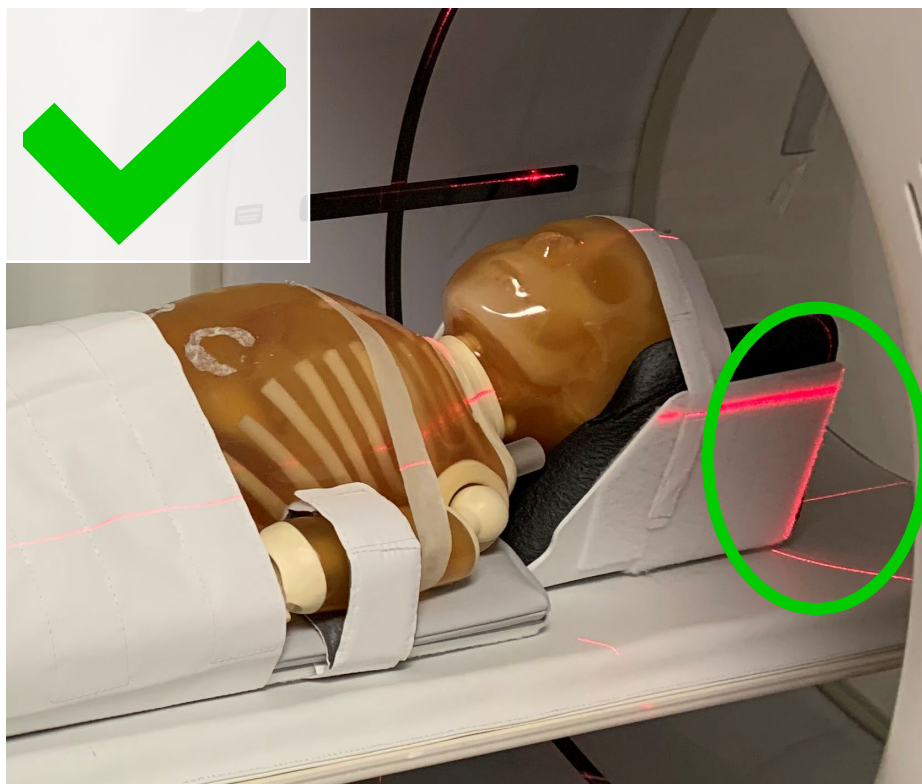

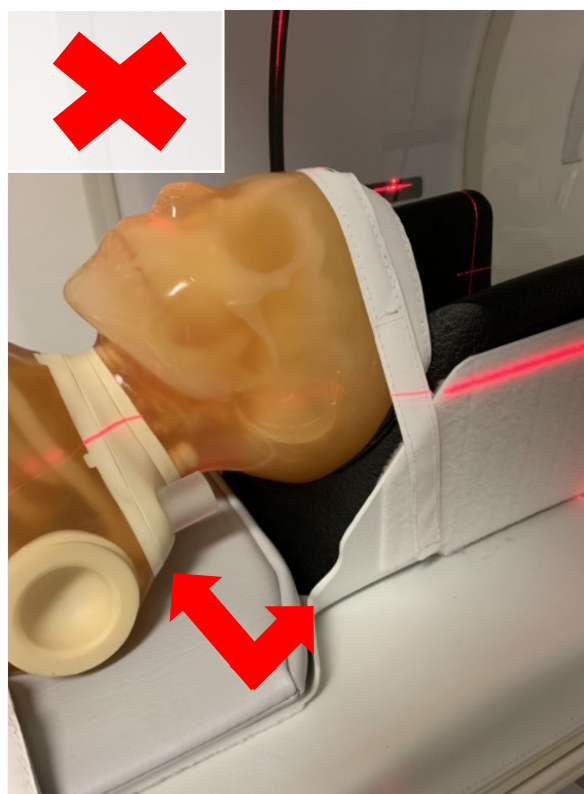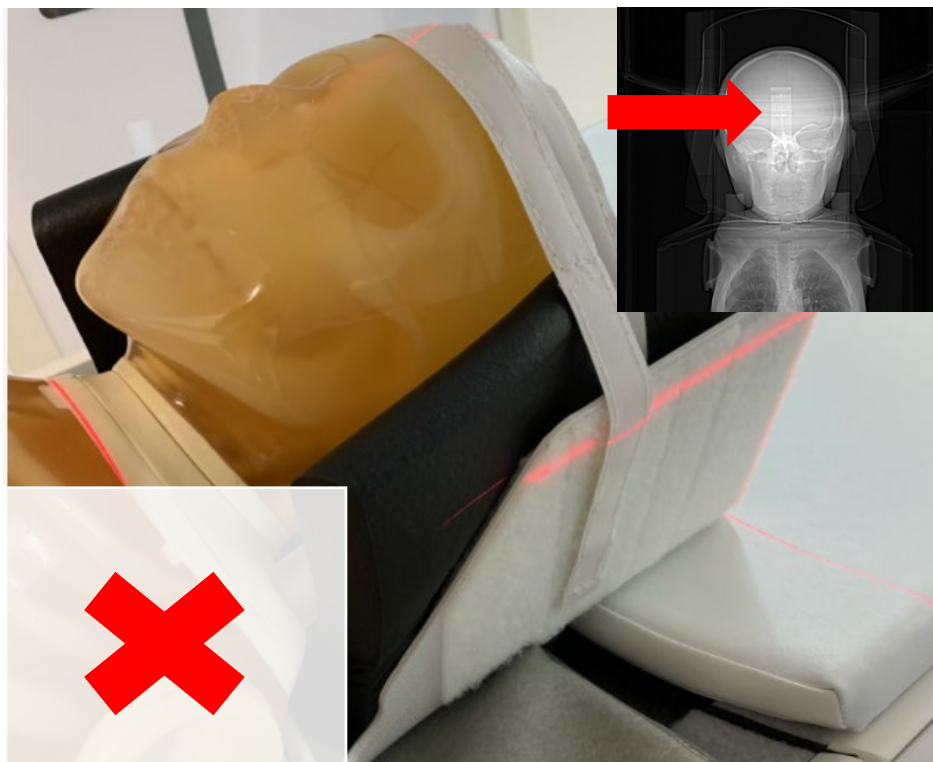

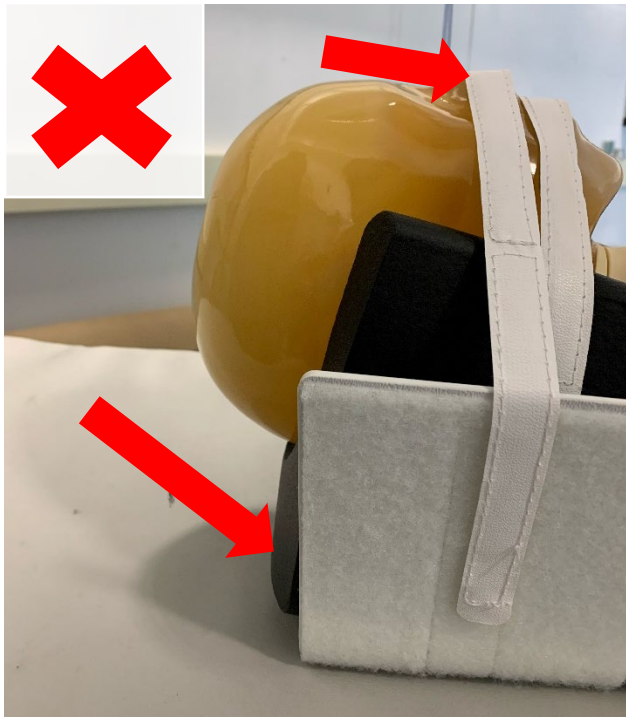

清潔與消毒

按照製造商的說明/依照當地設施的環境清潔做法，洗去污垢並為設備消毒，具體使用：

- 普通家用漂白劑——按 10:1 稀釋（消毒時間至少為 5 分鐘）
- PDI 生產的 Sani-Cloth® 漂白濕巾
- Clorox Healthcare® 生產的漂白殺菌濕巾
- Clorox Healthcare® 生產的漂白殺菌清潔噴劑
- Clorox Healthcare® 生產的過氧化氫清潔消毒濕巾
- Clorox® 多用途表面漂白清潔劑
- Medline 生產的 Micro-Kill 漂白殺菌漂白劑
- Medline 生產的 Micro-Kill 漂白殺菌漂白濕巾



警告！總是用清水沖洗產品，以洗去任何殘留的清潔/消毒劑。未做到這一點可能導致患者受傷。