


Positioneringsenhed til børn til systemerne: Premier, Voyager, Explorer Brugsanvisning



da - E8823MR Positioneringsenhed til børn Til systemerne: Premier, Voyager, Explorer

en - E8823MR Child Positioner For Use With Systems: Premier, Voyager, Explorer
fr - E8823MR Positionneur pour enfant pour systèmes : Premier, Voyager, Explorer
de - E8823MR Kinderpositionierer zur Verwendung mit Systemen: Premier, Voyager, Explorer
it - E8823MR Posizionatore da bambino per l'uso con i sistemi: Premier, Voyager, Explorer
es - E8823MR Posicionador infantil para usar con los sistemas: Premier, Voyager, Explorer
el - E8823MR Τοποθετητής παιδιού για χρήση με τα συστήματα: Premier, Voyager, Explorer
ga - E8823MR Socraitheoir Páiste le húsáid in éineacht le Córais: Premier, Voyager, Explorer
pt-BR - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
ZH - E8823MR 兒童體位固定裝置 - 適用系統 : Premier、Voyager、Explorer
ja - E8823MR Premier、Voyager、Explorer システム対応 チャイルドポジショナー
bg - E 8823MR Детски позиционер за използване със системи: Premier, Voyager, Explorer
zh - E8823MR 兒童體位固定裝置 - 適用系統 : Premier、Voyager、Explorer
hr - E8823MR Dječja kolijevka za uporabu sa sustavima: Premier, Voyager, Explorer
cs - E8823MR Dětská kolébka Kit Pro použití se systémy: Premier, Voyager, Explorer
nl - Child Positioner voor gebruik met: Premier, Voyager, Explorer systemen
et - Lapse positsioneerija süsteemidele Premier, Voyager, Explorer
fi - E8823MR Lasten asetin käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa: Premier, Voyager, Explorer
mt - E8823MR Pożizzjonatur tat-Tfal biex jintuza mas-Sistemi: Premier, Voyager, Explorer
hu - E8823MR Gyermek test rögzítő, amely az alábbi rendszerekkel használható: Premier, Voyager, Explorer
ko - E8823MR 자식 포지셔너시스템과 함께 사용하기 위해: Premier, Voyager, Explorer
lv - E8823MR Bērnu fiksators lietošanai ar sistēmām: Premier, Voyager, Explorer
lt - E8823MR Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas naudoti su sistemomis „Premier“, „Voyager“, „Explorer“
no - E8823MR Underordnet stillingsstiller For bruk med systemer: Premier, Voyager, Explorer
pl - E8823MR Pozycjoner pediatryczny do użytku z systemami: Premier, Voyager, Explorer
pt - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
ro - E8823MR Kit de leagăn pediatric pentru utilizare cu sisteme: Premier, Voyager, Explorer
ru - E8823MR Детский позиционер для использования с системами: Premier, Voyager, Explorer
sr - E8823MR Дечији позиционер За употребу са системима: Premier, Voyager, Explorer
id - E8823MR Posisi anak Untuk Digunakan dengan Sistem: Premier, Voyager, Explorer
sk - E8823MR Detský polohovateľ na použitie so systémami: Premiér, Voyager, Explorer
sl - E8823MR Komplet za namestitvev otroka v sistemih: Premier, Voyager, Explorer
sv - E8823MR Barnfixering för användning med systemen: Premier, Voyager, Explorer
tr - E8823MR Alt konumlayıcı Sistemlerle Kullanım İçin: Premier, Voyager, Explorer
uk - E8823MR Дочірній позиціонер Для використання з системами: Premier, Voyager, Explorer
kk - E8823MR Premier, Voyager, Explorer жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткішті пайдалану жөніндегі нұсқаулық
vi - E8823MR Thiết bị Cố định Trẻ em để sử dụng với các Hệ thống: Premier, Voyager, Explorer

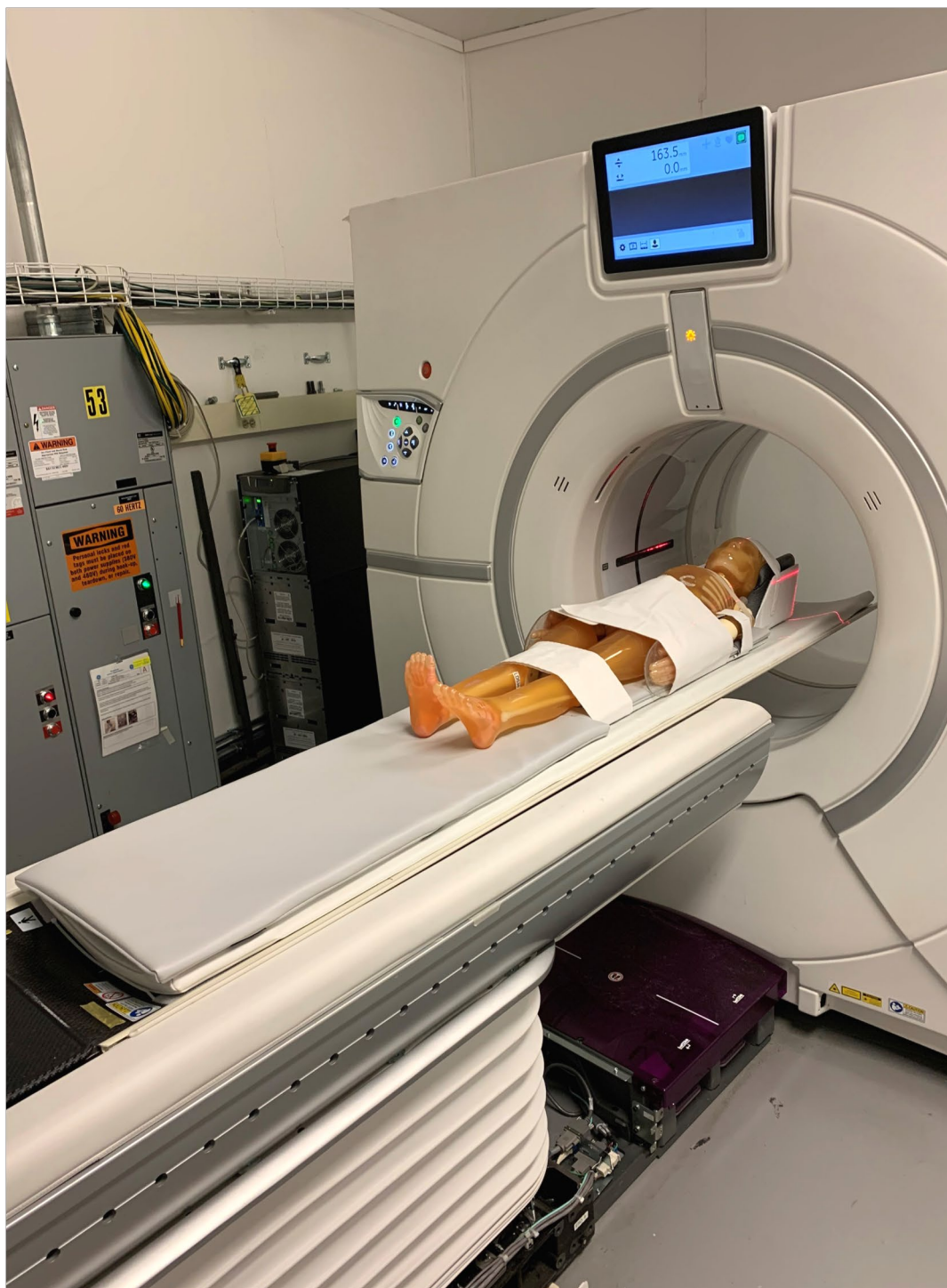

Fremstillet af:
Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 USA
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu




Ikke fremstillet
med
Naturlig
gummilatex




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



Advarsel:

Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, som er kendt af staten Californien for at forårsage reproduktionsskade. For mere information, gå til www.P65Warnings.ca.gov 1-methyl-2-pyrrolidon (NMP) CAS: 872-50-4, EF: 212-828-1; Trixylylphosphat (TXP) CAS: 25155-23-1, EF: 246-677-8

Komponenter

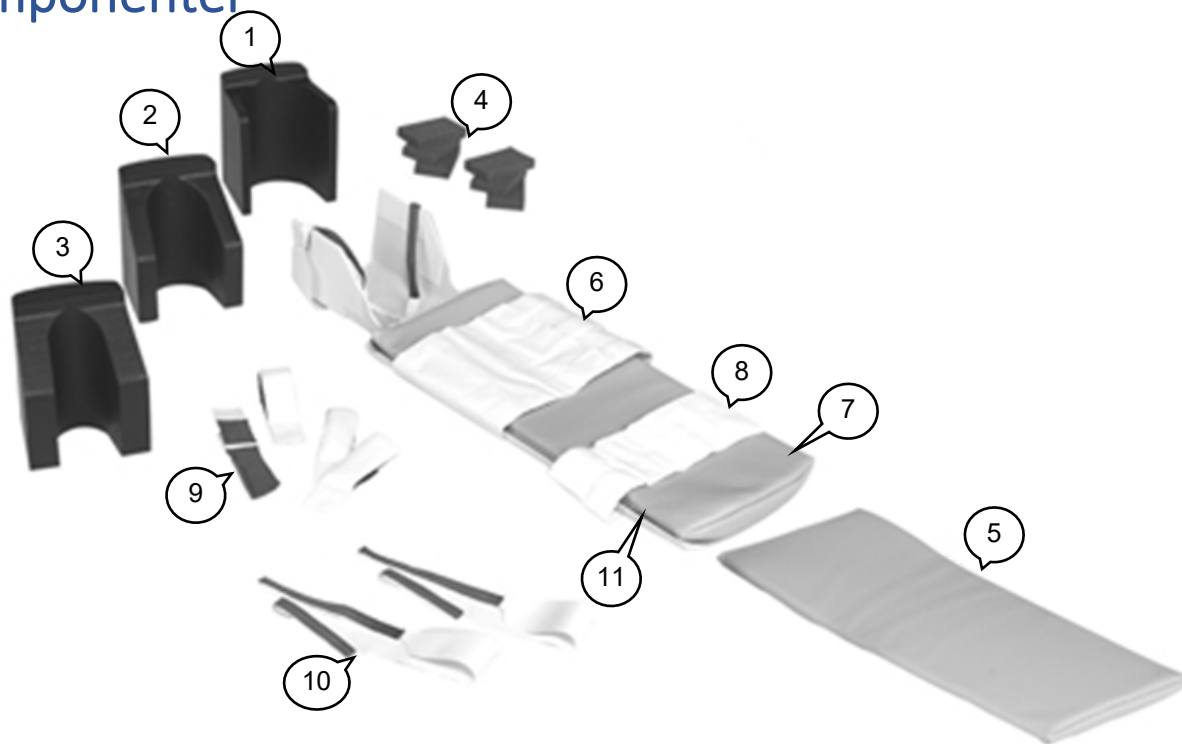

Vare	Varenummer	Beskrivelse
1	21349	E8005AN MR/NUC Hovedstøtte til børn, Stor
2	21350	E8005AM MR/NUC Hovedstøtte til børn, Medium
3	21351	E8005AL MR/NUC Hovedstøtte til børn, Lille
4	20603	E8003DG Skumblok
5	28060	E8005BD Pude, Forlænger
6	23802	E8005AG Positioneringsenhed til børn Kropsrem, bred
7	28057	E8005AJ Positioneringspude til børn
8	28058	E8005AH Positioneringskropsrem til børn- Smal
9	26940	E8005BA Positionerings håndledsremme til børn
10	23531	E8002BB Positionerings hovedstropper til børn
11	21540	E8005AK Positionerings vugge til børn

Bemærk: Enhver alvorlig hændelse relateret til brugen af denne enhed skal rapporteres til producenten og sundhedsmyndigheden/den myndighed, hvor enheden er installeret.




Advarsel! Patientbriksen skal være stabil inden patienten stiger op, så man undgår, at patienten falder ned.



Advarsel! Inden proceduren påbegyndes, skal patienten fastgøres korrekt. Positioneringsenheden skal fastgøres til bordet med stropperne for, at forhindre patienten i at falde ned


Opsætning


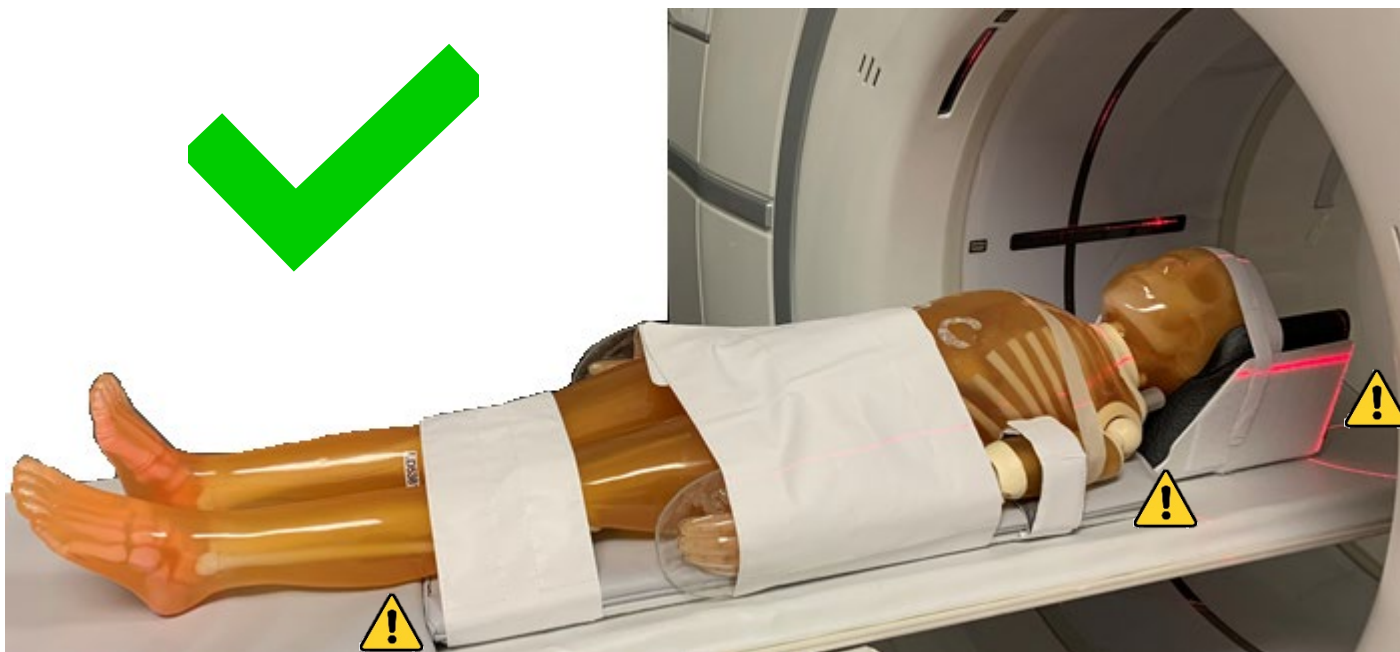



Advarsel! Sørg for at patientens krop ligger inde for de angivne felter.



Positioneringsenheden skal være ca. ~ 12in eller ~ 30,5cm fra enden af bordet, så der ikke er nogen interferens fra bordforlænger låsen.

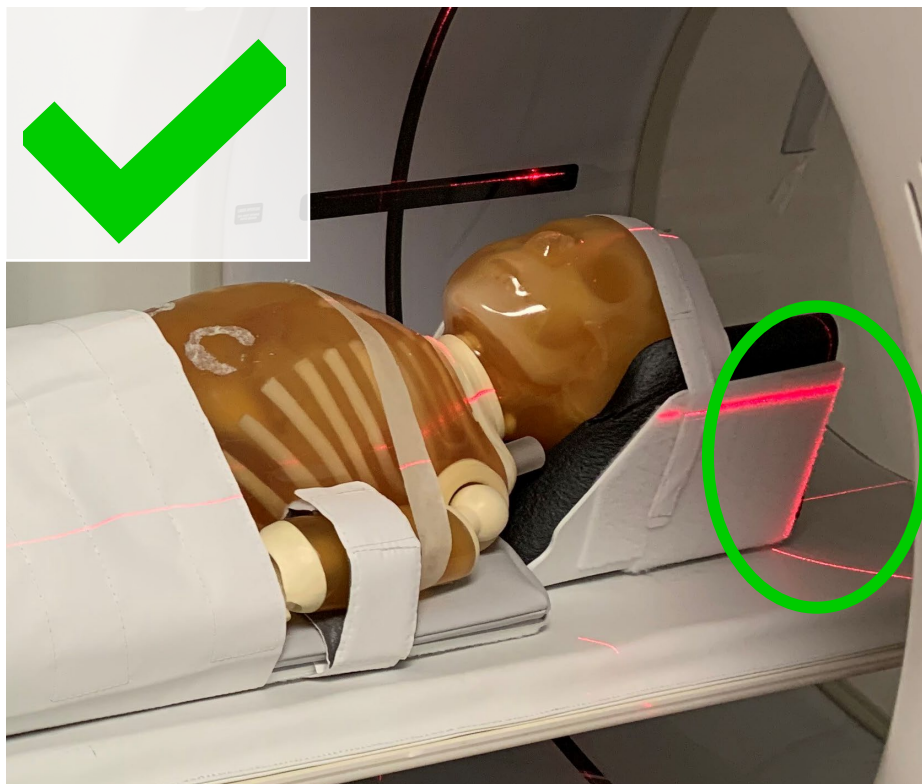

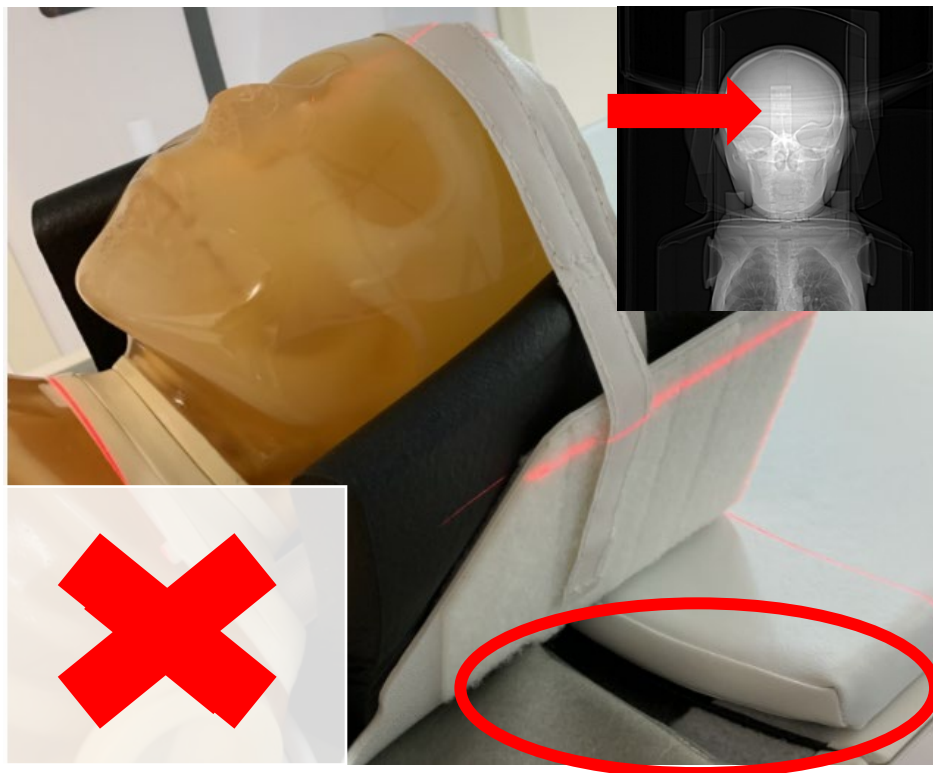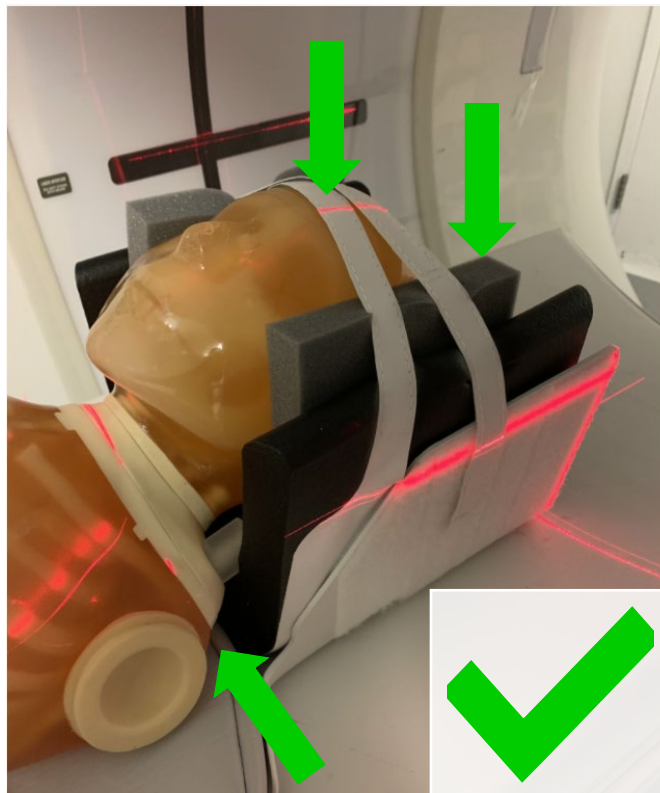

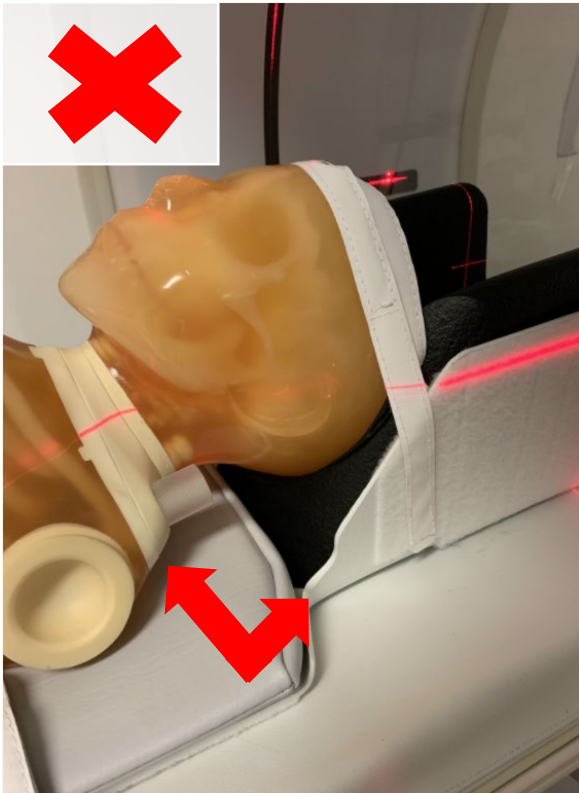

Rengøring og desinfektion

Rengør ved at fjerne snavs og desinficer i henhold til producentens instruktioner/i henhold til lokale rengøringsmetoder for miljøet via:

- Almindeligt husholdningsblegemiddel - fortyndet 10:1 (mindst 5 minutters desinfektionstid)
- Sani-Cloth® bakteriedræbende servietter med blegemiddel fra PDI
- Bakteriedræbende servietter med blegemiddel fra Clorox Healthcare®
- Bakteriedræbende rengøringspray med blegemiddel fra Clorox Healthcare®
- Rengøringsservietter med hydrogenperoxid fra Clorox Healthcare®
- Clorox® Multi overfladerenser med blegemiddel
- Micro-Kill Bleach bakteriedræbende blegemiddelopløsning fra Medline
- Micro-Kill Bleach bakteriedræbende servietter med blegemiddel fra Medline



Advarsel! Skyl ALTID produkterne med rent vand, så du får fjernet rester fra rengørings/desinfektionsopløsningen. Manglende overholdelse kan medføre patientskade.