

Lasten asetin käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa: Premier, Voyager, Explorer Käyttöohjeet



fi- E8823MR Lasten asetin käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa: Premier, Voyager, Explorer



en - E8823MR Child Positioner For Use With Systems: Premier, Voyager, Explorer
fr - E8823MR Positionneur pour enfant pour systèmes : Premier, Voyager, Explorer
de - E8823MR Kinderpositionierer zur Verwendung mit Systemen: Premier, Voyager, Explorer
it - E8823MR Posizionatore da bambino per l'uso con i sistemi: Premier, Voyager, Explorer
es - E8823MR Posicionador infantil para usar con los sistemas: Premier, Voyager, Explorer
el - E8823MR Τοποθετητής παιδιού για χρήση με τα συστήματα: Premier, Voyager, Explorer
ga - E8823MR Socraitheoir Páiste le húsáid in éineacht le Córais: Premier, Voyager, Explorer
pt-BR - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
ZH - E8823MR 兒童體位固定裝置 - 適用系統 : Premier, Voyager, Explorer
ja - E8823MR Premier、Voyager、Explorer システム対応 チャイルドポジショナー
bg - E 8823MR Детски позиционер за използване със системи: Premier, Voyager, Explorer
zh - E8823MR 兒童體位固定裝置 - 適用系統 : Premier, Voyager, Explorer
hr - E8823MR Dječja kolijevka za uporabu sa sustavima: Premier, Voyager, Explorer
cs - E8823MR Dětská kolébka Kit Pro použití se systémy: Premier, Voyager, Explorer
da - E8823MR Positioneringsenhed til børn til systemerne: Premier, Voyager, Explorer
nl - Child Positioner voor gebruik met: Premier, Voyager, Explorer systemen
et - Lapse positioneerija süsteemidele Premier, Voyager, Explorer
mt - E8823MR Pożizzjonatur tat-Tfal biex jintuża mas-Sistemi: Premier, Voyager, Explorer
hu - E8823MR Gyermek test rögzítő, amely az alábbi rendszerekkel használható: Premier, Voyager, Explorer
ko - E8823MR 자식 포지셔너시스템과 함께 사용하기 위해: Premier, Voyager, Explorer
lv - E8823MR Bērnu fiksators lietošanai ar sistēmām: Premier, Voyager, Explorer
lt - E8823MR Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas naudoti su sistemomis „Premier“, „Voyager“, „Explorer“
no - E8823MR Underordnet stillingsstiller For bruk med systemer: Premier, Voyager, Explorer
pl - E8823MR Pozycjoner pediatryczny do użytku z systemami: Premier, Voyager, Explorer
pt - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
ro - E8823MR Kit de leagăn pediatric pentru utilizare cu sisteme: Premier, Voyager, Explorer
ru - E8823MR Детский позиционер Для использования с системами: Premier, Voyager, Explorer
sr - E8823MR Дечији позиционер За употребу са системима: Premier, Voyager, Explorer
id - E8823MR Posisi anak Untuk Digunakan dengan Sistem: Premier, Voyager, Explorer
sk - E8823MR Detský polohovateľ na použitie so systémami: Premiér, Voyager, Explorer
sl - E8823MR Komplet za namestitvev otroka v sistemih: Premier, Voyager, Explorer
sv - E8823MR Barnfixering för användning med systemen: Premier, Voyager, Explorer
tr - E8823MR Alt konumlayıcı Sistemlerle Kullanım İçin: Premier, Voyager, Explorer
uk - E8823MR Дочірній позиціонер Для використання з системами: Premier, Voyager, Explorer
kk - E8823MR Premier, Voyager, Explorer жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткішті пайдалану жөніндегі нұсқаулық
vi - E8823MR Thiết bị Cố định Trẻ em để sử dụng với các Hệ thống: Premier, Voyager, Explorer



Valmistaja:
Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 USA
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Ei valmistettu
luonnonkumilateksista



Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



VAROITUS:


Tämä tuote voi altistaa käyttäjän kemikaaleille, joiden tiedetään Kalifornian osavaltiossa aiheuttavan lisääntymisvaurioita. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov. 1-metyyli-2-pyrrolidoni (NMP) CAS: 872-50-4, EY: 212-828-1; Trioksisilylfosfaatti (TXP) CAS: 25155-23-1, EY: 246-677-8

28634-303-000 Käyttöohjeet lasten asettimelle käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa: Premier-, Voyager-, Explorer

Julkaisupäivä: 25JUN2021

Sivu 2 / 8

Komponentit

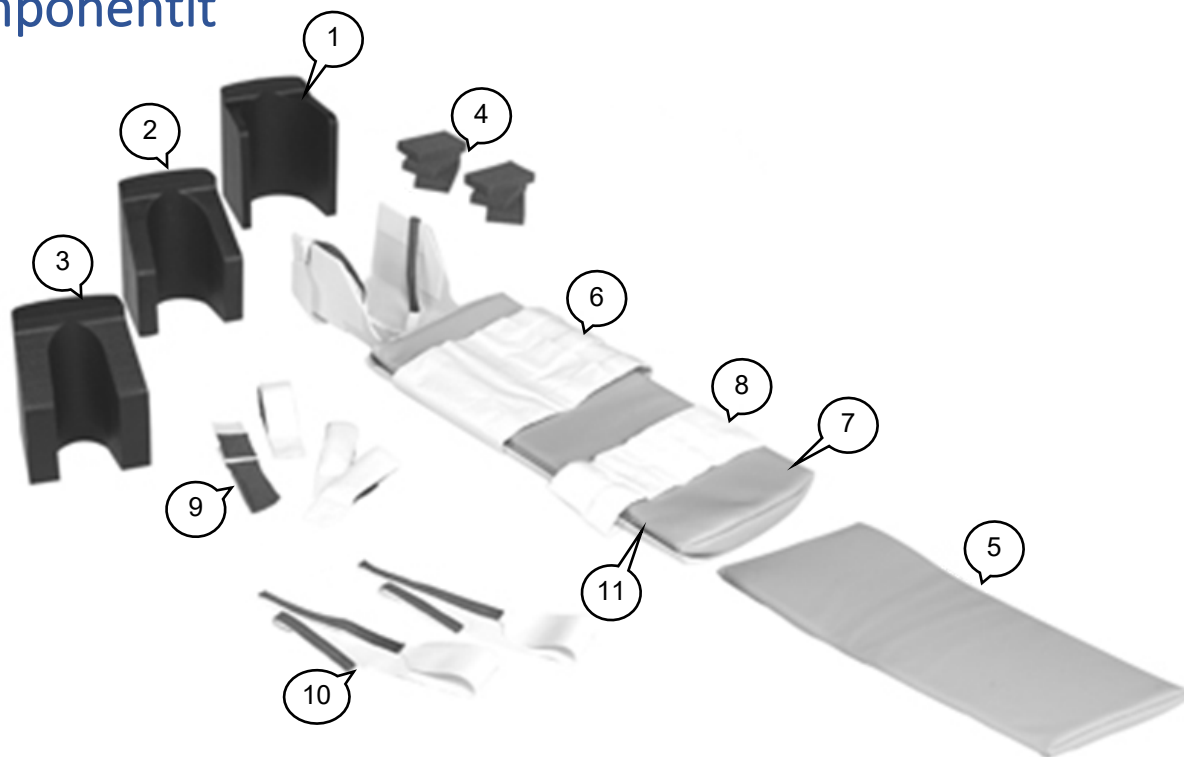

Tuote	Osa numero	Kuvaus
1	21349	E8005AN MR/NUC Lasten päätyosa, iso
2	21350	E8005AM MR/NUC Lasten pääosa, keskikokoinen
3	21351	E8005AL MR/NUC Lasten pääosa, pieni
4	20603	E8003DG Vahtomuovikappale
5	28060	E8005BD Tyyny, jatke
6	23802	E8005AG Lasten asettimen vartalohihna, leveä
7	28057	E8005AJ Lasten asettimen tyyny
8	28058	E8005AH Lasten asettimen vartalohihna, kapea
9	26940	E8005BA Lasten asettimen rannehihnat
10	23531	E8002BB Lapsen asennoittimen päähihnat
11	21540	E8005AK Lasten asetinteline

Huomaa: Kaikista laitteen käyttöön liittyvistä vakavista tapahtumista on ilmoitettava valmistajalle ja terveysviranomaiselle sekä toimivaltaiselle viranomaiselle maassa, jossa laite on asennettu.




Varoitus! Potilaspöydän on oltava vakaa ennen potilaan asettamista potilaan putoamisen estämiseksi.



Varoitus! Ennen toimenpiteen aloittamista potilas on kiinnitettävä asianmukaisesti asettimeen ja asetin on kiinnitettävä pöydälle hihnoilla potilaan putoamisen estämiseksi.


Asetus


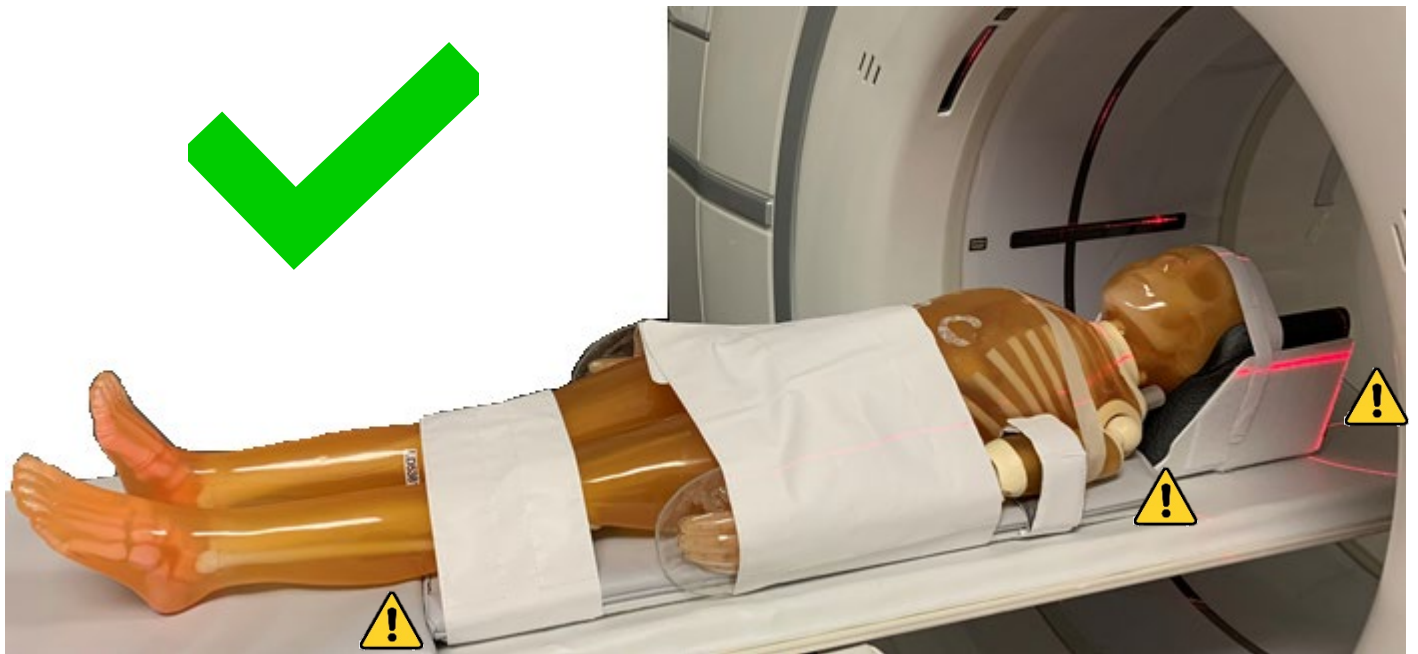



Varoitus! Älä sijoita mielenkiintoista anatomiaa risteysten päälle.



Asettimen tulisi olla noin ~ 12 tuumaa tai ~ 30,5 cm pöydän päästä, jotta pöydän jatkeen salpa ei häiritse.

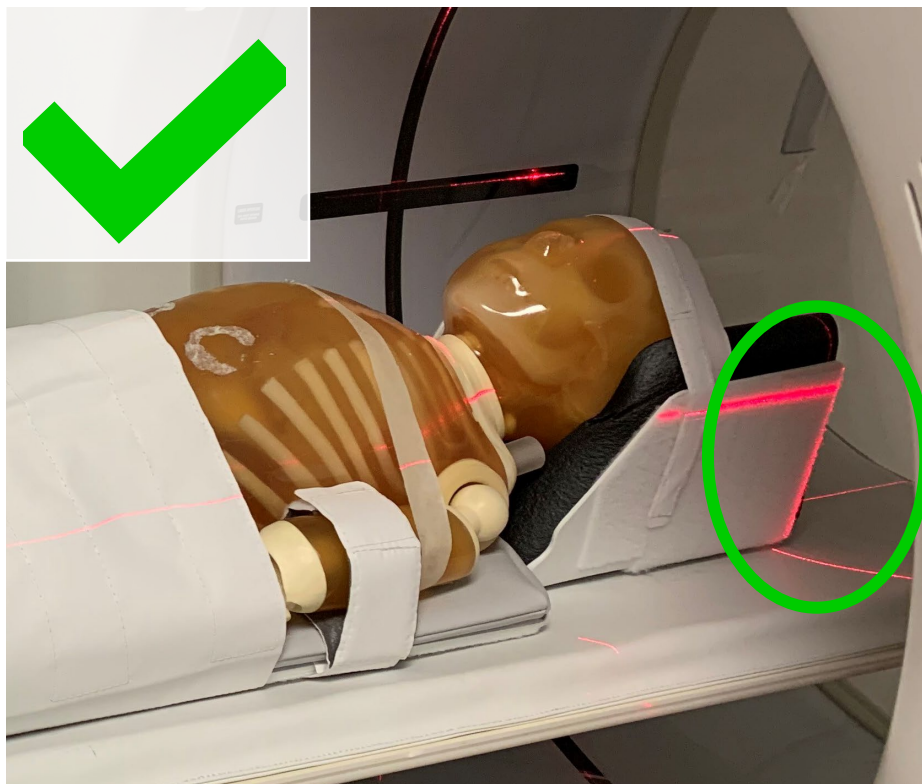

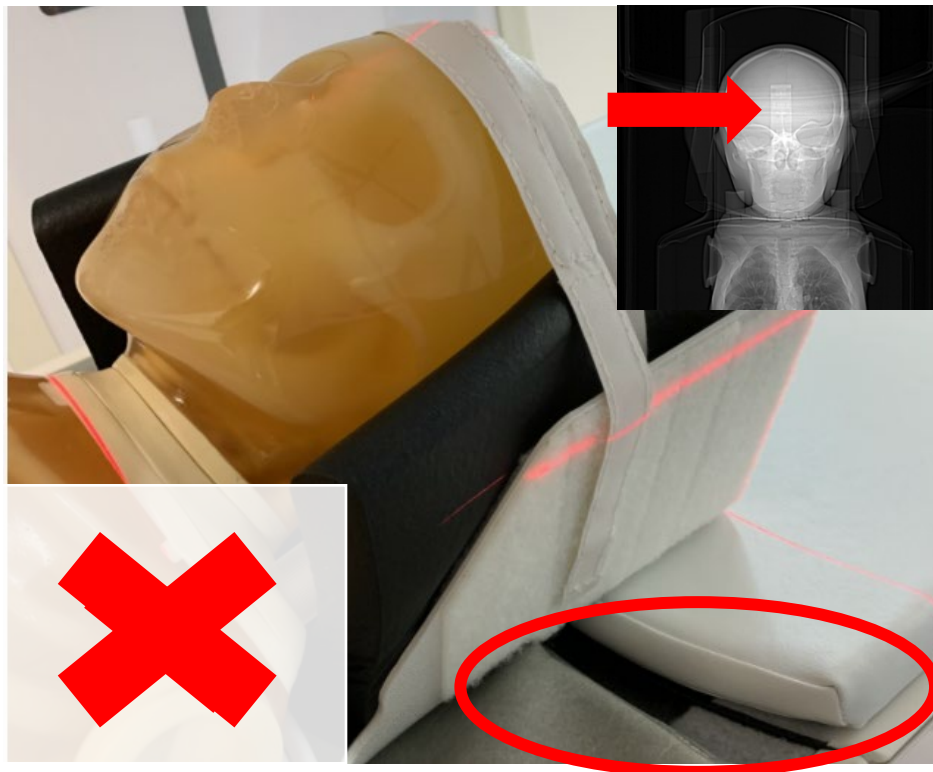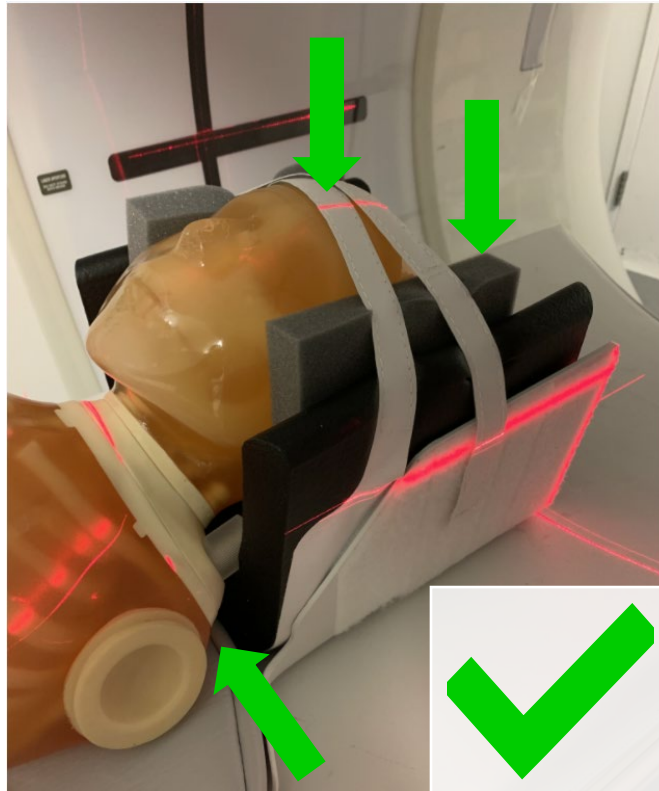

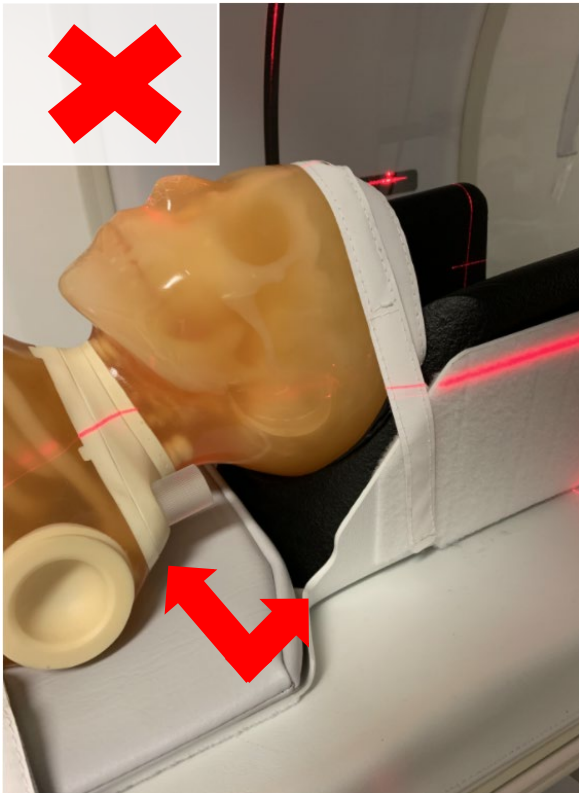

Puhdistus ja desinfiointi

Puhdista poistamalla lika ja desinfioi valmistajan ohjeiden mukaan tai paikallisten ympäristöpuhdistuskäytäntöjen mukaisesti käyttäen:

- Yleistä kotitalouksien valkaisuainetta – laimennettu 10:1 (Vähintään 5 minuutin desinfiointiaika)
- Sani-Cloth® valkaisupyyhkeet PDI:ltä
- Bleach Germicidal Wipes Clorox Healthcare® -yhtiöltä
- Bleach Germicidal Cleaner Spray Clorox Healthcare® -yhtiöltä
- Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectant Wipes Clorox Healthcare® -yhtiöltä
- Clorox® -monipintapuhdistusaine, jossa on valkaisuainetta
- Micro-Kill Bleach Germicidal Bleach Solution Medline-yhtiöltä
- Micro-Kill Bleach Germicidal Bleach Wipes Medline-yhtiöltä



Varoitus! Huuhtelee tuotteet AINA puhtaalla vedellä jäänteiden poistamiseksi puhdistus- tai desinfiointiliuoksesta. Jos näin ei tehdä, potilas voi loukkaantua.