

Socraitheoir Páiste le húsáid in éineacht le Córais: Premier, Voyager, Explorer Treoracha Úsáide



ga – E8823MR Socraitheoir Páiste le húsáid in éineacht le Córais: Premier, Voyager, Explorer

en - E8823MR Child Positioner

For Use With Systems: Premier, Voyager, Explorer

fr - E8823MR Positionneur pour enfant pour systèmes : Premier, Voyager, Explorer

de - E8823MR Kinderpositionierer zur Verwendung mit Systemen: Premier, Voyager, Explorer

it - E8823MR Posizionatore da bambino per l'uso con i sistemi: Premier, Voyager, Explorer

es - E8823MR Posicionador infantil para usar con los sistemas: Premier, Voyager, Explorer

el - E8823MR Τοποθετητής παιδιού για χρήση με τα συστήματα: Premier, Voyager, Explorer

pt-BR - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer

ZH - E8823MR 兒童體位固定裝置 - 適用系統 : Premier、Voyager、Explorer

ja - E8823MR Premier、Voyager、Explorer システム対応 チャイルドポジショナー

bg - E 8823MR Детски позиционер за използване със системи: Premier, Voyager, Explorer

zh - E8823MR 兒童體位固定裝置 - 適用系統 : Premier、Voyager、Explorer

hr - E8823MR Dječja kolijevka za uporabu sa sustavima: Premier, Voyager, Explorer

cs - E8823MR Dětská kolébka Kit Pro použít se systémy: Premier, Voyager, Explorer

da - E8823MR Positioneringsenhed til børn til systemerne: Premier, Voyager, Explorer

nl - Child Positioner voor gebruik met: Premier, Voyager, Explorer systemen

et - Lapse positsioneerija süsteemidele Premier, Voyager, Explorer

fi - E8823MR Lasten asetin käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa: Premier, Voyager, Explorer

mt - E8823MR Pożizzjonatur tat-Tfal biex jintuza mas-Sistemi: Premier, Voyager, Explorer

hu - E8823MR Gyermek test rögzítő, amely az alábbi rendszerekkel használható: Premier, Voyager, Explorer

ko - E8823MR 자식 포지셔너시스템과 함께 사용하기 위해: Premier, Voyager, Explorer

lv - E8823MR Bērnu fiksators lietošanai ar sistēmām: Premier, Voyager, Explorer

lt - E8823MR Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas naudoti su sistemomis „Premier“, „Voyager“, „Explorer“

no - E8823MR Underordnet stillingsstiller For bruk med systemer: Premier, Voyager, Explorer

pl - E8823MR Pozycjoner pediatryczny do użytku z systemami: Premier, Voyager, Explorer

pt - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer

ro - E8823MR Kit de leagăn pediatric pentru utilizare cu sisteme: Premier, Voyager, Explorer

ru - E8823MR Детский позиционер Для использования с системами: Premier, Voyager, Explorer

sr - E8823MR Дечији позиционер За употребу са системима: Premier, Voyager, Explorer

id - E8823MR Posisi anak Untuk Digunakan dengan Sistem: Premier, Voyager, Explorer

sk - E8823MR Detský polohovateľ na použitie so systémami: Premiér, Voyager, Explorer

sl - E8823MR Komplet za namestitev otroka v sistemih: Premier, Voyager, Explorer

sv - E8823MR Barnfixering för användning med systemen: Premier, Voyager, Explorer

tr - E8823MR Alt konumlayıcı Sistemlerle Kullanım İçin: Premier, Voyager, Explorer

uk - E8823MR Дочірній позиціонер Для використання з системами: Premier, Voyager, Explorer

kk - E8823MR Premier, Voyager, Explorer жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткішті пайдалану жөніндегі нұсқаулық

vi - E8823MR Thiết bị Cố định Trẻ em để sử dụng với các Hệ thống: Premier, Voyager, Explorer



Déanta Ag:

Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 USA
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Ní Dhéantar Le
Laitéis Rubair
Nádúrtha




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



AIRE:

D'fhéadfadh an táirge seo thú a fhágáil gan chosaint ar cheimiceáin a dhéanann dochar ar an gcóras atáirgthe, agus is eol do Stát Chailifornia. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach www.P65Warnings.ca.gov. 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP) CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1; Trixylyl phosphate (TXP) CAS: 25155-23-1, EC: 246-677-8

Comhpháirteanna

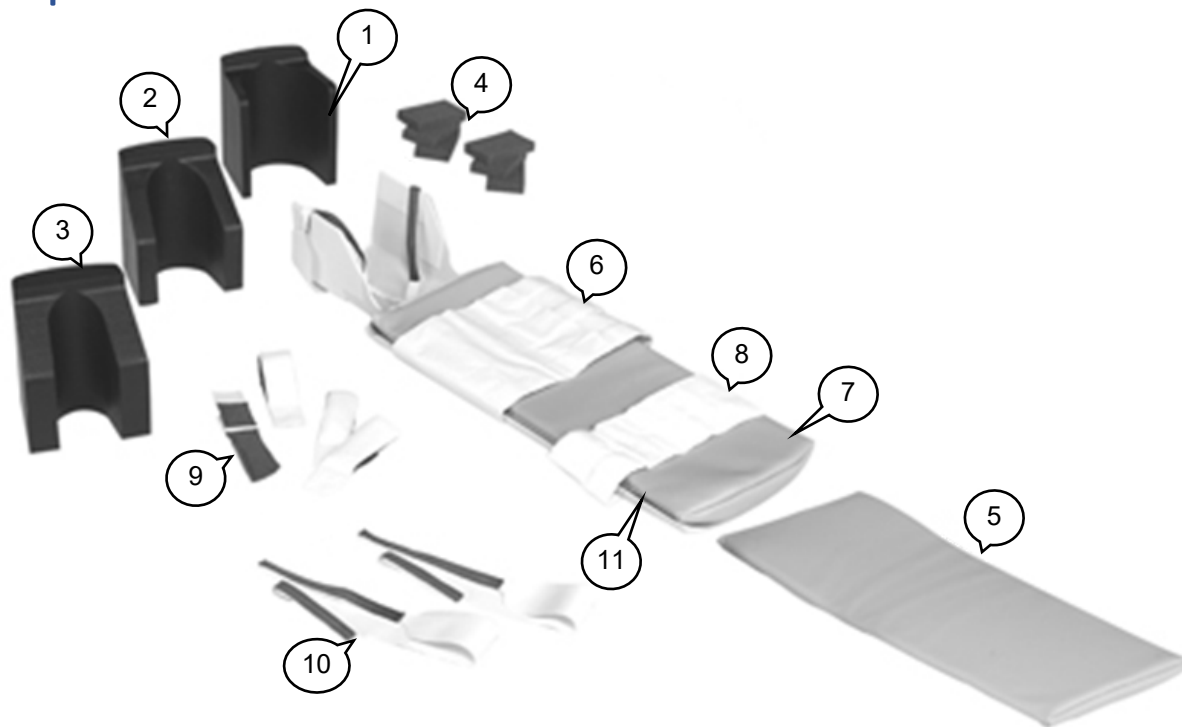

Ball	Uimhir Chomhpháirte	Cur Síos
1	21349	E8005AN MR/NUC Ionsáiteán Cinn Páiste, Mór
2	21350	E8005AM MR/NUC Ionsáiteán Cinn Páiste, Meánach
3	21351	E8005AL MR/NUC Ionsáiteán Cinn Páiste, Beag
4	20603	E8003DG Bloc Cúir
5	28060	E8005BD Ceap, Síneadh
6	23802	E8005AG Strapa Coirp Shocraitheoir Páiste, Leathan
7	28057	E8005AJ Ceap Shocraitheoir Páist
8	28058	E8005AH Strapa Coirp Shocraitheoir Páiste - Caol
9	26940	E8005BA Strapaí Rosta Shocraitheoir Páiste
10	23531	E8002BB Strapaí Cinn Shocraitheoir Páiste
11	21540	E8005AK Cliabhán Shocraitheoir Páiste

Tabhair faoi deara: Ba cheart go dtuairiscítear aon eachtra throm a bhaineann le húsáid an táirge don déantóir agus d'údarás sláinte/údarás inniúil ina bhfuil an táirge.




Aire! Ní mór go mbeadh an clár othair daingean roimh lódáil an othair ionas nach dtitfidh an t-othar.



Aire! Roimh thosach an ghnáis, ní mór go ndaingnítear an t-othar i gceart sa socraitheoir, agus ní mór go ndaingnítear an socraitheoir ar bhord le strapaí ionas nach dtitfidh an t-othar.


Cumraíocht


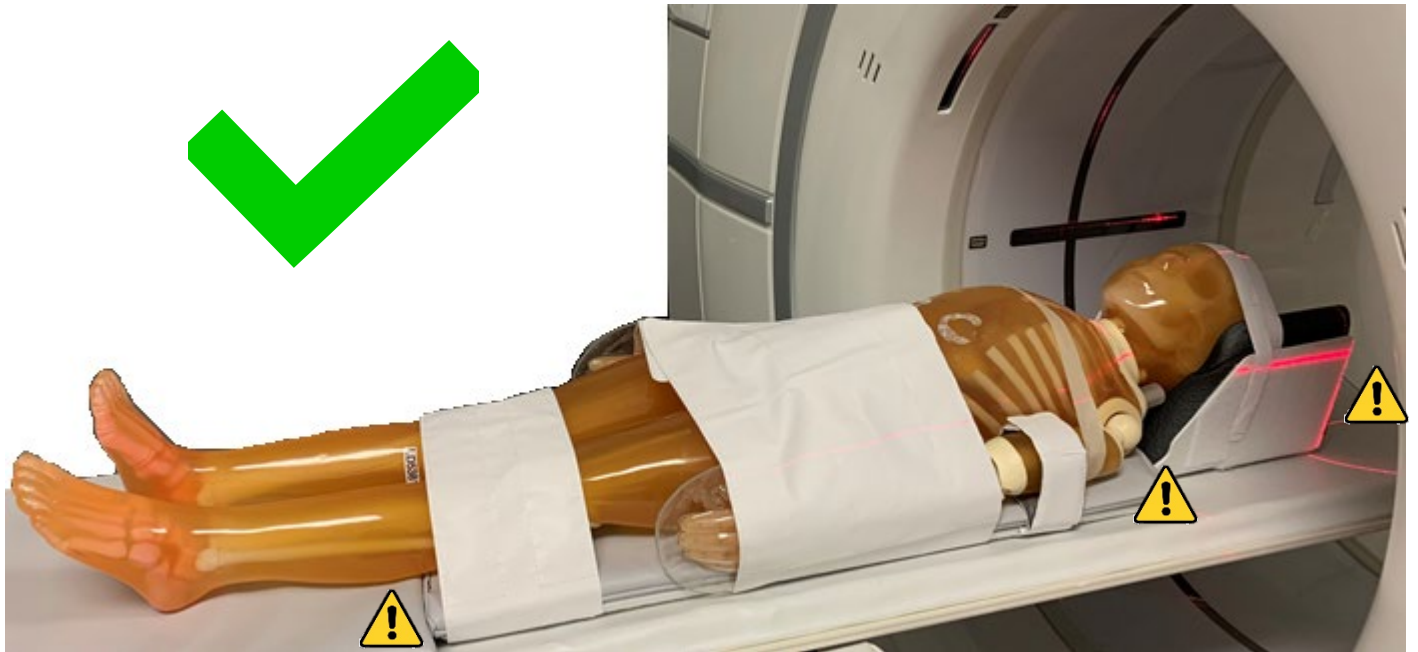



Aire! Ná cuir ball coirp bainteach thar cumair.



Ba chóir go mbeadh an socraitheoir timpeall ~12in nó ~30.5cm ó bhun an bhoird ionas nach bhfuil aon thrasnaíocht ó laiste shíneadh an bhoird.

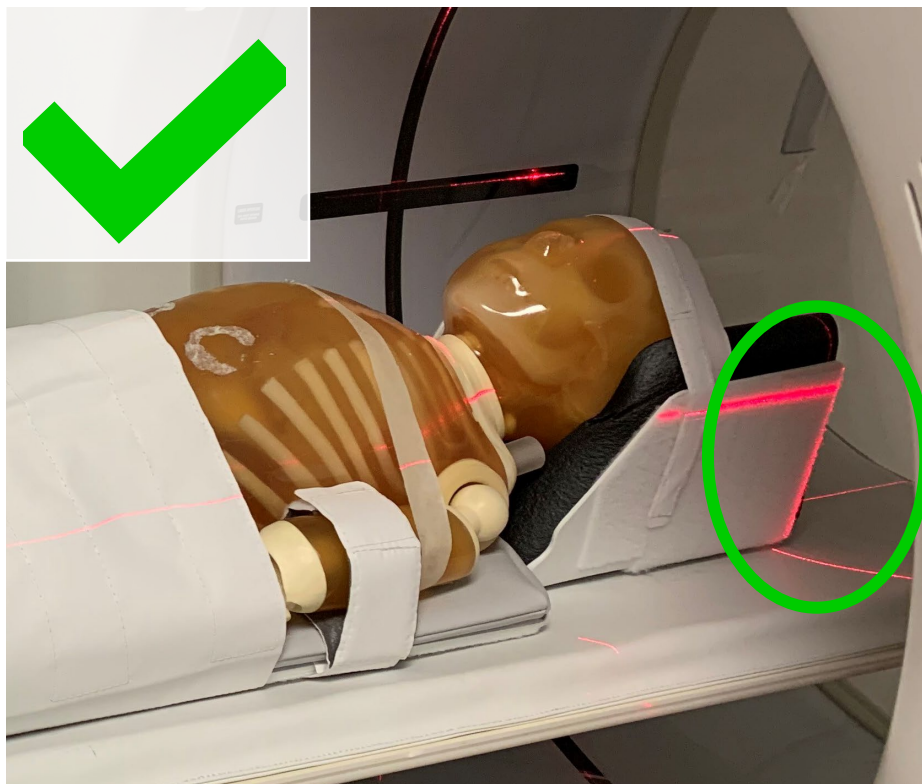

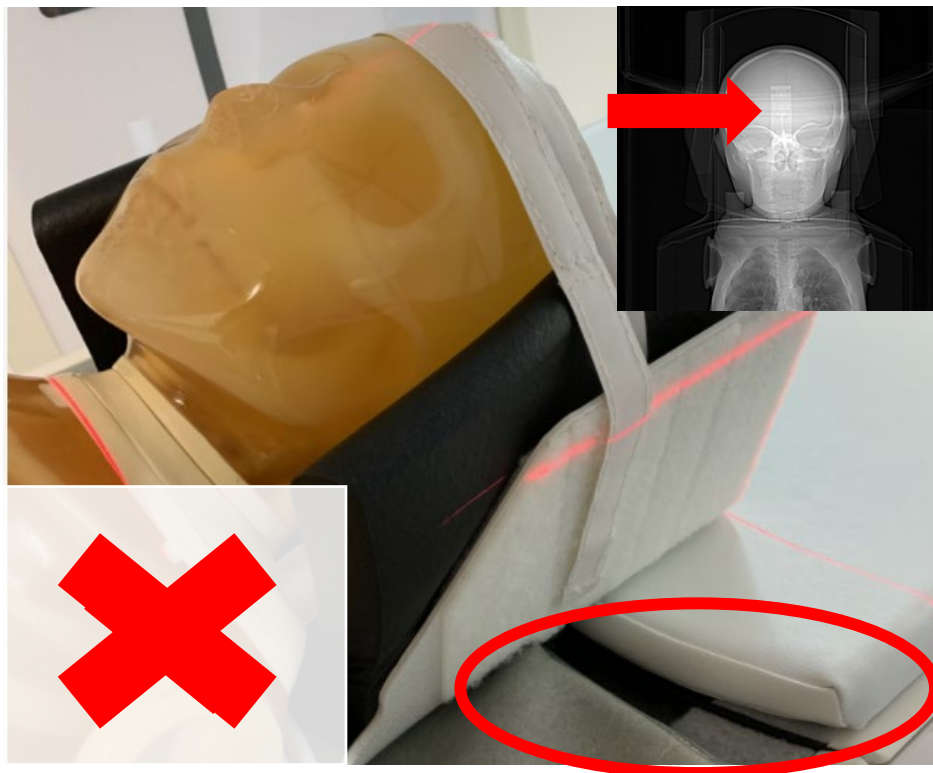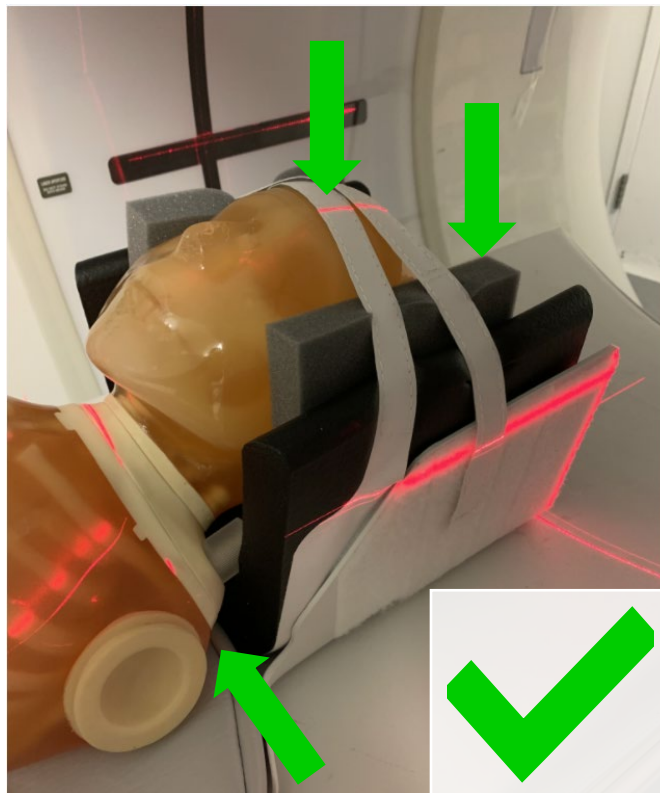

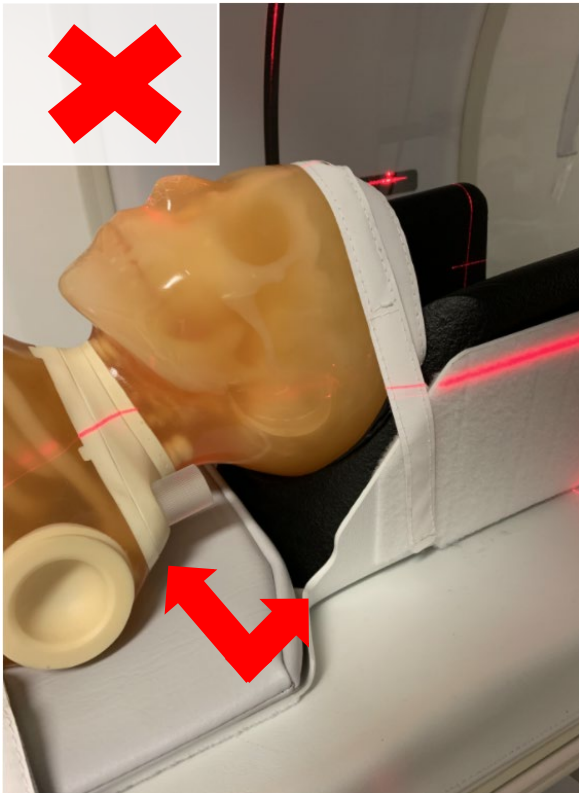

Glanadh agus Díghalrú

Glan é trí chre a bhaint agus díghalraigh é de réir threoracha an déantóra/de réir chleachtais ghlanadh timpeallachta saoráide áitiúla trí úsáid a bhaint as:

- Common household bleach - diluted 10:1 (am díghalraithe 5-nóiméad ar a laghad)
- Sani-Cloth® Bleach Wipes by PDI
- Bleach Germicidal Wipes by Clorox Healthcare®
- Bleach Germicidal Cleaner Spray by Clorox Healthcare®
- Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectant Wipes by Clorox Healthcare®
- Clorox® Multi Surface Cleaner With Bleach
- Micro-Kill Bleach Germicidal Bleach Solution by Medline
- Micro-Kill Bleach Germicidal Bleach Wipes by Medline



Aire! Sruthlaigh táirgí I GCÓNAÍ le huisce glan chun aon iarmhar ó thuaslagán glanta/díghalraithe a bhaint. Mura ndéantar, d'fhéadfadh go ngortódh an t-othar.