


Premier, Voyager, Explorer жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы Пайдалану жөніндегі нұсқаулық



Premier, Voyager, Explorer жүйелерінде пайдаланылатын 28634-303-000 Баланы бекіткіш жиынтықтамасы
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық
Шығарылған күні: 07JUL2021

E8823MR Premier, Voyager, Explorer жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткішті пайдалану жөніндегі нұсқаулық

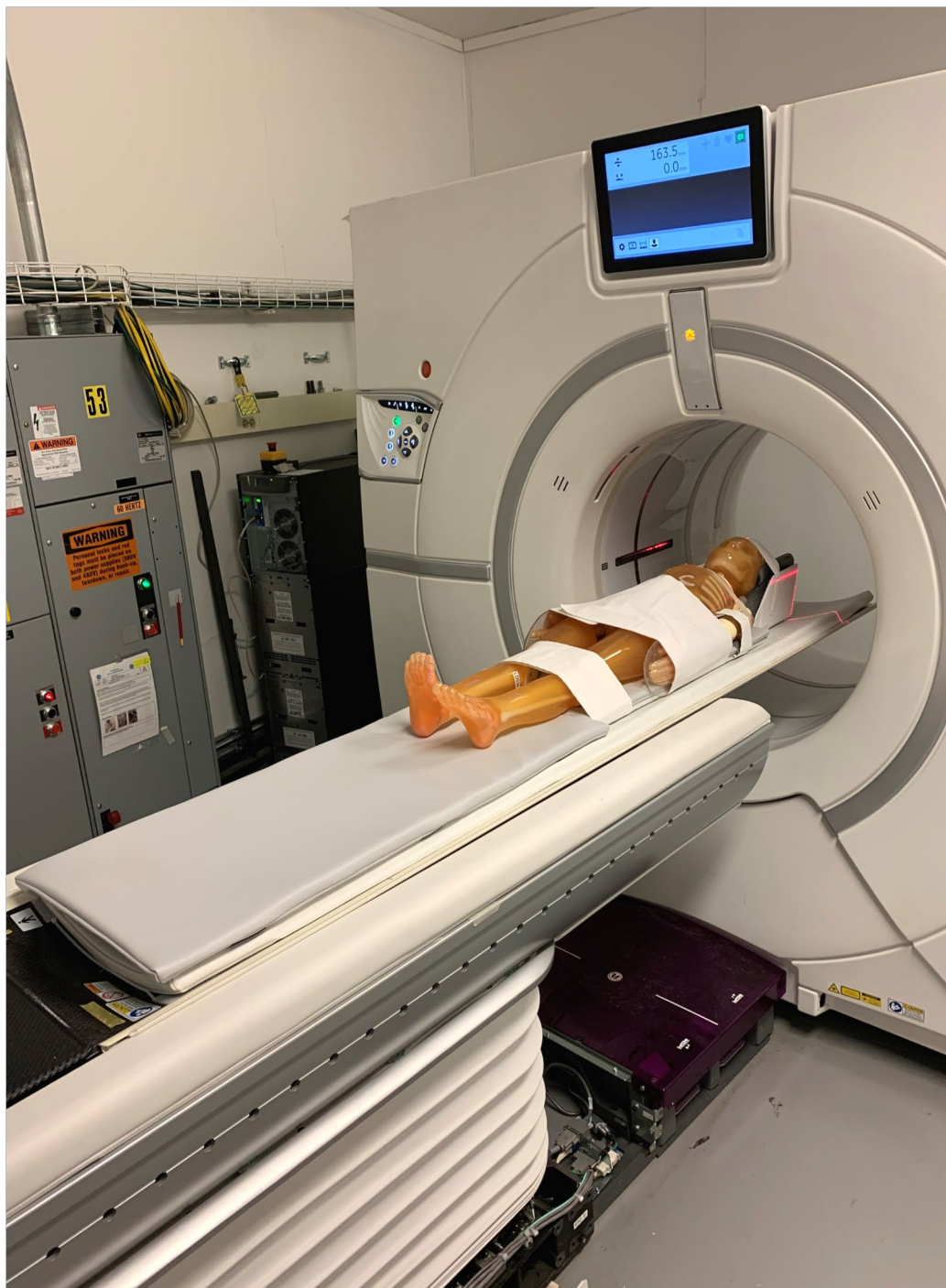

en - E8823MR Child Positioner for Use With Systems: Premier, Voyager, Explorer
 fr - E8823MR Positionneur pour enfant pour systèmes : Premier, Voyager, Explorer
 de - E8823MR Kinderpositionierer zur Verwendung mit Systemen: Premier, Voyager, Explorer
 it - E8823MR Posizionatore da bambino per l'uso con i sistemi: Premier, Voyager, Explorer
 es - E8823MR Posicionador infantil para usar con los sistemas: Premier, Voyager, Explorer
 el - E8823MR Τοποθετητής παιδιού για χρήση με τα συστήματα: Premier, Voyager, Explorer
 ga - E8823MR Socraitheoir Páiste le húsáid in éineacht le Córais: Premier, Voyager, Explorer
 pt-BR - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
 ZH - E8823MR 兒童體位固定裝置 - 適用系統 : Premier、Voyager、Explorer
 ja - E8823MR Premier、Voyager、Explorerシステム対応 チャイルドポジションナー
 bg - E 8823MR Детски позиционер за използване със системи: Premier, Voyager, Explorer
 zh - E8823MR 儿童体位固定装置 - 适用系统 : Premier、Voyager、Explorer
 hr - E8823MR Dječja kolijevka za uporabu sa sustavima: Premier, Voyager, Explorer
 cs - E8823MR Dětská kolébka Kit Pro použití se systémy: Premier, Voyager, Explorer
 da - E8823MR Positioneringsenhed til børn til systemerne: Premier, Voyager, Explorer
 nl - Child Positioner voor gebruik met: Premier, Voyager, Explorer systemen
 et - Lapse positsioneerija süsteemidele Premier, Voyager, Explorer
 fi - E8823MR Lasten asetin käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa: Premier, Voyager, Explorer
 mt - E8823MR Pożizzjonatur tat-Tfal biex jintuza mas-Sistemi: Premier, Voyager, Explorer
 hu - E8823MR Gyermek test rögzítő, amely az alábbi rendszerekkel használható: Premier, Voyager, Explorer
 ko - E8823MR 자식 포지셔너시스템과 함께 사용하기 위해: Premier, Voyager, Explorer
 lv - E8823MR Bērnu fiksators lietošanai ar sistēmām: Premier, Voyager, Explorer
 lt - E8823MR Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas naudoti su sistemomis „Premier“, „Voyager“, „Explorer“
 no - E8823MR Underordnet stillingsstiller For bruk med systemer: Premier, Voyager, Explorer
 pl - E8823MR Pozycjoner pediatryczny do użytku z systemami: Premier, Voyager, Explorer
 pt - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
 ro - E8823MR Kit de leagăn pediatric pentru utilizare cu sisteme: Premier, Voyager, Explorer
 ru - E8823MR Детский позиционер Для использования с системами: Premier, Voyager, Explorer
 sr - E8823MR Дечији позиционер За употребу са системима: Premier, Voyager, Explorer
 id - E8823MR Posisi anak Untuk Digunakan dengan Sistem: Premier, Voyager, Explorer
 sk - E8823MR Detský polohovateľ na použitie so systémami: Premiér, Voyager, Explorer
 sl - E8823MR Komplet za namestitvev otroka v sistemih: Premier, Voyager, Explorer
 sv - E8823MR Barnfixering för användning med systemen: Premier, Voyager, Explorer
 tr - E8823MR Alt konumlayıcı Sistemlerle Kullanım İçin: Premier, Voyager, Explorer
 uk - E8823MR Дочірній позиціонер Для використання з системами: Premier, Voyager, Explorer
 vi - E8823MR Thiết bị Cố định Trẻ em để sử dụng với các Hệ thống: Premier, Voyager, Explorer



Өндіруші:

Domico Med-Device, LLC
 14241 North Fenton Rd.
 Fenton, MI 48430 AҚШ
 810-750-5300
 DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Табиғи каучук
 латекстен
 жасалмаған




Advena Ltd., Tower Business
 Centre, 2nd Flr.,
 Tower Street, Swatar, BKR
 4013 Мальта



Бұл өнім Калифорния штатының мәліметтері бойынша ұрпақ жаңғырту денсаулығына қауіп төндіретін химиялық заттар шығаруы мүмкін. Толығырақ ақпарат алу үшін www.P65Warnings.ca.gov сайтына қараңыз. 1-метил-2-пирролидон (NMP) CAS №: 872-50-4, EC №: 212-828-1

Компоненттер

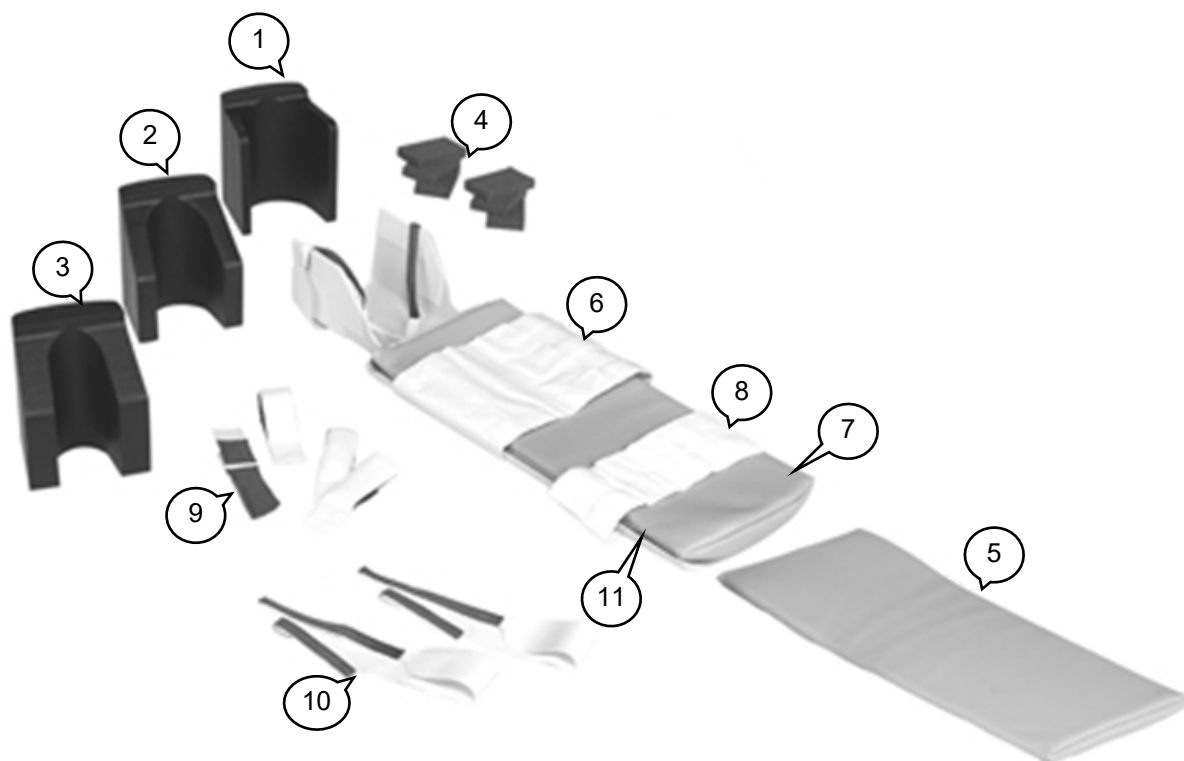

Поз.	Бөлшек №	Сипаттамасы
1	21349	E8005AN MR/NUC Баланың басын орналастырғыш, үлкен
2	21350	E8005AM MR/NUC Баланың басын орналастырғыш, орташа
3	21351	E8005AL MR/NUC Баланың басын орналастырғыш, шағын
4	20603	E8003DG Пенопласт блок
5	28060	E8005BD Төсе, ұзын
6	23802	E8005AG Бекіткішке бала денесін таңатын белдік, жуан
7	28057	E8005AJ Баланы бекіткіш төсемесі
8	28058	E8005AH Бекіткішке бала денесін таңатын белдік, жіңішке
9	26940	E8005BA Бекіткішке баланың білегін таңатын белдік
10	23531	E8005BA Бекіткішке бала басын таңатын белдік
11	21540	E8005AK Баланы бекіткіштің бесігі

Ескертпе: Құрылғыны пайдалануға байланысты орын алатын кез келген жайсыз оқиға туралы өндірушіге және құрылғы орнатылған жердегі денсаулық сақтау органына / өкілетті органға хабарлау керек.




Абай болыңыз! Пациенттің құлауына жол бермеу үшін пациентті жатқызар алдында пациентті орналастыратын үстел тұрақты болуы керек.



Абай болыңыз! Процедураны бастамас бұрын пациентті бекіткішке дұрыстап бекітіп, бекіткішті үстелге пациент құламайтындай етіп белдікпен бекіту керек.

Дайындау


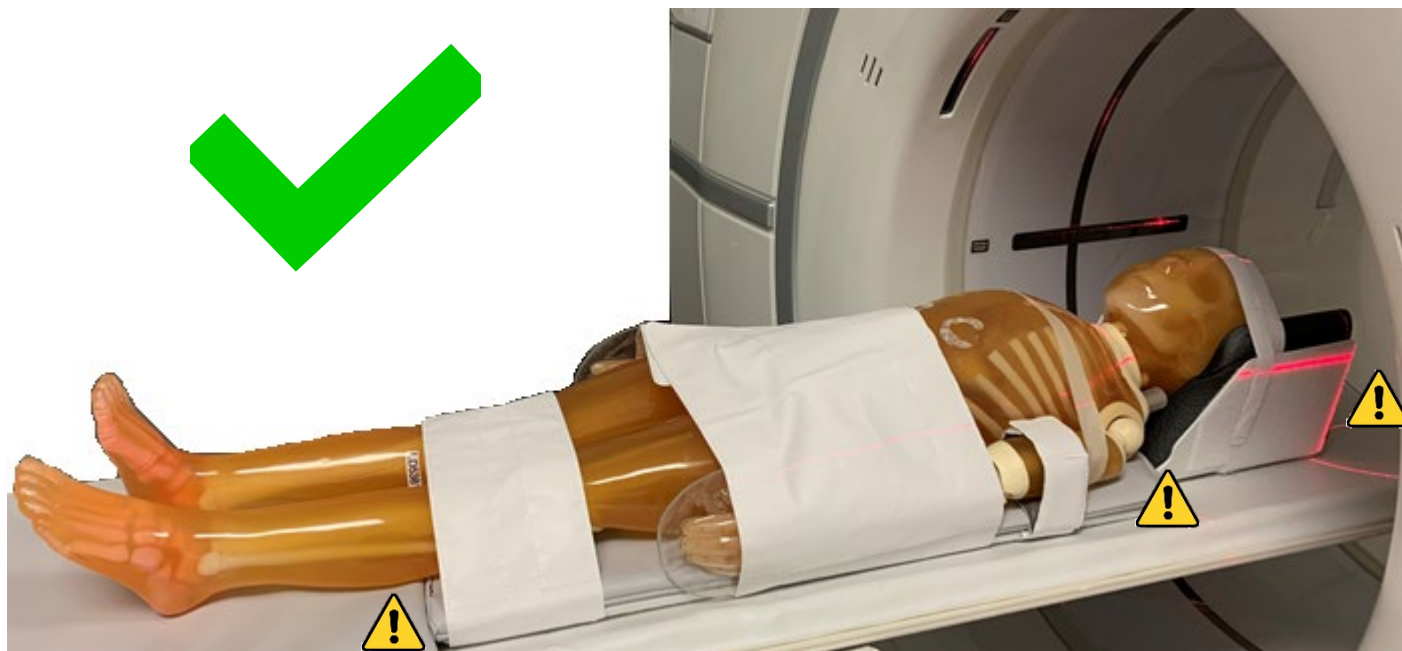




 **Абай болыңыз!** Анатомиялық зерттеу аймағын жіктердің үстіне орналастырмаңыз.





Бекіткішті үстел ұзартқышынан кедергі келтірілмеуі үшін үстел шетінен шамамен 12 дюйм, немесе 30,5 см қашықтықта орналастыру керек.

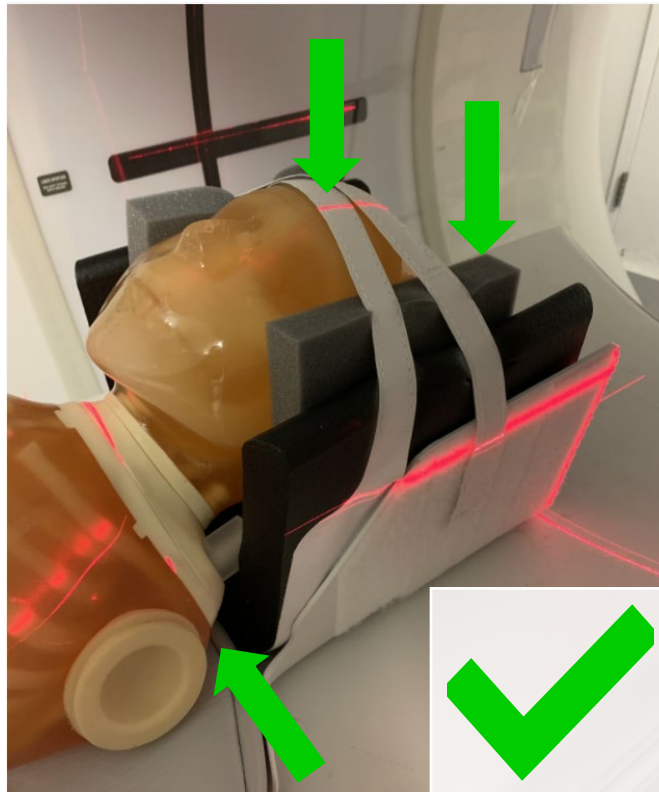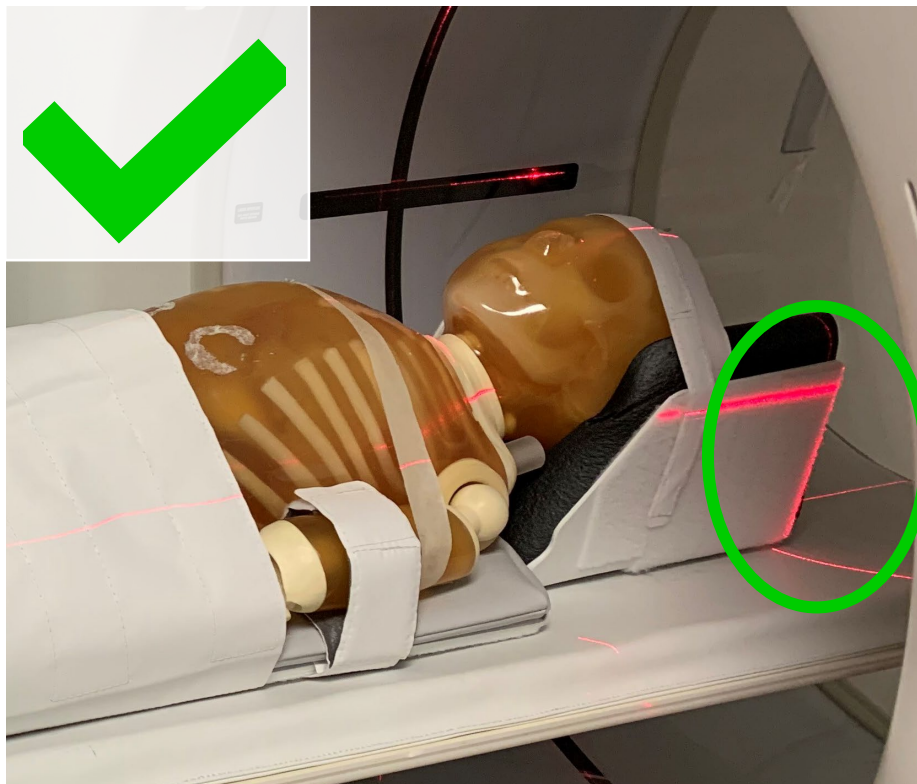

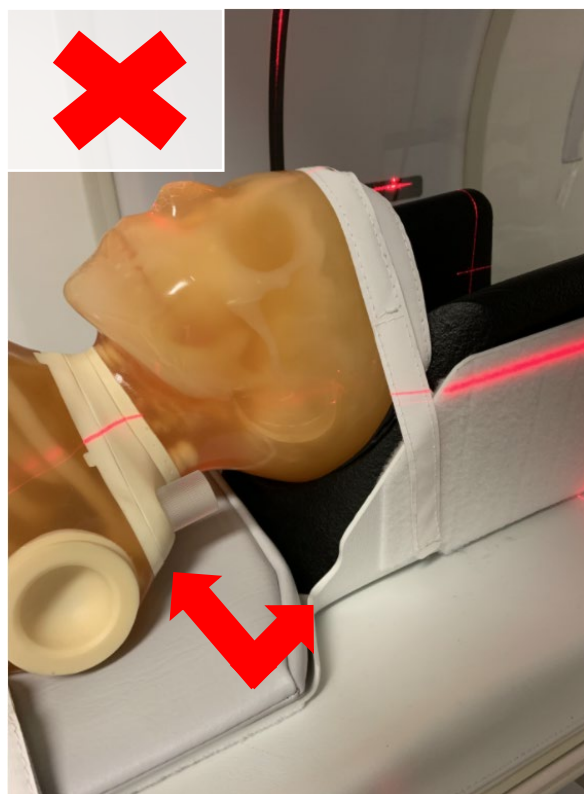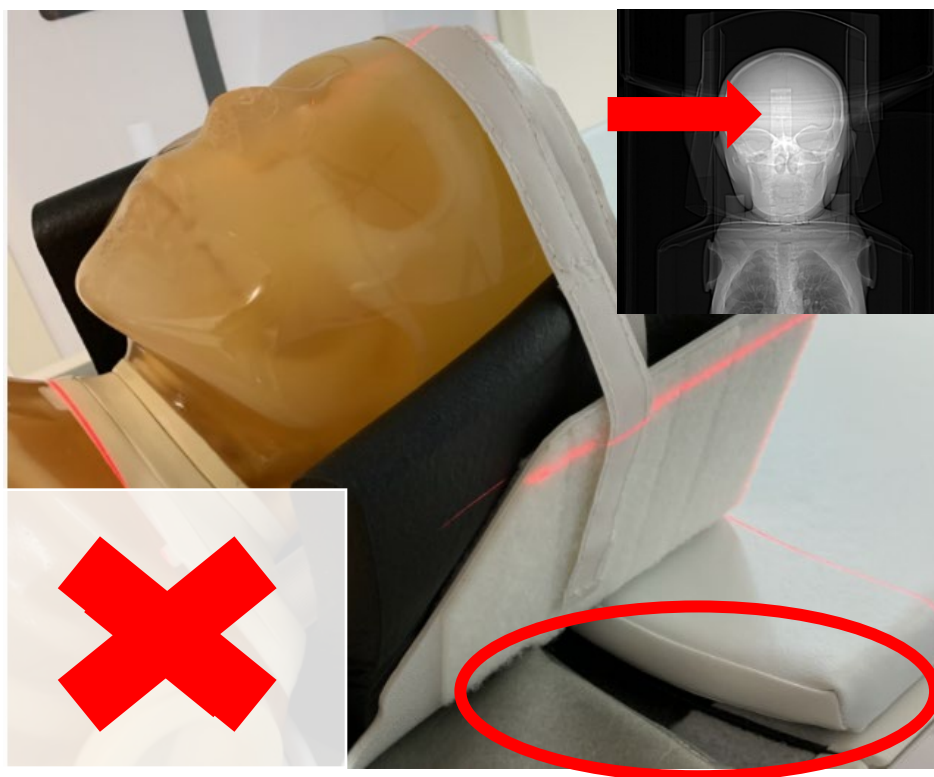



Тазалау және дезинфекциялау

Тазалау мен дезинфекцияны өндірушінің нұсқауларына / жергілікті қоршаған ортаны ластандырмай тазалау әдістеріне сәйкес төмендегі тәсілмен жүргізу керек:

- Қалыпты тұрмыстық ағартқыш – 10:1 пропорцияда сұйытылған (дезинфекция уақыты кемінде 5 минут)
- Sani-Cloth® PDI ағартқыш майлықтары
- Clorox Healthcare® бактерицидті ағартқыш майлықтары
- Clorox Healthcare® бактерицидті ағартып тазалайтын спрейі
- Clorox Healthcare® сутегі асқын тотығымен тазартатын дезинфекциялайтын майлықтарф
- Clorox® Ағартқыш қосылған әмбебап тазартқышы
- Medline компаниясының Micro-Kill бактерицидті ағартқыш ерітіндісі
- Medline компаниясының Micro-Kill бактерицидті ағартқыш майлықтары



Абай болыңыз! Тазартқыш / дезинфекциялатын ерітіндінің қалдықтарын жою үшін таза сумен шаю **КЕРЕК**. Әйтпесе бұл пациентке жарақат әкелуі мүмкін.